

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: ELECTROBISTURI	CÓDIGO: NA
	MARCA: WEM	VERSIÓN: 1
	MODELO: SS501SX	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2023

USO DEL EQUIPO



Dispositivo médico quirúrgico que por medio de eléctrica se utiliza para cauterizar, sellar vasos sanguíneos, detener o reducir el sangrado, este equipo utiliza modos como bipolar y monopolar para realizar diferentes procedimientos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


1. Frecuencia de operación de 390 KHz
2. Requerimientos de alimentación de 85 a 135 V
3. 12 funciones de corte: Corte puro, blend 1, 2,3, corte puro con high cut, blend 1, 2,3, ecut 1,2, 3,4.
4. 400 Watts de corte puro
5. 2 modos de coagulación: Contact desiccate y fulgurate
6. Modo bipolar con ajustes desde 1 Watt y micro bipolar con ajustes de 0.5 Watts

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación IIB de alto riesgo.

PARTES DEL EQUIPO

PARTE DELANTERA:

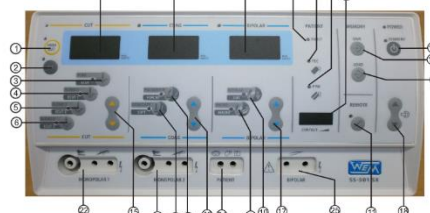


1. Botón para función HIGH CUT
2. Botón para función ALT
3. Botón para función PURE CUT o ECUT
4. Botón para función BLEND 1 o ECUT 1
5. Botón para función BLEND 2 o ECUT 2
6. Botón para función BLEND 3 o ECUT 3
7. Botón para función DISECAR o SOFT
8. Botón para función FULGURAR o FORZADO
9. Botón para función MICRO BIPOLAR o MACRO
10. Botón para función BIPOLAR o BIPOLARCUT
11. Botón para función REMOTO
12. Botón para CARGAR MEMORIA
13. Botón para GUARDAR MEMORIA
14. Botón para STAND BY
15. Botón para ajuste de POTENCIA DE CORTE
16. Botón para ajuste de POTENCIA DE COAGULACIÓN
17. Botón para ajuste de POTENCIA BIPOLAR
18. Botón para ajuste de NIVEL SONORO
19. Pantalla que indica la POTENCIA DE CORTE

MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO


MODO MONOPOLAR:

1. Conecte el pedal MONOPOLAR en el accesorio 1 o 2 situado en la parte posterior del equipo
2. Conecte el cable de la placa a la misma
3. Conecte el otro extremo del cable de la placa a los terminales en el panel frontal de PACIENTE
4. Conecte el lápiz o el pedal en el panel frontal del equipo en MONOPOLAR 1 o MONOPOLAR 2

CONTROL POR PEDAL

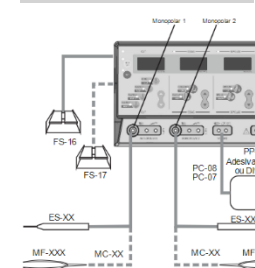

CONTROL POR LAPIZ

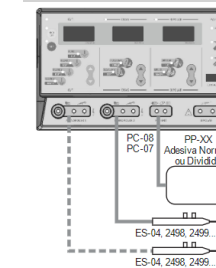

MODO CORTE PURO O ECUT: 100% onda de corte

1. Conecte los accesorios a utilizar
2. Seleccione el botón de PURE CUT
3. Ajuste la potencia de CORTE mediante el botón del ítem 15

MODO BLEND CUT: Consiste en una forma de honda de corte hemostático.

1. Seleccione el modo de BLEND que se va a utilizar:


	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: ELECTROBISTURI	CÓDIGO: NA
	MARCA: WEM	VERSIÓN: 1
	MODELO: SS501SX	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2023

COLOCACIÓN DE ELECTRODO DE RETORNO

1. Prepare el paciente, y coloque el electrodo de retorno lo más cerca posible a la zona a tratar, aproximadamente 15 cm de la zona.
2. No colocar en la cabeza, huesos, ni articulaciones
3. No coloque el electrodo sobre piel lesionada, húmeda o donde haya presencia de hemorragias
4. Evitar que el trayecto de la corriente pase por implantes
5. El electrodo debe de quedar bien adherido a la piel, sien espacios, ni rollos, se puede fijar en el estado del iniciador REM.

MODO BIPOLAR:


1. Conecte el pedal BIPOLAR en la parte posterior del equipo
2. Conecte el otro extremo del cable de la placa a los terminales en el panel frontal de BIPOLAR
3. Seleccione en el equipo el botón BIPOLAR O MICROBIPOLAR
4. Ajuste la potencia en caso de ser necesario, de los botones del ítem 17

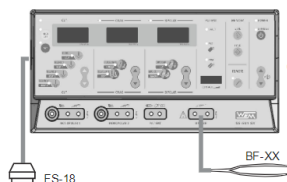

20. Pantalla que indica la POTENCIA DE COAGULACIÓN

21. Pantalla que indica la POTENCIA BIPOLAR
22. Accesorio para MONOPOLAR 1
23. Accesorio para MONOPOLAR 2
24. Accesorio para conexión TARJETA PACIENTE
25. Accesorio para conexión BIPOLAR
26. Indicación de LED ROJO de falla en tarjeta paciente
27. Indicación de LED NARANJA de falla en tarjeta
28. Indicación de LED NARANJA falla tarjeta dividida
29. Barra luminosa que indica el contacto de la placa del paciente

PARTE TRASERA:

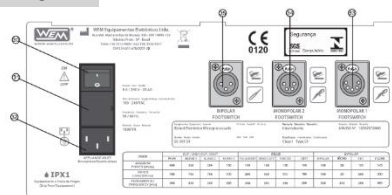

30. Botón de ON/OFF
31. Portafusiles
32. Conexión de cable AC
33. Conexión para accesorio de pedal MONOPOLAR 1
34. Conexión para accesorio de pedal MONOPOLAR 2
35. Conexión para accesorio de pedal BIPOLAR

BLEND 1: 75% de onda de CORTE y 25% HEMOSTASIA

BLEND 2: 50% de onda de CORTE y 50% HEMOSTASIA

BLEND 3: 25% de onda de CORTE y 75% HEMOSTASIA

2. Realice la activación de corte por medio del pedal de pie MONOPOLAR o por medio del LAPIZ
3. Si necesita ajustar los valores de potencia, seleccione los botones del ítem 15

MODO HIGHT CUT: Se utiliza para mantener una regulación de corte constante y con la potencia mínima necesaria:

1. Seleccione el botón HIGHT CUT ítem 1

MODO ALT:

1. Seleccione el botón ALT ítem 2

MODO COAGULACIÓN DISECADA:

1. Pulse la tecla DISECAR ítem 7 y desactive ALT
2. Accione el pedal de COAG y verifique que los indicadores estén encendidos
3. Si necesita ajustar los valores de potencia, seleccione los botones del ítem 16

MODO COAGULACIÓN FORZADA:

1. Pulse la tecla FORZADA y active ALT
2. Accione el pedal o el lápiz de COAG y verifique que los indicadores estén encendidos
3. Si necesita ajustar los valores de potencia, seleccione los botones del ítem 16.

  	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: ELECTROBISTURI	CÓDIGO: NA
	MARCA: WEM	VERSIÓN: 1
	MODELO: SS501SX	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2023

--	--	--