


Guía rápida de funcionamiento monitor IMEC

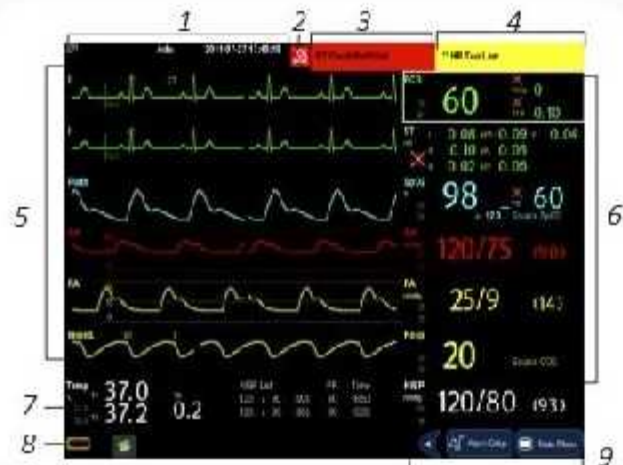

Pantalla de visualización

1. Área de información del paciente
2. Símbolos de alarma
3. Área de alarmas técnicas
4. Área de alarmas fisiológicas
5. Área de ondas
6. Área A de parámetros
7. Área B de parámetros
8. Área de mensajes
9. Área de teclas de acceso rápido

Ajustes de la pantalla

Para acceder a la ventana [Ajuste pantalla], seleccione [Menú principal] → [Ajustes pantalla] → [Disposición pant >>]. En esta ventana puede asignar las posiciones de los parámetros y las ondas. Los parámetros u ondas cuyas posiciones no estén asignadas no se mostrarán.

- En el área A puede elegir visualizar los parámetros que tengan ondas y sus ondas.
- En el área B puede elegir visualizar los parámetros y sus ondas.
- En el área C puede elegir visualizar todos los parámetros cuyas ondas asociadas no se visualizarán.

Encendido

1. Antes de empezar a realizar mediciones, compruebe el monitor del paciente en busca de cualquier daño mecánico y asegúrese de que todos los cables externos, complementarios y de accesorios se han conectado correctamente.
2. Enchufe el cable de alimentación a una fuente de alimentación de CA. Si pone en marcha el monitor de paciente con la alimentación de las baterías, asegúrese de que las baterías están suficientemente cargadas.
3. Pulse el interruptor de encendido/apagado de la parte frontal del monitor. Se muestran las pantallas de inicio y la luz de alarma se enciende en amarillo. A continuación, la luz de alarma cambia a rojo y se apaga después de que el sistema emita un pitido.
4. El monitor accede a la pantalla principal.



Guía rápida de funcionamiento monitor IMEC



1. Interruptor de encendido y apagado. Pulse el interruptor para encender el monitor. Una vez encendido el monitor, si mantiene pulsado este interruptor este se apagará.

2. LED de alimentación de CA. Se enciende cuando la alimentación de CA está conectada. Verificar que este se encuentre encendido.

3. LED de batería.

-Encendido: cuando la batería está instalada y la fuente de CA está conectada.

-Apagado: cuando la batería no está instalada, no funciona correctamente o no hay conectada ninguna fuente de CA al apagarlo.

-Parpadeo: cuando el monitor funciona con la batería.

4. Luz de alarma. Cuando se produce una alarma fisiológica o técnica, esta luz parpadeará como se define a continuación.

-Alarmas de nivel alto: parpadea de forma rápida en rojo.

-Alarmas de nivel medio: parpadea de forma lenta en amarillo.

- Alarmas de nivel bajo: ilumina en amarillo sin parpadear.

5. Pantalla de visualización.

6. Púlselo para silenciar todos los sonidos de alarma.

7. Púlselo para poner en pausa o restaurar alarmas.

8. Púlselo para congelar o continuar las ondas.

9. Mando. Permite recorrer los elementos de la pantalla. Cuando llegue al elemento deseado, presione la rueda para seleccionarlo.

10. Si no aparece ningún menú en la pantalla, al pulsarlo accederá al menú principal. Si aparece un menú en la pantalla, al pulsarlo se cerrará dicho menú.

11. Púlselo para iniciar o detener los registros.

12. Púlselo para iniciar o detener las mediciones de PNI.

13. Conectores para parámetros.

14. Conector de red.

15. Entrada de alimentación de CA.

Recomendaciones

1) Verificar la conexión del equipo con el cable AC [15]

2) Encender el equipo (1)

3) Identificar y revisar el tipo de paciente a monitorizar (adulto, pediátrico o neonatal)

4) Revisar que se cuente con los accesorios según el tipo de paciente

5) Ingresar datos de paciente (menu - ajustes de pantalla - datos de paciente)

6) Configuración de parámetros (ajuste de pantalla lo que dice en la guía)

7) Configuración de límites de alarmas según clínica del paciente (lo puede realizar ingresando a cada uno de los parámetros, desde el botón de ajuste de alarmas o desde el menu- ajuste de alarmas)

Notas:

Si va a trabajar el equipo en modo batería, asegurarse que el equipo se encuentre cargado.

Si no aparece algún parámetro o requiere ajustar la pantalla: poner lo que dice en ajuste de pantalla

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1

PREPARAR LIMPIADOR

Klorkleen + Vital Care

1. Realizar solución limpiadora dependiendo de la cantidad deseada:



Para 1 pastilla agregar 1 Litro de agua

Para 1/2 pastilla agregar 500 ml de agua

2. En el recipiente de Vital Care con las toallitas, aplicar la solución desde el centro hacia la periferia.

3. Tapar el balde y rotularlo

4. Esperar 20 minutos



2


PARA LIMPIAR EQUIPOS BIOMÉDICOS



Verifique que el equipo esté desconectado, que no tenga cables pelados o puntos de riesgo eléctrico.



Tomar un pañito de Vital Care preparado con Klorkleen y limpiar la superficie del equipo, incida de zonas de difícil acceso.

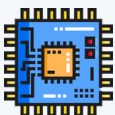

A la hora de realizar la limpieza tener cuidado con tarjetas o componentes electrónicos.

ADVERTENCIA



Inhalación

Ingestión

Contacto con la piel

Contacto con los ojos