

Equipo: Monitor Signos Vitales


Marca: Biolight

Modelo: P15

Función del equipo

Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados

Elementos del equipo

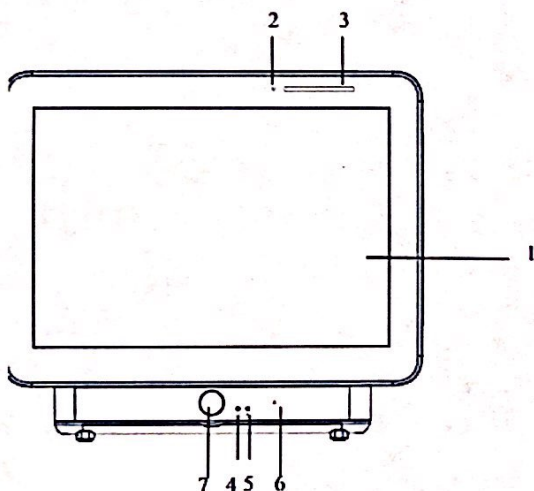

1. Pantalla de visualización
2. Inducción de luz: por ejemplo, cuando el ambiente está oscuro, el brillo de la pantalla se puede ajustar automáticamente.
3. Lámpara de alarma La lámpara de alarma con diferente color y frecuencia de parpadeo indica el nivel de alarma técnica y alarma fisiológica:
 - Alarma de alto nivel: la lámpara parpadea rápidamente en rojo.
 - Alarma de nivel medio: la lámpara parpadea lentamente en amarillo.

- Alarma de nivel bajo: la lámpara se enciende en cian sin parpadear.

4. Lámpara indicadora de energía

Es un LED que se ilumina en verde y naranja, el estado del LED se especifica de la siguiente manera:


- Verde: cuando la red eléctrica de CA está conectada.
- Naranja: cuando la red eléctrica de CA no está conectada y el monitor está alimentado por batería.
- Apagado: Cuando la red eléctrica no está conectada.

5. Lámpara indicadora de carga

- Iluminado: cuando la batería se está cargando.
- Apagado: cuando la batería está completamente cargada o no hay batería en el monitor.


6. Agujeros fonéticos.

7. Interruptor de encendido

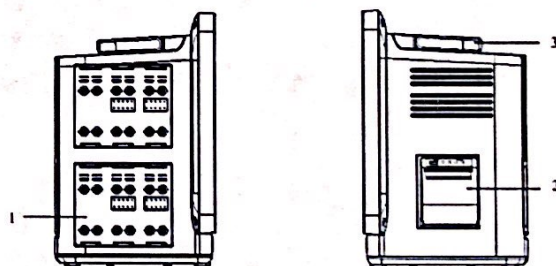

- 1) Ranuras para módulos de parámetros externos
- 2) Registrador
- 3) Asa de transporte

Operación Básica

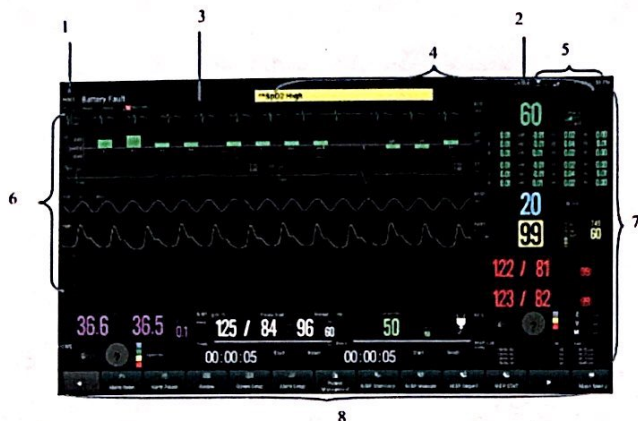

1. Área de información del paciente Muestra el número de habitación, el número de cama, el nombre del paciente, la categoría del paciente, etc.

2. Configuración actual

3. Área de alarma técnica Muestra información de alarma técnica e información de aviso. Visualización cíclica cuando hay varios mensajes. Seleccione esta área para abrir el menú información de alarma para ver la alarma técnica actual.

4. Área de alarma fisiológica

Muestra los mensajes de alarma fisiológica, los mensajes de alarma de nivel medio y bajo se muestran a la izquierda, mientras que los mensajes de alarma de nivel alto se muestran a la derecha.

5. Visualización cíclica cuando hay varios mensajes. Seleccione esta área para abrir el menú Información de alarma para ver la alarma fisiológica actual

Área de información de estado del sistema Muestra el volumen de la alarma, el estado de conexión de los dispositivos de red y almacenamiento, la batería y la hora del sistema. Para el icono de estado de la batería, consulte el capítulo 28 Batería

6. Área de forma de onda Muestra las formas de onda del parámetro fisiológico. La etiqueta se muestra en

la esquina superior izquierda de cada área de forma de onda. Seleccione el área de forma de onda de un parámetro e ingrese al menú de configuración de parámetros correspondiente.

7. Área de parámetros

Consta de varias áreas de parámetros y muestra el valor del parámetro, la unidad, el límite de alarma y el estado de la alarma, etc. Aparece una etiqueta en la esquina superior izquierda de cada área de parámetros. Seleccione el área de parámetros de un parámetro para ingresar al menú de configuración de parámetros correspondiente.

8. Área de teclas rápidas táctiles

Muestra teclas rápidas, estas teclas rápidas se utilizan para realizar algunas operaciones comunes.

Limpieza y Desinfección

- 1) Se recomienda hacer limpieza integral al equipo una vez por día, al inicio o final de la programación.
- 2) Apagar y desconectar el equipo mientras se genera la limpieza y desinfección.
- 3) Limpie las superficies externas con un paño semihúmedo con alcohol o detergente neutro.
- 4) Pase un paño suave y seco por las superficies externas del equipo, retirando los excesos de alcohol o detergente.