

2 Controles e indicadores

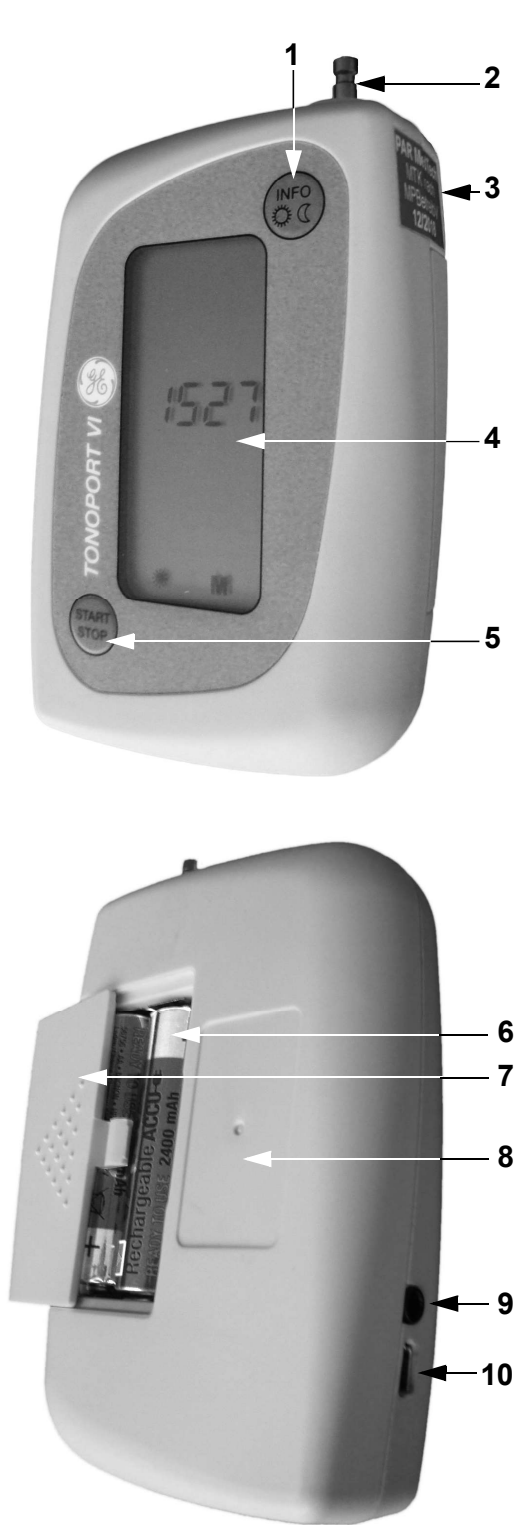


Fig. 2-1 Controles e indicadores del TONOPORT VI

Funciones del botón

Botón 	Mensaje en la pantalla	Función
Pulsar una vez	H 1	Limpiar memoria
Pulsar dos veces	H 2	Ajustar fecha y hora
Pulsar tres veces	H 3	Seleccionar protocolo de medición
Pulsar cuatro veces	H 4	Activar modo de calibración
Pulsar cinco veces	H 5	Mostrar versión del firmware
Pulsar seis veces	H 6	Seleccionar fuente de energía
Pulsar siete veces	H 7	Activar/desactivar señal acústica
Pulsar ocho veces	H 8	Cambiar unidad de presión entre mmHg y kPa
Pulsar nueve veces	H 9	Seleccionar método de medición: método de medición por desinflado o método de medición por inflado

- 1 Botón  : pulse para ver las lecturas de parámetros más recientes. La pantalla mostrará:
- valor sistólico "S" (unidad mmHg o kPa indicada en la pantalla)
 - valor diastólico "D" (unidad mmHg o kPa indicada en la pantalla)
 - frecuencia del pulso "FC" (unidad min⁻¹)
- Se usa el mismo botón
- para alternar entre la fase diurna y la fase nocturna (sección "Cambio entre fase diurna y fase nocturna") y
 - para programar el monitor Holter (capítulo 3 "Configuración")
- 2 Conexión para manguito de presión arterial
- 3 Marca de calibración
- 4 Pantalla de cristal líquido (LCD)
- 5 Botón  : pulse para iniciar y detener una medición y para confirmar entradas
- 6 Pilas (recargables)
- 7 Tapa del compartimento de las pilas
- 8 Placa de identificación
- 9 Puerto para conexión a PC (RS232)
- 10 Puerto para conexión a PC (USB)