

Eagle II™, EMV+®, and AEV® Quick Reference Guide

ZOLL.

Warning! DO NOT use in MRI environment.

Ventilator Connections and Setup


1. Make the following ventilator connections and ensure that all connections are secure:

Ventilator circuit:

- a. Exhalation port 
- b. Transducer port 
- c. Gas output port 

Remaining connections:

- d. Oxygen via high-pressure hose  280 - 600 kPa
(40 - 87 PSIG)
(Compressed O₂: 55 psig [380 kPa])
- e. Pulse oximeter
- f. Power cable

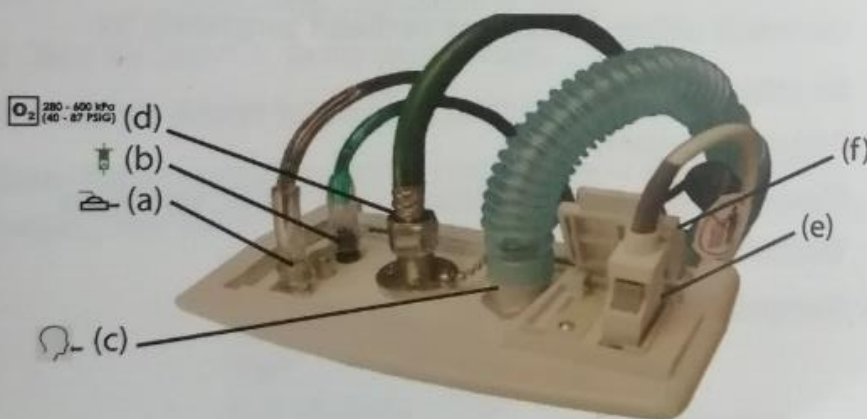

For complete details on operating the ventilator, refer to the
ZOLL Ventilator Operator's Guide (REF 906-0731-01-01).



Eagle II™, EMV+®, and AEV®

Quick Reference Guide

ZOLL®

Ventilator Connections and Setup (continued)

2. Verify the power source (battery and/or external power). 
3. Start the ventilator by turning the Power Switch to "I" (ON).



Power Switch

4. Allow the ventilator to perform initial Self Check.
5. Use default settings or configure ventilator parameters for the patient.
6. Perform Operational Test.
7. Attach the patient to the ventilator circuit to begin ventilation.

WARNING! DO NOT leave the patient unattended.

8. Configure the alarms for the patient.


Eagle II, EMV+, and AEV[®] Quick Reference Guide

ZOLL.

Ventilator Settings

1. To change settings, press the applicable parameter button to highlight the setting:


- Single press for primary parameters (only solid text parameters can be adjusted).
- Double/multiple press for secondary parameters/alarm limits.
- Press and hold for context menus.

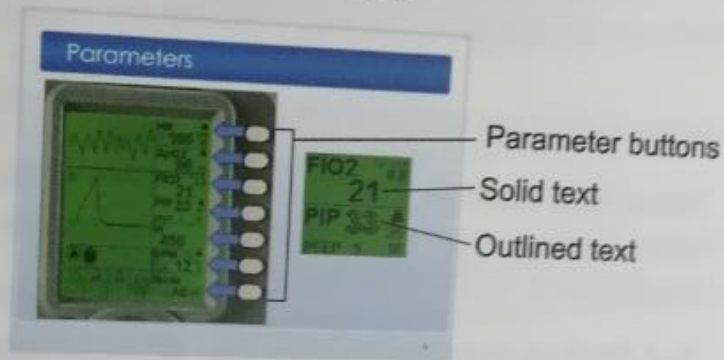

2. Turn the Dial  to the desired value.

3. Press the Accept button  to confirm the selection.

Note: Popup messages (settings conflict, alarm disable, extreme ranges) may appear that require you to select additional information.

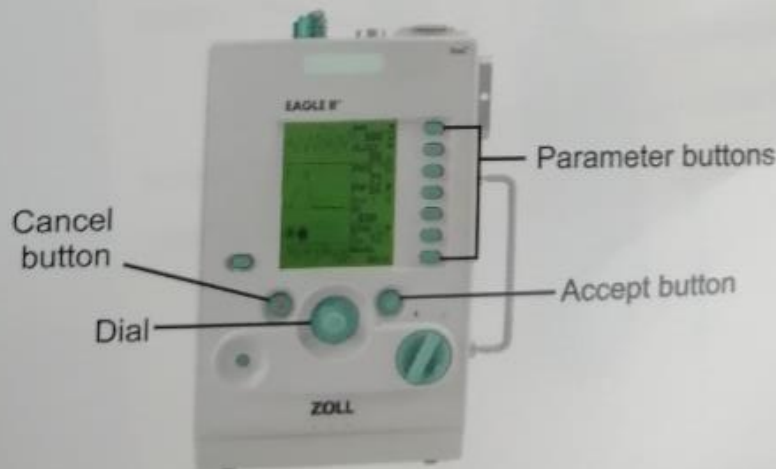

Eagle II™, EMV+®, and AEV®

Quick Reference Guide

ZOLL

Alarms

For complete details on all alarms and resolution details, refer to the ZOLL Ventilator Operator's Guide (REF 906-0731-01-01).



Green: Patient and ventilator are operating as intended.


Yellow (Low Priority): Patient and ventilator are functioning within set parameters; however, the operator must be aware of information during ventilator operation.

Red (Medium and High Priority): Patient and/or ventilator are not performing as intended and immediate attention is required.

To mute low and medium priority alarms, press the Cancel button .

Low Flow Oxygen (O₂ Reservoir) as Oxygen Source

1. Attach the O₂ supply hose to the 3-liter adapter and the gas source.
2. Configure the O₂ source:
 - a. **Concentrator use:** start the O₂ concentrator, set to maximum flow, and adjust as required.
 - b. **Flowmeter use:** set to patient's approximate minute volume flow, and adjust as required.
3. Configure the ventilator, using the appropriate patient setting:
 - a. Press and hold the FIO₂ parameter button; the FIO₂ menu displays.
 - b. Use the dial to turn on setting.
 - c. Press the Accept button ☑ to confirm the selection; the + icon displays in the O₂ parameter window.
4. Attach the ventilator circuit and pulse oximeter to the patient.
5. Monitor the patient and the pulse oximeter, and adjust O₂ flow to maintain the desired pulse oximeter level.

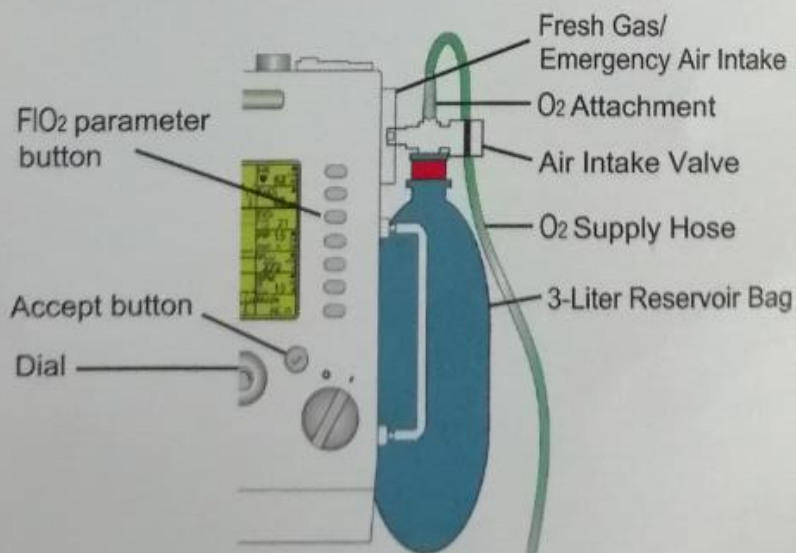



Suplemento de la Guía del Usuario del Ventilador ZOLL Modo Silencioso/Oscuro

La fecha de publicación de la *Suplemento de la Guía del Usuario del Ventilador ZOLL Modo Silencioso/Oscuro* (REF 9650-002356-10 Rev. B) es **January, 2017**.

Copyright © 2017 ZOLL Medical Corporation. Todos los derechos reservados. ZOLL and EMV+ son marcas comerciales registradas de ZOLL Medical Corporation en Estados Unidos u otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Permisos de copyright limitados

Por medio del presente se otorga permiso a toda agencia gubernamental o militar para que reproduzcan todos los materiales incluidos en el presente cuando su fin sea el de usarlos en programas de capacitación de servicios gubernamentales o militares u otros programas de capacitación técnicos.



ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA USA
01824-4105



ZOLL International Holding B.V.
Newtonweg 18
6662 PV ELST
The Netherlands



0123

Suplemento de la Guía del Usuario del Ventilador ZOLL Modo Silencioso/Oscuro

El modo Silencioso/Oscuro es una función que solo está disponible en el modelo EMV+, la versión para uso militar del ventilador ZOLL.

En condiciones normales, las alarmas sonoras y visuales del ventilador EMV+ alertan al operador respecto de posibles problemas con el paciente o el aparato. Sin embargo, en determinadas situaciones, las alarmas sonoras y visuales pueden representar un peligro tanto para el paciente como para el operador, ya que advierten a los demás respecto de su presencia. Características del modo Silencioso/Oscuro del ventilador EMV+:

- Se desactiva la alarma sonora.
- Se desactiva la retroiluminación de la pantalla LCD y los botones **Aceptar/Seleccionar** y **Silenciar/Cancelar**.
- Se emite solo una luz infrarroja para el indicador LED de alarma.

Si se activa este modo, la pantalla LCD aún puede verse mediante la transflectancia de luz visible o con el uso de un equipo de gafas de visión nocturna (night vision goggles, NVG) en lugares oscuros. El equipo de NVG utilizado en este modo de funcionamiento debe detectar luz infrarroja para permitir que el operador identifique si se ha activado una alarma.

Advertencia! Nunca debe utilizar el modo Silencioso/Oscuro si no cuenta con el equipo de NVG adecuado y, antes de iniciar una operación, siempre debe asegurarse de que dicho equipo sea capaz de detectar la luz infrarroja.

Cómo activar y desactivar el modo Silencioso/Oscuro:

1. Presione los botones **Menú** y **Resp. manual/P. Meseta** mientras la unidad se esté encendiendo. De esta manera, el dispositivo se configura para iniciarse sin luz visible ni alarmas sonoras. En la pantalla del dispositivo, se mostrará la opción *MODO SILENCIOSO/OSCURO ACTIVADO. PRESIONE LA TECLA ACEPTAR PARA INGRESAR AL MODO SILENCIOSO/OSCURO AHORA*. Si el dispositivo se inicia de esta manera, el modo Silencioso/Oscuro permanecerá activado mientras la unidad se encuentre encendida (al apagar el dispositivo, el modo Silencioso/Oscuro se desactivará y deberá volver a activarse la próxima vez que encienda el dispositivo).
 - a. Si presiona **Aceptar/Seleccionar** mientras el mensaje se muestra en pantalla, el dispositivo continuará funcionando en modo Silencioso/Oscuro.
 - b. Si presiona **Silenciar/Cancelar** se activarán las alarmas sonoras y visuales, así como la retroiluminación de la pantalla LCD. Además, el modo Silencioso/Oscuro se agregará a las opciones disponibles en **Menú**, para que el operador pueda ingresar al modo Silencioso/Oscuro en cualquier momento durante el ciclo de encendido en curso.
2. Al utilizar el ventilador en modo Silencioso/Oscuro, el operador debe supervisar al paciente y controlar el dispositivo con sumo cuidado.
3. Para desactivar el modo Silencioso/Oscuro, presione **Menú**, seleccione *MODO SILENCIOSO/OSCURO* y, luego, presione *DESACTIVAR*, seguido de **Aceptar/Seleccionar**.
 - a. Se puede volver a activar el modo Silencioso/Oscuro siempre que el dispositivo no se apague.

-
4. Si se detecta una alarma de prioridad alta, la luz LED infrarroja parpadea con una frecuencia de 2 Hz.
 - a. Presionar el botón **Silenciar/Cancelar** no afecta la frecuencia de parpadeo de la luz LED.
 - b. El operador debe iniciar la ventilación manual de inmediato.
 5. Si el dispositivo detecta una alarma de prioridad media o baja, la luz LED infrarroja parpadea con una frecuencia de 1 Hz.
 - a. La luz LED infrarroja continuará parpadeando mientras las alarmas de prioridad media estén activas. Si presiona el botón **Silenciar/Cancelar**, la luz LED infrarroja permanecerá encendida durante 30 segundos.
 - b. La luz LED infrarroja parpadea cuando el dispositivo detecta una alarma de prioridad baja. Si presiona el botón **Silenciar/Cancelar**, la luz dejará de parpadear y solo se mostrará el mensaje de forma permanente.