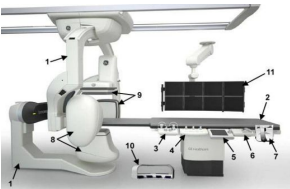


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012															
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE:	01												
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA: 15	MES: 03	AÑO: 2023												
Nombre del equipo:	ANGIOGRAFO BIPLANAR	Modelo:	INNOVA IGS 630		Riesgo del equipo:	IIB												
Marca:	GENERAL ELECTRIC		Clasificación del equipo:		DIAGNOSTICO													
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO														
 Sistema biplano diseñado para facilitar una amplia gama de funcionalidades en procedimientos angiográficos, proporcionando imágenes angiográficas 2D y 3D de alta nitidez y orientación en tiempo real, manteniendo al mismo tiempo la dosis de radiación al mínimo posible. Este sistema está optimizado para ofrecer una calidad de imagen excepcional, que es esencial para diagnósticos y tratamientos precisos en intervencionismo complejo. Además, está proyectado para proporcionar un flujo de información continuo, sirviendo como una plataforma robusta para soluciones de orientación guiada por imágenes multi-modalidad, apoyando tanto en el diagnóstico como en procedimientos terapéuticos intervencionistas.		 1. Estativo 2. Mesa 3. Caja multifuncionales 4. Mando de estado en el lado de la mesa (TSSC) 5. Pantalla táctil Innova Central 6. 3D en la sala 7. Mando multifunción 8. Tubos de rayos X 9. Detector digital 10. Pedal Doble 11. Suspensión de los monitores LCD		Modos de Adquisición: DSA, Cardíaco, InnovaChaseTM, Innova 3D/CT Modos de Fluoroscopia: Tasas de Fotogramas: 30 cps, 15 cps, 7,5 cps y opcionalmente 3,75 cps. Fluorostore: Almacena hasta 450 (o 900) imágenes fluoroscópicas. Visualización Simultánea: Sub/no sub disponible. Adquisición Angiográfica: DSA con 0,5 - 7,5 cps, incluyendo desplazamiento de píxeles automatizado. DSA multisegmento con flexibilidad en frecuencia de imagen y duración. Adquisición Dinámica: 30 cps, 15 cps y 7,5 cps. Innova Chase: 5 cps.														
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN														
Potencia y Rangos de Operación: - Potencia Máxima: 100 kW. - Potencia Promedio Máxima: 3,2 kW. - Rango de kV: 40 - 125 kV. - Rango de mA: 10 - 1000 mA. Fluoroscopia: - Potencia Máxima: 3.2 kW de media (13.3 kW máx.) para ambos modelos (IGS 620 e IGS 630). - Corriente Máxima del Tubo: IGS 620: 31,5 mA en promedio, 130 mA máximo, 60 - 100 kV. IGS 630: 31,2 mA en promedio, 130 mA máximo, 60 - 100 kV. Radiografía: - Potencia Máxima en Modo con Rejilla: 48 kW. - Potencia Máxima en Modo sin Rejilla: 65 kW. - Potencia Máxima en DSA: 80 kW. - Corriente Máxima del Tubo en DSA: 640 mA (máximo) para un tubo de 125 kVp. - Corriente Máxima del Tubo en Radiografía Cardíaca: 938 mA (máximo) con un voltaje del tubo de 80 kV.				Utilice un paño suave y húmedo con la solución desinfectante utilizada en la institución. Asegurese de limpiar todas las áreas del equipo, en caso tal de que no haya disponibilidad de la solución desinfectante, utilizar alcohol al 70%. No sumerja el equipo en soluciones corrosivas, ni permita que el líquido penetre en las aberturas del dispositivo.														
				ALARMAS Y POSIBLES ERRORES														
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funciones del sistema Innova</th> <th>Latencia de visualización nominal</th> <th>Latencia de visualización máxima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Movimiento del estativo / la mesa</td> <td>1 s</td> <td>5 s</td> </tr> <tr> <td>Rayos X / Inyección automática</td> <td>1 s</td> <td>3 s</td> </tr> <tr> <td>Sistema de alarma no funcional</td> <td>0 s</td> <td>0 s</td> </tr> </tbody> </table> Riesgo de colisión y fallos del protocolo: Verificar el estado de activación del contorno del paciente Fallo de freno y movimiento incontrolado Fallo en el posicionamiento de la mesa Fallo de cadencia de imágenes Fallo del sistema de alimentación ininterrumpida Fallo de detección de colisión Fallo de embrague del brazo			Funciones del sistema Innova	Latencia de visualización nominal	Latencia de visualización máxima	Movimiento del estativo / la mesa	1 s	5 s	Rayos X / Inyección automática	1 s	3 s	Sistema de alarma no funcional	0 s	0 s
Funciones del sistema Innova	Latencia de visualización nominal	Latencia de visualización máxima																
Movimiento del estativo / la mesa	1 s	5 s																
Rayos X / Inyección automática	1 s	3 s																
Sistema de alarma no funcional	0 s	0 s																
				PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO														
				1. Conecte el equipo a la fuente de alimentación 2. Encendido del sistema 3. Configuración del equipo (modo de operación) 4. Posicionamiento del equipo de forma adecuada según el tratamiento 5. Ajuste los parámetros de imágenes (compruebe que las 2 luces verdes de la PDU del NPA estén encendidas) 6. Finalización de la operación 7. Apagado del equipo														
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:																		
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.																		
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica																		
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo																		
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.																		
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.																		
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas																		
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.																		

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO:	FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA	MES	AÑO	
			15	03	2023		
Nombre del equipo:	ANGIOGRAFO BIPLANAR	Modelo:	INNOVA IGS 630		Riesgo del equipo:		
Marca:	GENERAL ELECTRIC		Clasificación del equipo:				
FORMATO ABIERTO PARA LA REALIZACIÓN DE GUÍAS							
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:							
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.							
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica							
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo							
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.							
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.							
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas							
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.							