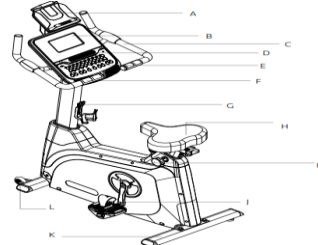


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA: 18	MES: 09

Nombre del equipo:	Bicicleta vertical	Modelo:	XBU55	Riesgo del equipo:	I
Marca:	SPIRIT COMMERCIAL			Clasificación del equipo:	NA

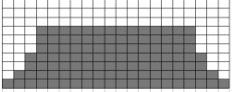
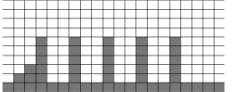
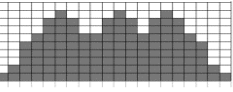
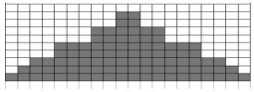
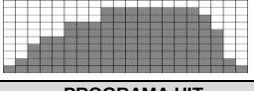
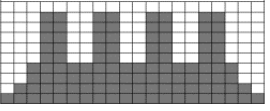
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO	PARTES DEL EQUIPO	INICIO RAPIDO
 Mejora la función cardio-respiratoria y reduce el riesgo de enfermedades del corazón, presión alta y diabetes. Fortalece el sistema osteomuscular, disminuye el riesgo de osteoporosis y libera endorfinas que alivian el dolor y mejoran el estado de ánimo. Aumenta energía y resistencia, reduce el riesgo de ciertos cánceres, y favorece una mejor recuperación, sueño y control del peso.	 A. Soporte para tableta B. Pantalla LCD C. Manillar con agarre de pie D. Ventilador ajustable E. Botones de la consola F. Empuñaduras de pulso de mano G. Portabotellas de agua H. Asiento acolchado I. Perilla de ajuste del asiento J. Pedal K. Estabilizador trasero L. Rueda de transporte  1.Ventana LCD 2.Ventilador ajustable 3.Carga USB 4.Botones de programas 5.Botones de nivel (Resistencia)	1.Después de encender la consola, solo tiene que pulsar la tecla de inicio para comenzar. Esto iniciará el modo de inicio rápido. En el modo de inicio rápido, el tiempo comenzará a contar desde cero y la carga de trabajo se puede ajustar manualmente pulsando los botones de nivel +/- . Al principio, la pantalla de matriz de puntos solo tendrá iluminada la fila inferior. A medida que aumenta la carga de trabajo, se iluminarán más filas, lo que indica un entrenamiento más duro. La bicicleta de ejercicios será más difícil de pedalear a medida que aumenten las filas. 2.Hay 20 niveles de resistencia disponibles para una gran variedad. Los primeros 5 niveles son cargas de trabajo muy fáciles y los cambios entre niveles están configurados para una buena progresión para usuarios que no están en forma
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1.Tension / Corriente: 12V/3.3A 2.Sistema de transmisión: Correa 3.Volante: 30 lb 4.Resistencia: ECB, 20 Niveles 5.FTMS Bluetooth incorporado 6.Tipo de pantalla: LCD Negro Retroiluminado Multicolor 7.Pantalla: 7.5» diagonal 8.Bluetooth: Apps, Audio y Frecuencia Cardíaca 9.Botones de resistencia directa: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 10.Dimensiones: 42.5" L x 21.7" W x 61.8" H 11.Peso del equipo: 105.4 lb 12.Capacidad Maxima de carga: 350 lb	PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 1. Presiona la tecla PROGRAMA y luego Intro para seleccionar un programa. 2. Ingresa tu edad ajustándola con las teclas + y -, y presiona Enter. 3. Ajusta tu peso de la misma manera y presiona Enter. 4. Configura el tiempo y presiona Enter. 5. Ajusta el nivel de resistencia máxima y presiona Enter. 6. Para comenzar el entrenamiento, presiona la tecla Inicio. 7. Durante el programa, ajusta la carga de trabajo con las teclas + y -. 8. Para ver datos, presiona Enter en el Centro de mensajes. 9. Al finalizar, verás un resumen de tu entrenamiento antes de que la consola regrese al inicio.	

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

- 1. Definición de uso del equipo:** En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
- 2. Especificaciones técnicas:** En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
- 3. Partes del equipo:** Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
- 4. Modos de operación del equipo:** En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
- 5. Limpieza y desinfección:** En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
- 6. Alarmas y posibles errores:** Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
- 7. Pasos de operación del equipo:** Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES
				18	09	2024

Nombre del equipo:	Bicicleta vertical	Modelo:	XBU55	Riesgo del equipo:	I
Marca:	SPIRIT COMMERCIAL			Clasificación del equipo:	

PROGRAMA MANUAL El Programa MANUAL funciona de forma manual. Esto significa que puede controlar la carga de trabajo por sí mismo y no el equipo. 1. Presione MANUAL y luego ENTER. 2. Introduzca su edad usando las teclas arriba/abajo y presione ENTER. 3. Ingrese su peso ajustando el número y presione ENTER. 4. Ajuste el tiempo y presione ENTER. 5. Para comenzar el entrenamiento, presione START; puede modificar la configuración con ENTER. Use STOP para retroceder. 6. El programa inicia en nivel Uno. Para aumentar la carga, presione UP; para disminuir, DOWN. 7. Durante el programa, consulte la VENTANA y cambie perfiles con la tecla DISPLAY. 8. Al finalizar, presione START para repetir, STOP/RESET para salir, o guarde su programa personalizado con CUSTOM.	PROGRAMA FAT BURN Maximiza la quema de grasa, un nivel de esfuerzo menor pero continuo es lo mejor, a juicio de los expertos. 	PROGRAMA FUSION Realiza la misma función del programa HIT. Estas agotan tu nivel de oxígeno y aumentan tu frecuencia cardíaca, seguidos de períodos de recuperación y caída de la frecuencia cardíaca para reponer el oxígeno. Tu sistema cardiovascular se programa para utilizar el oxígeno de manera más eficiente. 
PROGRAMAS PRE-ESTABLECIDOS La elíptica tiene programas diferentes que han sido diseñados para una variedad de objetivos de	PROGRAMA CARDIO Este programa presenta una progresión rápida hasta máximo nivel de resistencia. Cuenta con ligeras fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo para que su ritmo cardíaco se eleve y se recupere varias veces antes de comenzar un rápido enfriamiento. 	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN El proceso de limpieza y desinfección se debe de realizar con el producto institucional aprobado. En caso, de no contar con la disponibilidad del producto realizar la desinfección con alcohol al 70% con paños no esteriles.
PROGRAMA HILL Este programa utiliza una progresión en forma de triángulo, comenzando en aproximadamente el 10% del máximo esfuerzo. Aumenta gradualmente hasta alcanzar el máximo esfuerzo durante el 10% del tiempo total de entrenamiento, y luego disminuye nuevamente de forma gradual hasta el 10% 	PROGRAMA STRENGTH Está diseñado para aumentar su fortaleza muscular de la parte inferior de su cuerpo. 	ALARMAS Y POSIBLES ERRORES La pantalla no enciende: 1. Verifique que el enchufe esté conectado al tomacorriente de 115 VCA. Ruidos (chirridos, golpes, chasquidos): 1. Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados; use una llave más grande si es necesario. 2. Vuelva a apretar la tuerca del brazo de la biela. 3. Si persisten los ruidos, verifique que la unidad esté nivelada y ajuste las almohadillas niveladoras. Sensación de aspereza al usar la bicicleta: 1. Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados. 2. Vuelva a apretar la tuerca del brazo de la biela. 3. Verifique la nivelación de la unidad y ajuste las almohadillas niveladoras.
PROGRAMA HIT (Entrenamiento de alta intensidad). Te lleva a través de altos niveles de intensidad seguidos de períodos de recuperación de baja intensidad. Utiliza y desarrolla tus fibras musculares de "contracción rápida" que se utilizan al realizar tareas que son intensas y de corta duración. 		

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:	
1. Definición de uso del equipo:	En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
2. Especificaciones técnicas:	En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
3. Partes del equipo:	Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
4. Modos de operación del equipo:	En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
5. Limpieza y desinfección:	En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
6. Alarmas y posibles errores:	Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
7. Pasos de operación del equipo:	Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.