

GUIA DE MANEJO RAPIDO CENTRAL DE MONITOREO

Equipo	Central Monitor
Modelos Disponibles	CNS-9101
Fabricante:	Nihon Kohden
País origen Fabricación:	Japón
Numero registro Invima:	
Clasificación de riesgo:	IIB
Certificados de calidad	ISO 9001:2008 ISO 13485:2003 ISO 14001:2004 ISO 17025:2005 CE 01342
Tiempo de vida útil estimado:	8 años
Disponibilidad de repuestos después de la discontinuación	5 años mínimo




DESCRIPCION GENERAL

Centrales para monitorización de hasta 48 pacientes (dependiendo de configuración). Posibilidad de configurar con doble pantalla. Almacena datos de cada paciente (opción full disclosure) y tiene posibilidad de ser conectada vía LAN, WLAN o como telemetría.

COMPONENTES DEL SISTEMA



COMPONENTES DE LA PANTALLA PRINCIPAL (HOME)

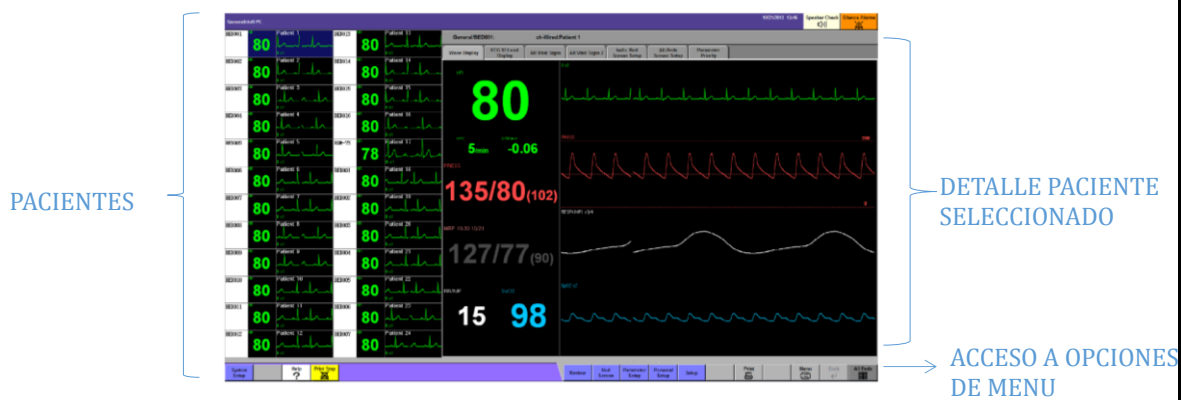

INSTRUCCIONES DE USO

1. Encienda la Unidad principal CNS (CPU) del botón ON/OFF y luego la pantalla.
2. El programa de Nihon Kohden inicia automáticamente. Cuando haya cargado, visualizará en pantalla todos los pacientes conectados.
3. Cuando desee observar con detalle algún paciente, basta con dar click sobre sus datos.
4. Para información más detallada, remítase al manual de usuario.

DATOS A TENER EN CUENTA

1. Evite ubicaciones donde la central y el sistema puedan sufrir salpicaduras de agua o soluciones químicas. De lo contrario, la central y el sistema podrían resultar dañados.
2. Mantener encendida la central.
3. No acercar a la pantalla elementos que puedan dañarla, ocasionando rayones que pueden afectar su funcionamiento.
4. Limpie usando un paño seco suave o un paño humedecido con un detergente neutro y escurrido.
5. Instalar en espacio con buena ventilación para evitar recalentamiento del sistema y garantizar larga vida útil del hardware.
6. Evite la humedad o el contacto con el agua, presiones atmosféricas extremas, humedad y temperaturas excesivas, áreas poco ventiladas, polvo y aire salino o sulfúrico.
7. Coloque el aparato en un suelo uniforme y nivelado. Evite la vibración y los golpes mecánicos, incluso durante el transporte.
8. En caso de existir problemas de comunicación entre la central y los monitores, contacte al personal de mantenimiento inmediatamente.
9. Procurar no ingresar memorias USB para evitar posibles virus que provoquen daños al sistema.

CONFIGURACION ESTÁNDAR

Los componentes del equipo (estándar) son:

1. Unidad Principal CNS
2. Pantalla
3. Cable de poder
4. Cable de video
5. Mouse
6. Teclado