



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E

FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS

CODIGO:

FOR-GLO-MAB-012

VERSIÓN:

001

PAGINA

01

DE

01

FECHA DE EMISIÓN:

DÍA

MES

AÑO

28

12

2023

Nombre del equipo: INCUBADORA NEONATAL

Modelo: B3

Riesgo del equipo: ALTO

Marca: COMEN

Clasificación del equipo: BII

DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO

Este producto puede utilizarse para brindar a recién nacidos y niños un ambiente controlado (que incluye la medición de la humedad, temperatura, O2 y peso). Cuenta con funciones como la de detección de apnea y de apnea obstructiva. También puede utilizarse en organizaciones de cuidado de la salud con fines de monitoreo para el cuidado de recién nacidos o niños.

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

- Ingresa a Menu para configurar las operaciones:
- 1) Seleccione el modo de aire. Si se requiere el modo lactante, precaliente la cama en el modo de aire para lograr una temperatura confortable en la incubadora según la temperatura de confort.
 - (2) Seleccione Configuración de la incubadora > Configuración de la temperatura y establezca la temperatura.
 - (3) Coloque al bebé sobre la cama.
 - (4) Coloque las sondas de temperatura para la piel en la piel del bebé. Si el bebé está en posición de postrado o fetal, coloque las sondas en la espalda del bebé. Antes de colocar las sondas, asegúrese de que la piel del bebé esté limpia y seca.
 - (5) Organice los cables de la sonda utilizando las entradas de cables en las cuatro esquinas de los laterales de la cama o utilizando la puerta de entrada de la manguera. Inserte las sondas en las interfaces de sonda de temperatura de la caja de recopilación de datos.
 - (6) En el modo lactante, asegúrese de que la interfaz 1 de la sonda de temperatura corporal esté conectada a una sonda de temperatura de la piel. En el modo de aire, asegúrese de que la interfaz 1 de la sonda de temperatura corporal esté conectada a una sonda de temperatura de la piel si debe mostrarse la temperatura de la piel del bebé.
 - (7) Para cambiar al modo lactante, seleccione Configuración de temperatura y establezca el modo.
 - (8) Seleccione Configuración de la incubadora > Configuración de la temperatura y establezca la temperatura.

PARTES DEL EQUIPO

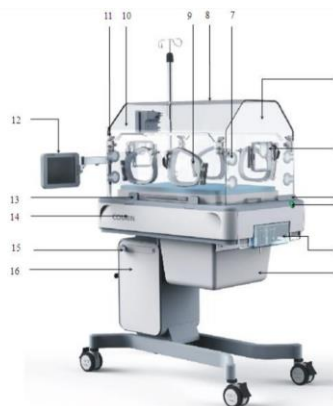


Figura 2-2 Vista lado izquierdo de la incubadora

1	Caja de almacenamiento	2	Tanque de agua
3	Tecla de autobloqueo de la cubierta del termostato	4	Bisagra de la cubierta del termostato
5	Puerta de entrada de la manguera	6	Puerta frontal de la cubierta del termostato
7	Cubierta de entrada de la manguera	8	Cubierta del termostato
9	Ventana de operación	10	Puerta lateral de la cubierta del termostato
11	Botón de la puerta lateral	12	Pantalla
13	Conectores giratorios de la puerta lateral de la cubierta del termostato	14	Cubierta lateral de la cama
15	Rebobinador de cable	16	Caja eléctrica

Temperatura de la incubadora (unidad: °C o °F)
Temperaturas de la piel T1 y T2 (unidad: °C o °F)
Humedad (unidad: %)
concentración de O2(unidad: %)

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Asegúrese de que el equipo esté apagado y desconectado de la línea de alimentación.
- Use una bola de algodón suave para absorber una pequeña cantidad de los agentes de limpieza y limpie la pantalla.
- Use paño suave de algodón suave para absorber una pequeña cantidad de los agentes de limpieza y limpie la carcasa de la incubadora.
- Si es necesario, use un paño suave y seco para limpiar el exceso de

ALARMAS Y POSIBLES ERRORES

- Operaciones erróneas
- problema : cuando se pulsa sólo un botón, pero sobre una acción trabajada
- causa : los elementos de la base se humedecen.
- Solución: utilice una gasa para secarlo y utilice un secador de 300V.
- La mesa no puede funcionar :
- causa1 : fusible desactivado
- causa2 : el enchufe del telecontrolador se ha aflojado.
- solucion1 : reemplazar fusible
- solución 2 conectar de nuevo la alimentación del telecontrolador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura	
Control de temperatura	de 35°C to 37.5°C
Modo Infante	on
Control de temperatura modo Aire	de 23°C to 30°C
Modo Aire	on
Error de medición	±0.3°C
Humedad relativa (%)	30% - 95%
Suministro de oxígeno	de 21 - 60%
consumido	servo

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima .

2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo , donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica

3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una , incluyendo accesorios y consumibles del mismo

4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos .

5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo .

6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas

7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo , en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.