

| GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO             |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>EQUIPO:</b> PULSIOXÍMETRO       | <b>CÓDIGO:</b> NA                       |
| <b>MARCA:</b> MEDIANA              | <b>VERSIÓN:</b> 1                       |
| <b>MODELO:</b> LUCON/ LUCON P30M-5 | <b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 13/10/2022 |

### USO DEL EQUIPO




Dispositivo biomédico utilizado en la pulsioximetría. Esta técnica permite medir de manera indirecta la saturación de oxígeno continua e instantánea mediante el monitoreo no invasivo de la hemoglobina.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Mantener el equipo conectado directamente a la fuente de red eléctrica.
- No forzar ni arrancar los cables de los accesorios cuando no se desconectan del equipo
- Modificar en caso de ser necesario tipo de paciente: Adulto-Pediátrico
- Colocar los accesorios siguiendo la guía de los cables
- Verificar que tenga encendido los indicadores del panel de control

### PARTES DEL EQUIPO

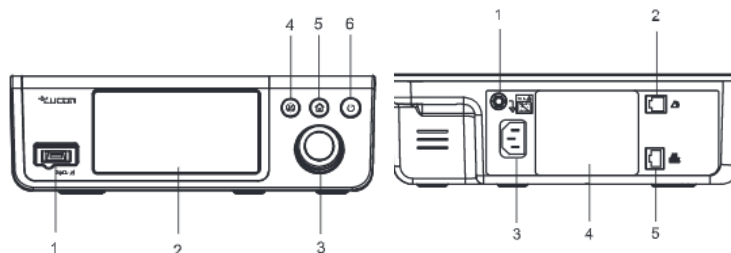

#### Partes del equipo delanteras:

1. Conexión para el accesorio de SpO2
2. Pantalla LCD
3. Perilla para configuraciones del pulsioxímetro
4. Botón para pausar las alarmas
5. Botón para acceder al menú de configuración
6. Botón de ON/OFF

#### Partes del equipo traseras:

1. Terminal equipotencial
2. Conexión para el llamado de reporte a enfermería
3. Conexión para el accesorio de AC
4. Accesorio para batería de respaldo o batería del equipo
5. Puerto para accesorio de LAN


### CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación IIB de Alto riesgo

### PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

1. Verifique que el equipo este cargando
2. Accione el botón de ON/OFF
3. Conecte el accesorio de SpO2 al equipo
4. Modifique el tipo de paciente en caso de ser necesario
5. Inicie la monitorización

### INTRODUCCIÓN AL PANEL DE PANTALLA

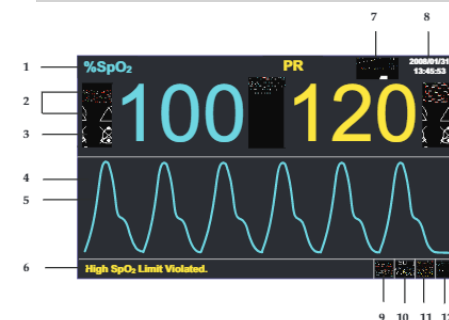

1. Título de parámetro numérico
2. Icono de alarma
3. Valores limites de alarma
4. Onda de SpO2
5. Área de onda SpO2
6. Área para mensajes informativos de alarmas fisiológicas o técnicas
7. Icono del estado de batería
8. Fecha y hora del monitoreo
9. Icono del tipo de paciente monitorizado

|                                                                                  |                                    |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <b>GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO</b>      |                                         |
|                                                                                  | <b>EQUIPO:</b> PULSIOXÍMETRO       | <b>CÓDIGO:</b> NA                       |
|                                                                                  | <b>MARCA:</b> MEDIANA              | <b>VERSIÓN:</b> 1                       |
|                                                                                  | <b>MODELO:</b> LUCON/ LUCON P30M-5 | <b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 13/10/2022 |

### LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.

#### ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



1. No limpie el monitor con material abrasivo.
2. En caso de utilizar Klorkleen + Vital Care retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco.
3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo.
4. Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.

#### RECOMENDACIONES DE USO



1. Usar los dedos índices, medio o anular para monitorizar
2. No tener uñas largas o pintadas que pueden afectar la lectura.
3. No tener exceso de luz los cuales pueden dañar el infrarrojo.

### ADVERTENCIAS DEL USO DEL EQUIPO



1. Si el pulsioxímetro presenta fallos o daños en el momento de funcionamiento dejar de utilizarlo y llamar al equipo de mantenimiento.
2. No destapar el equipo ni realizar cambio de accesorios de equipo en equipo cuando no funcionan.
3. Use solo los sensores permitidos por MEDIANA, cualquier otro tipo de accesorios puede provocar una monitorización errónea.
4. Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que el equipo este apagado y debidamente desconectado al momento de la limpieza.

#### MODO MONITOREO CONTINUO

El modo de monitoreo continuo está destinado para monitoreo de larga duración. Este modo es normalmente seleccionado cuando el paciente está hospitalizado o siendo transportado.

1. Ingrese en la opción de menú, Modo de trabajo
2. Seleccione el modo continuo

10. Icono para limites de alarma
11. Icono para los sonidos del menú
12. Icono para la configuración del menú

#### NIVELES DE ALARMA

|                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALARMA FISIOLÓGICA ALTA</b><br>   | Indican que el paciente está en una situación de amenaza de muerte y se demanda un tratamiento de emergencia.                      |
| <b>ALARMA FISIOLÓGICA MEDIA</b><br>  | Indican que los signos vitales del paciente aparecen como anormales y se requiere un tratamiento inmediato. Amarillo con parpadeo. |
| <b>ALARMA FISIOLÓGICA BAJA</b><br> | Indican que los signos vitales del paciente aparecen como anormales, pero no amenazan con la vida del paciente.                    |