

Ref. Guía Rápida de Utilización Hematron III


¡Advertencia! Este instrumento emite un nivel bajo de energía de radiación electromagnética (no ionizante) mientras realiza el sellado. No debe ser utilizada ni reparada por personas que lleven marcapasos. No debe utilizarse cerca de equipos electrónicos sensibles a altas frecuencias.

¡Precaución! Cuando la unidad esté conectada a la fuente de alimentación: Mantenga siempre los dedos lejos de los electrodos de la ranura. No coloque entre los electrodos ningún otro objeto que no sean tubulares de PVC.


1. Coloque el instrumento sobre una superficie plana cerca del lugar de trabajo



2. Presione el botón 2 de encendido que está ubicado en la parte trasera de la máquina. Compruebe que el LED se ilumina en verde al encender el botón.

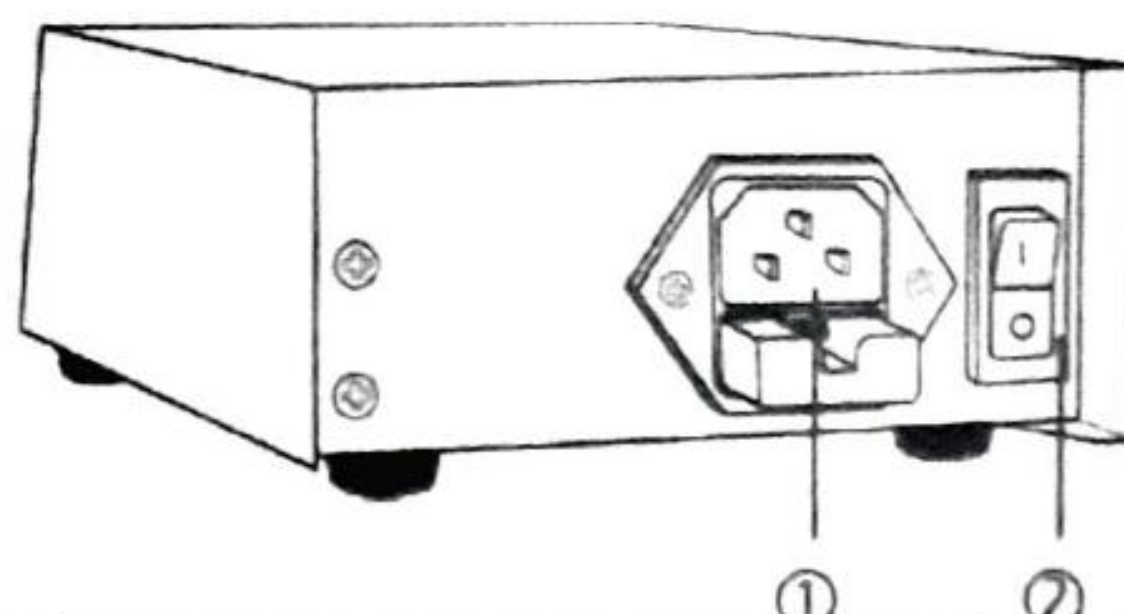

3. Coloque el tubular que se va a sellar debajo de la parte inferior de la ranura 1 de la unidad. (la parte externa del tubular debe estar seca.)

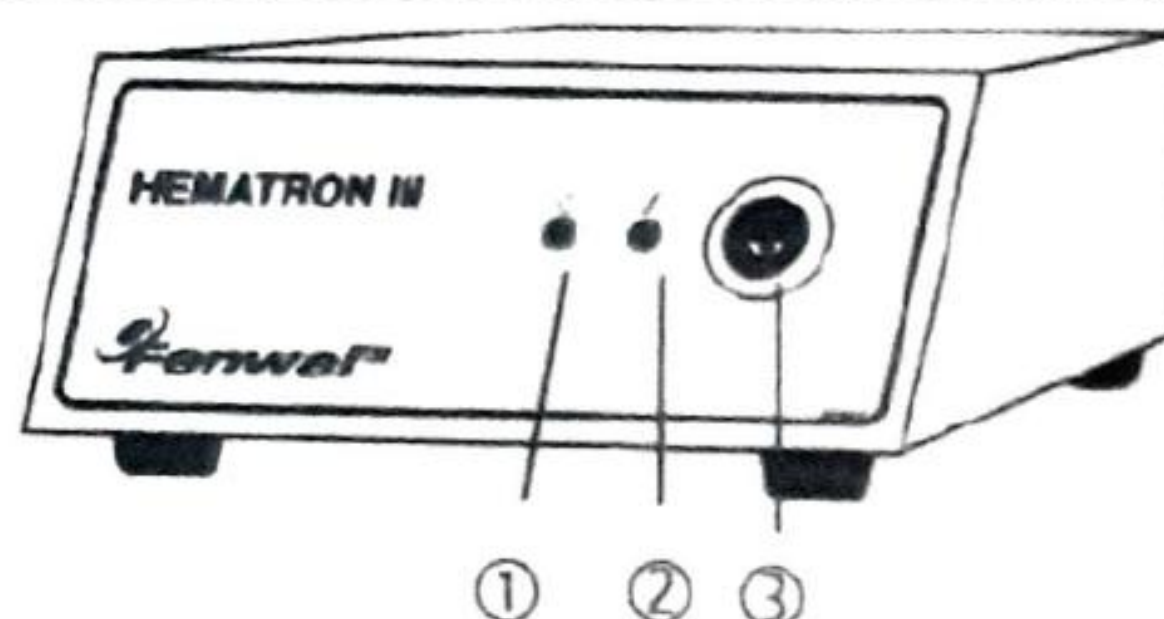

4. Compruebe que el tubular queda colocado entre los electrodos de la ranura.

5. Pulse y mantenga pulsado el botón 2, el indicador luminoso 3 se encenderá.

6. Cuando dicho indicador se apague, suelte el botón de sellado 2.

7. Retire el tubular sellado de la ranura 1 de la unidad manual.

8. Verifique el sellado



9. El centro del patrón sellado es muy fino y, al tirar de ambos lados, el tubular se dividirá en dos partes.

