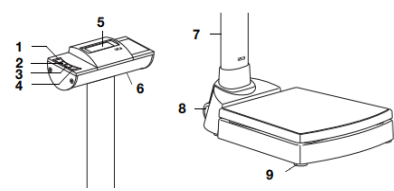
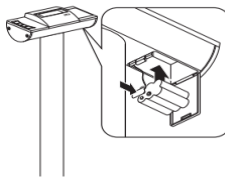
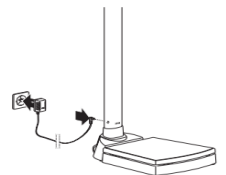


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001														
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: <table border="1"> <tr> <td>PAGINA</td> <td>01</td> <td>DE</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>6</td> <td>MES</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>AÑO</td> <td colspan="3">2024</td> </tr> </table>				PAGINA	01	DE	01	DÍA	6	MES	09	AÑO	2024	
PAGINA	01	DE	01														
DÍA	6	MES	09														
AÑO	2024																
Nombre del equipo:	Báscula digital con tallímetro	Modelo:	703	Riesgo del equipo:	I												
Marca:	SECA			Clasificación del equipo:	Apoyo diagnóstico												
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		BATERIAS													
La báscula SECA 703 ofrece la determinación convencional del peso y una función para calcular el índice de masa corporal. Además, los resultados de la mediciones se pueden trasladar a una impresora inalámbrica seca o a un PC equipado con el software seca analytics 105 y el seca 360° wireless USB adapter 456. 		 1. Encender y apagar la báscula. 2. Tecla HOLD. 3. Tecla BMI. 4. Tecla SEND. 5. Visor. 6. Compartimiento para pilas. 7. Conexión de red. 8. Ruedas de transporte. 9. Tornillo nivelador.		Se necesitan 6 pilas Mignon, tipo AA, 1,5 V (incluidas en el volumen de suministro).  Colocar las pilas: 1. Presione sobre el cierre del compartimiento para pilas. 2. Abra hacia abajo la tapa del compartimiento para pilas. 3. Retire el soporte de las pilas. 4. Coloque las pilas en el soporte. NOTA: Tenga en cuenta los polos correctos de las pilas (marcados en el soporte de las pilas). Si en el visor aparece la indicación bAtt, puede que haya colocado una de las pilas en la posición contraria o que las pilas estén gastadas. 5. Coloque el soporte con las pilas en el compartimiento para pilas. 6. Cierre el compartimiento para pilas.													
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		SIMBOLOS DEL VISOR		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN													
1. Capacidad: 300 kg / 660 lbs 2. División: 50 g < 150 kg > 100 g / 0.1 lbs < 330 lbs > 0.2 lbs 3. Dimensiones (AxAxP): 360 x 930 x 520 mm / 14.2 x 36.6 x 20.5» 4. Dimensiones plataforma (AxAxP): 335 x 80 x 345 mm / 13.2 x 3.1 x 13.6» 5. Peso propio: 15.2 kg / 33.5 lbs 6. Alimentación: Pilas, batería opcional 7. Transmisión de datos: Tecnología inalámbrica seca 360° wireless 8. Funciones: TARA, pre-TARA, función madre/bébé, HOLD, auto-HOLD, BMI, auto-CLEAR, amortiguación, desconexión automática, SEND/PRINT		 1. Las pilas tienen poca carga. 2. Funcionamiento con equipo de alimentación. 3. Función no calibrable activa.		La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al													
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:																	
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.																	
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica																	
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo																	
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.																	
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.																	
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas																	
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.																	

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012		
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		VERSIÓN: 001	PAGINA 01 DE 01	
			FECHA DE EMISIÓN:	DÍA 6 MES 09 AÑO 2024	
Nombre del equipo:	Báscula digital con tallímetro	Modelo:	703	Riesgo del equipo:	I
Marca:	SECA			Clasificación del equipo:	Apoyo diagnóstico
CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN OPCIONAL		INICIO DEL PROCESO DEL PESAJE		CALCULAR EL INDICE DE MASA CORPORAL (BMI)	
 La báscula puede funcionar con un equipo de alimentación disponible como accesorio: - Enchufe en el equipo de alimentación la clavija necesaria para su suministro de corriente. - Enchufe la clavija del equipo de alimentación en el zócalo de conexión de la báscula. - Enchufe el equipo de alimentación a una toma de corriente de la red.		- Asegúrese de que sobre la báscula no haya ningún peso. - Pulse la tecla Start. En el visor aparece SECA, después se muestran brevemente todos los elementos del visor. La báscula está operativa cuando en el visor aparece 0.00. - Suba a la báscula y permanezca de pie tranquilamente.		- Asegúrese de que sobre la báscula no haya ningún peso. - Pulse brevemente la tecla de cursor (bmi/menu). Aparece el aviso "BMI". En el visor parpadean flechas. Se muestra la altura introducida por última vez.	
		PESAR BEBES/NIÑOS PEQUEÑOS (2 EN 1) - Asegúrese de que sobre la báscula no haya ningún peso. - Pida al adulto que se coloque sobre la báscula. - Lea el resultado de la medición. - Mantenga pulsada la tecla de cursor (hold/2 in 1) hasta que en el visor aparezca la indicación "NET". Se memoriza el peso 0.00 aparece en el visor.		- Puede adoptar otra con la tecla de cursor. - Confirme su ajuste con la tecla Enter (send/print). - Pida al paciente que suba a la báscula y que permanezca de pie tranquilamente. - Lea el BMI.	
COLOCAR LA BÁSCULA  Tornillos niveladores Si la báscula con la carcasa se coloca, por ejemplo, sobre una toalla, el peso no se mide correctamente. – Coloque la báscula de tal modo que estén en contacto con el suelo a través de los tornillos niveladores. - Coloque la báscula sobre una base firme y lisa. - Nivele la báscula girando los tornillos niveladores.		- Pida al adulto que suba a la báscula con el niño. Se indica el peso del niño. Se muestran los avisos "HOLD" y "NET" y los siguientes símbolos: - Pida al adulto que se baje de la báscula con el niño. - Para desactivar la función 2 en 1, pulse la tecla de cursor (hold/2 in 1) hasta que desaparezcan los avisos "HOLD" y "NET" o desconecte la báscula.		ALARMAS Y POSIBLES ERRORES -Al colocar un peso no aparece ninguna indicación de peso: La báscula no tiene alimentación eléctrica. Comprobar que la báscula esté conectada. Comprobar que se han puesto las pilas. -Antes del pesaje no aparece 0.00: El peso se colocó antes de encender la báscula. Retirar el peso de la báscula. Apagar y volver a encender la báscula. -Aparece el aviso de pila: La tensión de las pilas disminuye. Colocar cuanto antes pilas nuevas. -Aparece el aviso bAtt: Las pilas están gastadas. Colocar pilas nuevas. -Aparece el aviso StOp: Se ha superado el peso máximo. Retirar el peso de la báscula.	
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:					
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.					
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica					
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo					
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.					
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.					
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas					
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.					