

Instrucciones de uso

El humidificador respiratorio F&P 950 está indicado para proporcionar calor y humedad a los gases respiratorios administrados a los pacientes. Está concebido para ser utilizado por profesionales sanitarios en un centro sanitario profesional.

Principio de funcionamiento

El humidificador respiratorio F&P 950 proporciona calor y humedad a los gases médicos haciéndolos pasar por una cámara de agua calentada y unos tubos respiratorios calentados.

La intensidad del calor se controla midiendo la temperatura del gas en distintas partes del humidificador.



Contenido del paquete



Base calefactora F&P 950

(p. ej., 950ANZ)

ACCESORIOS PARA COMPLETAR EL HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO F&P 950



Soporte para el equipo

(p. ej., 900MR030)




Cartucho del sensor F&P 950

(p. ej., 950S01)



Cable

(p. ej., 950XPE)

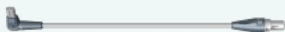

**Adaptador para cable calefactor
respiratorio F&P 950**

(p. ej., 950X00)



**Kit de circuito respiratorio
F&P 950**

(p. ej., 950A81, 950N80)

Configuración del humidificador respiratorio F&P 950


Acople el cable y el retenedor del cable a la base calefactora.

Base calefactora

Soporte de montaje

Retenedor del cable

El retenedor del cable impide que el cable se desconecte de manera accidental. Par de tornillo requerido: $0,8 \pm 0,3$ Nm

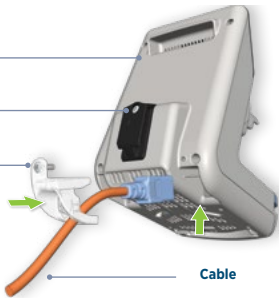

Instale el cartucho del sensor en la base calefactora.



ADVERTENCIA

La base calefactora debe montarse en un soporte para equipos capaz de soportar 4 kg. Si no se cumple esta condición, pueden producirse daños en el soporte del equipo y la base calefactora, y el paciente también podría sufrir lesiones graves.

NOTA: Asegúrese de que la base calefactora no bloquea el acceso a la salida del suministro eléctrico.

Configuración del humidificador respiratorio F&P 950

Instale el circuito respiratorio tal como se describe en las instrucciones de uso que se suministran con el kit de circuito seleccionado.



Al activar el humidificador, debería escucharse un único pitido.

Interfaz de usuario

NAVEGACIÓN POR LA PANTALLA



MODOS

Los modos disponibles dependerán del tipo de circuito respiratorio conectado. La disponibilidad y los principios de funcionamiento para cada modo se muestran a continuación.

Kit del circuito respiratorio

Modos

Circuitos respiratorios para adultos

Invasivo

El **modo invasivo** está concebido para pacientes cuyas vías respiratorias superiores se han omitido mediante una traqueostomía o un tubo endotraqueal.

Máscara

El **modo con máscara** está concebido para aquellos pacientes cuyas vías respiratorias superiores no se han omitido, pero que reciben gas a través de una mascarilla facial u otro instrumento similar.

Optiflow

El **modo Optiflow** está concebido para aquellos pacientes que necesitan una terapia respiratoria a través de una interfaz Optiflow.

Kit del circuito respiratorio neonatal

Neonatal

El **modo para neonatos** está concebido para pacientes neonatos que necesitan asistencia respiratoria.

Kit de oxígeno para Optiflow

Optiflow

El **modo Optiflow** está concebido para aquellos pacientes que necesitan una terapia respiratoria a través de una interfaz Optiflow.

Interfaz de usuario

Cuando existen múltiples modos para un tipo de kit de circuito respiratorio, se puede acceder a la selección mediante el botón del menú desplegable.



AJUSTES DE CONFORT

En los modos con máscara y Optiflow, se puede cambiar la temperatura deseada para ofrecer al paciente condiciones que puedan favorecer el confort del paciente.



Los ajustes de confort disponibles son los siguientes:

Modo	Predeterminado	Medio	Bajo
Invasivo	37 °C	-	-
Con máscara	31 °C	29 °C	27 °C
Optiflow	37 °C	35 °C	33 °C
Neonatal	37 °C	-	-

El humidificador se restablecerá con el punto de ajuste predeterminado si se cambia de modo o si se desactiva y se vuelve a conectar el humidificador. El personal de servicio técnico puede cambiar el punto de ajuste predeterminado de los modos con máscara y Optiflow en el menú de servicio técnico.