

Guía de manejo rápido, bombas de infusión Evo IQ.

Simplemente inteligente¹



DoseIQ
Intelligent System



Prevención de
errores de medicación²



Flujos de
trabajo intuitivos



Un set para
cada necesidad

Guía de manejo rápido bombas Evo IQ.




- Sujetar la bomba al porta-sueros.
- Hay que asegurar que la bomba esté conectada a una toma de corriente eléctrica.
- Encender la bomba presionando el botón de encendido/apagado.
- El purgado adecuado de los equipos de infusión es fundamental para reducir el aire en la línea y otras posibles alarmas. Una vez purgado el equipo IV, cerrar la pinza azul y la pinza de rodillo completamente para evitar el paso de flujo libre.
- La bomba ejecutará una auto-prueba del sistema para confirmar la funcionalidad de la luz de alarma y el altavoz de respaldo.
- Una vez finalizada la auto-prueba, avanzará a la pantalla de la guía de carga.
- Aparecerán en pantalla, con la puerta de la bomba abierta, tres diagramas que ayudarán con la carga del equipo IV.



NOTA: La dirección del flujo de la bomba de infusión **Evo IQ** va de derecha a izquierda. **Siga la secuencia** de carga que indican los números para insertar el equipo IV. **Ingrese la pinza** de color azul cerrada en el punto de carga 1 y presione hasta que el clip gris baje.

- Finalizada la carga del equipo y si se realizó correctamente aparecerá la pantalla “nuevo paciente”, en un plazo de 24 horas antes de que la bomba borre los valores y se apague.
- Para conservar los valores de infusión que se habían programado anteriormente, **presione ATRÁS** para seleccionar.
- Para borrar una infusión programada previamente y programar un nuevo medicamento o para indicar que se trata de un nuevo paciente. **Oprima OK** para seleccionar.
- La programación lo llevará a la pantalla de **Área de atención**, seleccione el área correspondiente.
- En la pantalla se muestran varios grupos alfabéticos, de los cuales, se debe seleccionar la primera letra de la infusión a programar.

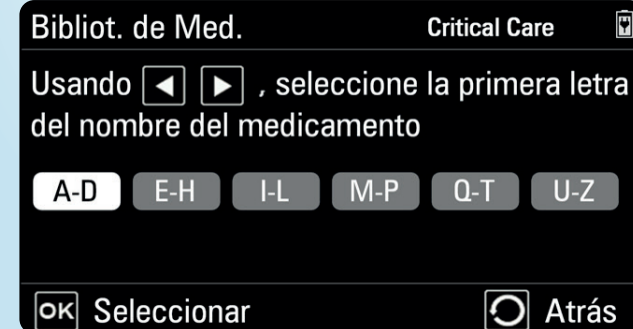


Generalidades.



- La bomba de infusión **Evo IQ** selecciona de manera predeterminada la **Biblioteca de medicamentos**, seleccionar el nombre del medicamento o de la infusión que desea iniciar. El modo Biblioteca de medicamentos Contiene información sobre la dosis del medicamento, incluidos los límites de dosificación, los parámetros de infusión y los avisos específicos del medicamento.
- Seleccione Básico** para programar infusiones fuera de la Biblioteca de Medicamentos. El Modo **BÁSICO** es un método de programación utilizado ÚNICAMENTE cuando el medicamento o la concentración no están disponibles en la biblioteca de su institución o si la Concentración Variable no es una opción.
- Al realizar una programación, presione el **botón OK** para activar el campo e ingresar los valores, presione nuevamente **OK** para aceptar el valor ingresado.
- Un campo activado se apagará después de 10 segundos de inactividad.
- Las teclas de flechas se utilizan para desplazarse por el programa y para ingresar cantidades o valores. Las flechas hacia la izquierda y derecha dictan el valor posicional de los números. Las flechas hacia arriba y abajo dictan el valor de 0 a 9.
- RECOMENDACIÓN: Primero**, presione la flecha hacia la izquierda para el valor posicional más grande. **Posteriormente**, ingrese los valores de izquierda a derecha.



- Se debe presionar **OK** para confirmar la cantidad ingresada y avanzar al campo siguiente.
- Una vez ingresados todos los valores:**
- Una pantalla de resumen aparecerá con todos los parámetros programados. Si es necesario cambiar los parámetros, presione **Atrás** para ir a la pantalla anterior y editar lo necesario.
- Presione **OK** y posteriormente el símbolo de inicio  para iniciar la infusión.
- La pantalla de Verificar flujo primario aclara que se debe confirmar lo siguiente:**
- Que No hay torceduras en el equipo.
- Que las gotas caen en la cámara de goteo.
- Que todas las pinzas están abiertas.

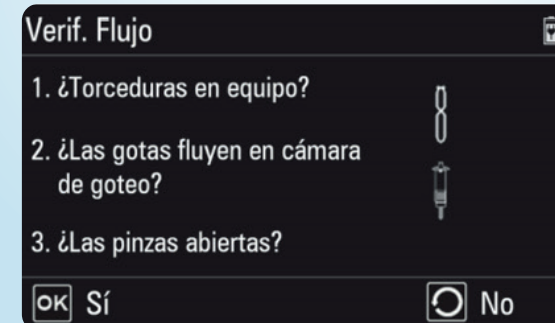

Carga del equipo.



- Levante el cierre gris de la puerta y ábrala.
- Revise la etiqueta de dirección de flujo por encima del canal, alinear el equipo IV de derecha a izquierda en el canal como muestra la gráfica.
- Cierre por completo la pinza de rodillo suficientemente baja en el equipo. Esto permite que se cargue la pinza de control azul correctamente.
- Revise los puntos de carga de 1 a 4 en el interior de la puerta e inserte el equipo; teniendo cuidado de no estirarlo demasiado, mientras se sostiene el equipo, tenso, inserte la pinza de control azul con el **“extremo cerrado”** como se muestra en el diagrama.
- Presione firmemente la pinza de control azul hasta que se escuche un **“clic”** y descienda el clip gris.
- Asegúrese que el equipo esté **DETRÁS** del clip gris.
Sujete suavemente el equipo fuera del canal y colóquelo en las muescas a los lados de la bomba.
- Verifique que el equipo esté colocado de manera segura en todos los puntos de la carga a lo largo del canal.
- Sujete el cierre gris y empuje la puerta hacia arriba.

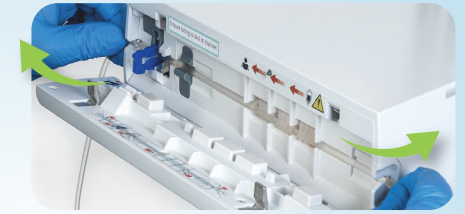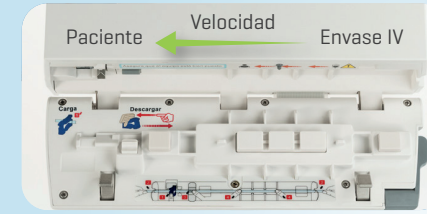

Empuje la pinza de control hacia adentro.





El clip gris sale para bloquear la pinza de control.

- Empuje el cierre gris hacia abajo para asegurar la puerta. Si el equipo IV carga correctamente, se mostrará en la pantalla de **Nuevo paciente** o la pantalla de **Seleccionar área de atención**.

Biblioteca de Medicamentos.



- El software de seguridad de Dose IQ permite configurar una biblioteca de medicamentos con rangos predefinidos de concentraciones, modos de dosis y límites de seguridad blandos y duros para cada medicamento de un **Área de atención**. La biblioteca de medicamentos es esencial para identificar errores de programación de infusión potencialmente dañinos.
- Presione las flechas para resaltar el área de atención correcta, después, **presione OK**.
- Aparecerá la pantalla **Biblioteca de medicamentos**.
- Usando las flechas **< >** seleccione la primera letra del nombre del medicamento y **presione OK**, posteriormente seleccione el medicamento a programar.
- Con las flechas, ingrese valores para cada parámetro [p. ej. Velocidad, VTBI, peso] y **presione OK** para confirmar cada ingreso.
- En la pantalla **Resumen**, revise los parámetros. Si hay dos páginas de información, se mostrará la mitad en la parte inferior de la página; para ver la segunda página, presione la flecha hacia abajo.

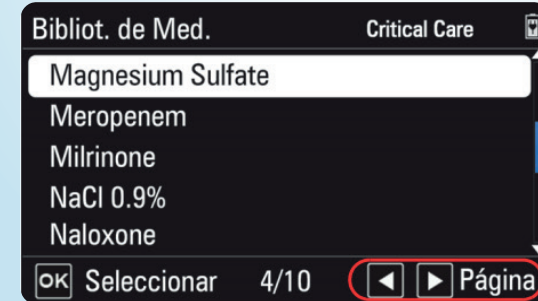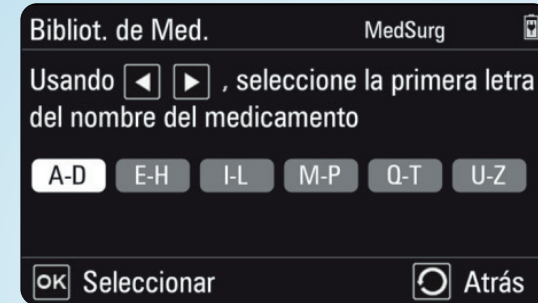

Dosis en bolo y dosis de carga.






Dosis en bolo:

- Es una dosis superior intermitente que puede administrarse en cualquier momento durante una infusión en ejecución.
- La programación de la dosis en bolo está disponible cuando un medicamento está habilitado en el software de seguridad de **Dose IQ**; también, se encuentra disponible para los modos de administración primaria, secundaria y continua.
- La infusión primaria continuará ejecutándose mientras se programa la **dosis en bolo**. Una vez inicia el bolo, la línea de ejecución cambia a color azul. Terminado el bolo, continua la infusión primaria o secundaria que estaba programada.

NOTA: Una dosis de bolo también puede programarse en el modo BÁSICO, pero no tendrá los límites de seguridad que se encuentran en la Biblioteca de medicamentos.

Dosis de carga:

- Una dosis de carga es una dosis superior, administrada al comienzo de una infusión. La programación de una **dosis de carga** está disponible solo cuando el medicamento está habilitado en el **software de seguridad de Dose IQ**. La cantidad de dosis de carga y los límites de tiempo se configuran en el software de seguridad de **Dose IQ**. La dosis de carga está diseñada para ser administrada desde el mismo envase de medicamento I.V. primario.
- Cuando se completa la infusión de Dosis de carga la bomba emite un bip y comienza a administrar la **Infusión primaria**.

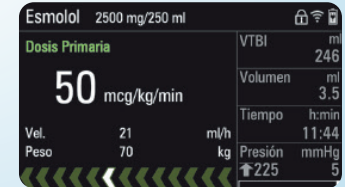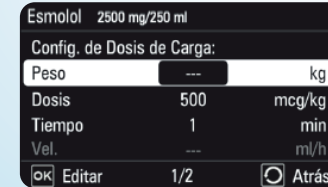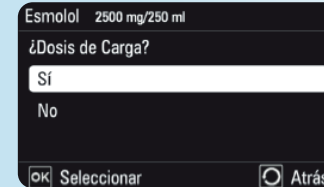


Modo Básico.



- La programación **BÁSICA** solo debe usarse cuando el medicamento o la concentración deseados no están disponibles en la biblioteca de medicamentos de la institución.
- El **modo BÁSICO** está fuera de las funciones de seguridad de la biblioteca de medicamentos y no proporciona límites de seguridad específicos del medicamento.
- En el **Modo Básico** puede programar:
 - Volumen/tiempo [ml/h], modos de dosis y ml/kg/tiempo.
 - Seleccione un área de atención.
 - Seleccione en el rango de letras de A-D el **modo básico**, use las flechas para resaltar **BÁSICO** y presione.
 - Seleccione **programar ml/h**.
 - Ingrese los valores requeridos para los campos velocidad y VTBI, y **presione OK** después de cada ingreso.
 - Presione **volumen/tiempo** para confirmar.
 - Ingrese los valores requeridos para los campos VTBI y tiempo, **presione OK** y el valor de velocidad se calculará automáticamente.

- En la pantalla **Resumen**, revisar los parámetros ingresados. Confirme que la pinza de rodillo esté abierta y **presione OK** para iniciar la infusión.
- Verifique que no haya dobleces en el equipo, que caigan gotas en la cámara de goteo y que las pinzas estén abiertas.
- El **Modo Básico** se muestra en rojo en la pantalla de operación.

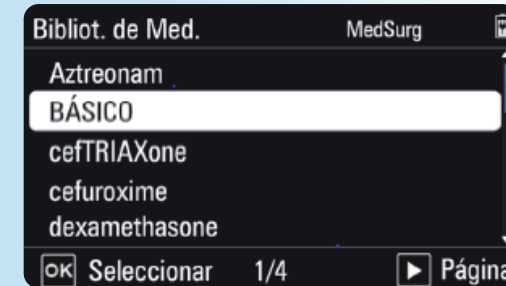

Programación en modo de dosis.



- Seleccione el modo de dosis a programar, la bomba de infusión **EVOIQ** tiene disponible los siguientes modos de dosis:
mg/min, mg/h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/día, mcg/min, mcg/h, mcg/kg/min, mcg/kg/h, mcg/kg/día, ng/min, ng/kg/min, g/h, mEq/h, mEq/kg/h, mmol/h, mmol/kg/h, Unidades/min, Unidades/h, Unidades/kg/min, Unidades/kg/h, mUnidades/min, mUnidades/kg/min, mUnidades/kg/h.
- Con las flechas, ingrese los valores para cada ingreso [cantidad de medicamento, volumen del diluyente] y **presione OK** para confirmar cada ingreso.
- Se muestra y calcula la concentración en función de la cantidad de medicamento y del volumen del diluyente que se ingresó.
- Ingrese el **Modo de Dosis** seleccionando unidades [pueden estar basadas en el peso, ASC y el tiempo.
- Con las flechas, ingrese los valores correspondientes para peso, tasa de dosis y VTBI, y presione para confirmar cada ingreso.






Alarmas.

- Las alarmas se expresan como tonos audibles y/o mensajes de alarma visual que se muestran en la pantalla de la bomba. El mensaje indica el motivo de la alarma y contiene instrucciones para eliminar la alarma.
- Cuando **se active una alarma, siga estos pasos y tome las medidas apropiadas:**
 1. Controlar al paciente.
 2. Controlar el tipo de alarma y el parámetro que activó la alarma.
 3. Determinar el motivo de la alarma.
 4. Eliminar el motivo de la alarma.
 5. Controlar si la alarma se ha eliminado.


La alarma se elimina una vez que se corrija la condición de alarma y se completen todos los avisos e instrucciones. Resolver la alarma siguiendo las instrucciones en la pantalla para eliminar la alarma y pausar el tono audible.

- **Alarmas de Aire:** Las burbujas de aire en el equipo de infusión deben eliminarse antes de la infusión y deben tomarse medidas para evitar burbujas de aire.

- Las burbujas de aire que entran en los vasos sanguíneos de un paciente a través del equipo intravenoso pueden causar embolia gaseosa, poniendo al paciente en riesgo. La bomba muestra las siguientes alarmas de aire en la línea:

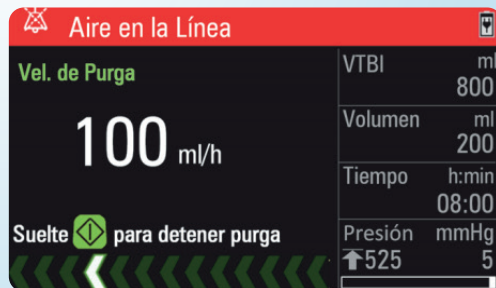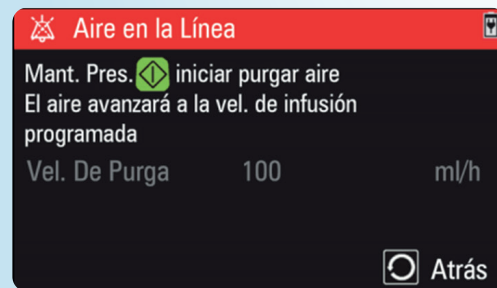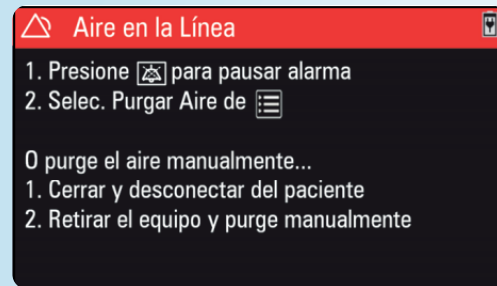

- Debe purgar el aire de los equipos i.v. antes de continuar.
- Presionar INICIO para reanudar la infusión programada.

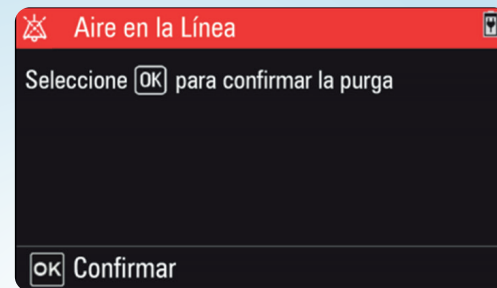

- Oclusión abajo** Cuando la bomba está infundiendo, la alarma se activa debido a una oclusión en el equipo de infusión entre el equipo y el paciente.
 1. Evaluar el equipo i.v. debajo de la bomba y el lugar de acceso I.V.
 2. Eliminar las abrazaderas cerradas, los equipos doblados, la posición de los catéteres, los catéteres coagulados, los filtros i.v. obstruidos u otras fuentes de oclusión debajo de la bomba.
- Una vez que se resuelva la oclusión, la bomba se reiniciará automáticamente.
- El límite de reinicio automático de oclusión abajo se establece en el software de seguridad.
- El límite es de 0 a 9.
- Oclusión arriba** Cuando la bomba está infundiendo, la alarma se activa debido a una oclusión en el equipo de infusión entre la bolsa de infusión y el equipo.

Limpieza de la bomba y sus accesorios.



- **Inspeccione la bomba antes de limpiarla**, si observa signos de daños como abolladuras, grietas, daños por calor o líquidos, retire la bomba del servicio y comuníquese con Asistencia Técnica de Baxter: centro_servicio_tecnico@baxter.com.
- **Realice la limpieza externa**, con la solución jabonosa, detergente neutro con el objetivo de remover la suciedad visible; humedezca el paño en la solución jabonosa, detergente neutro, evitando saturar la bomba con la solución para no generar escurrimiento ni ingreso de la solución al canal de la bomba.
- **Realice la limpieza en la parte frontal**, lateral y la parte posterior de la bomba incluyendo la manija de sujeción y el cable de corriente.
- **Aplique el agente desinfectante**; con la superficie de la bomba limpia proceda a la aplicación del agente desinfectante en el orden que realizó el proceso de limpieza.
- **Recuerde no atomizar** el agente desinfectante directamente en la bomba, atomice sobre un paño limpio.
- Deje actuar la solución desinfectante por un mínimo de **10 minutos**.
- **Retire el agente desinfectante** con un paño humedecido en agua y deje secar.

Limpiadores y desinfectantes aprobados:

- Toallitas de lejía Alcavis®.
- Toallitas desinfectantes para superficies Alpet® D2.
- Toallitas desinfectantes y limpiadoras Azomax.
- CIDEX® OPA.
- Toallitas desinfectantes para hospitales Clorox.
- Dispatch con lejía.
- Toallitas germicidas con lejía Clorox Healthcare®.
- Toallitas desinfectantes limpiadoras con peróxido de hidrógeno Clorox Healthcare®.
- Toallitas TB Diversey Oxivir®.
- Peróxido de hidrógeno, 3%
- Alcohol Isopropílico, 70%
- Metrex CaviCide 1TM.
- Metrex CaviWipesTM.
- Toallitas germicidas desechables PDI Sani-Cloth® AF3.
- Toallitas germicidas desechables con lejía PDI Sani - Cloth®.
- Toallitas germicidas desechables PDI Sani - Cloth® HD.
- Toallitas germicidas desechables PDI Sani - Cloth® Plus.
- Toallitas germicidas desechables PDI Super Sani - Cloth®.
- Perform® Classic Concentrate OXY, 0,5%
- Propanol, 50%
- Desinfectante para superficies de alto nivel Rely+On™ Virkon®, 1%
- Lejía con hipoclorito de sodio, 0,5%
- Toallita desinfectante de superficies para hospitales VIRAGUARD®.
- Agua.
- Etanol, 70%

Batería.



- Use la batería únicamente durante el traslado del paciente o cuando no haya alimentación de CA disponible.

Mantenga enchufado el cable de alimentación a todo momento, incluso cuando la bomba no esté en uso.

Si la batería no se recarga debidamente, la terapia puede interrumpirse. ⚠

La batería se carga cuando la bomba está conectada a la alimentación de CA y funciona a una velocidad inferior a 700 ml/h.

Cargue la batería como se indica en las instrucciones, utilice solo la bomba y el cable de alimentación de CA aprobado y suministrado.

Ícono	Descripción
	● La bomba está funcionando con la energía de la batería. ● La parte blanca del 100% representa la carga restante [90%-100%].

Ícono	Descripción
	● La bomba está funcionando con la energía de la batería. ● La parte blanca del 75% representa la carga restante [50% 90%].
	● La bomba está funcionando con la energía de la batería. ● La parte blanca del 50% representa la carga restante [20% - 50%].
	Batería baja: ● La bomba está funcionando con la energía restante de la batería. ● La parte blanca del 25% indica la carga restante [0%-20%]. Enchufe la batería a una alimentación de CA.
	Batería agotada: ● La bomba funciona con la energía de la batería, sin carga restante. ● En la pantalla guía, se indica que la batería necesita recargarse. El conteo regresivo se detiene cuando la bomba es enchufada a una alimentación de CA.



EvoIQ

Infusion System



Simplemente inteligente¹



**Prevención de
errores de medicación²**



**Flujos de
trabajo intuitivos**



**Un set para
cada necesidad**

EvoIQ

Infusion System



Simplemente inteligente¹

Referencias: **1.** Data on file Baxter / **2.** Elliott, R, et al., Prevalence and Economic Burden of Medication Errors in the NHS in England.

Material educativo para los profesionales de salud, prohibida su reproducción parcial o total.

Bombas de infusión Evo IQ: Registro Sanitario No. INVIMA 2019EBC-0020775

Baxter, Evo IQ, Dose IQ son marcas registradas de Baxter international Inc.

Laboratorios Baxter S.A.

Bogotá, Transversal 23 No. 97 - 73 piso 6. Teléfono: [571] 5893000

Cali, Calle 36 No. 2C - 22 Conmutador: [572] 4447000 Fax: [572] 4442671

Línea de atención: 018000 939 595

centro_de_servicios@baxter.com

www.baxter.com.co