


1 Para activar el mecanismo de liberación para la RCP:

1. Agarre cualquiera de las palancas (A) y apriete.
2. Baje el respaldo hasta la posición plana.

Para restablecer el motor del respaldo después de activar el mecanismo de liberación para la RCP, pulse el botón de descenso del respaldo en los paneles de control o el botón de RCP en el panel de control de la enfermera.

Panel de control de baranda:

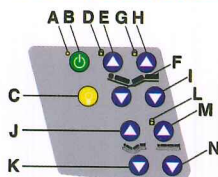

Más información: www.stryker.com


Nombre	Función
A LED de alimentación	Se ilumina al encender o apagar todos los paneles de control
B Alimentación	Enciende o apaga el panel de control de la barra lateral, el panel de control del paciente y el panel de control de la enfermera
C Luz de debajo de la cama	Enciende o apaga la luz de debajo de la cama
D LED de bloqueo del respaldo	Se ilumina cuando se bloquea la sección del respaldo
E Respaldo arriba	Sube el respaldo
F Respaldo abajo	Baja el respaldo
G LED de bloqueo de la sección superior de las piernas	Se ilumina al bloquear la sección superior de las piernas
H Sección superior de las piernas arriba	Sube la sección superior de las piernas
I Sección superior de las piernas abajo	Baja la sección superior de las piernas
J Contorno automático arriba	Sube el respaldo y la sección superior de las piernas al mismo tiempo
K Contorno automático abajo	Baja el respaldo y la sección superior de las piernas al mismo tiempo
L LED de bloqueo de la mesa	Se ilumina al bloquear la sección de la mesa
Nombre	Función
M Mesa arriba	Sube la mesa
N Mesa abajo	Baja la mesa

NL-CR-7.5F-26 REV: A

2 Control Remoto Manual de la Enfermera

Nombre	Función
A LED de alimentación	Se ilumina al encender o apagar todos los paneles de control
B Alimentación	Enciende o apaga el panel de control de la barra lateral, el panel de control del paciente y el panel de control de la enfermera
C Respaldo arriba	Sube el respaldo
D Bloqueo de la subida de respaldo/LED de bloqueo del respaldo	Sube la sección superior de las piernas
E LED de bloqueo de la sección superior de las piernas	Sube la mesa
F Sección superior de las piernas arriba	Activa o desactiva bloqueos de respaldo. Se ilumina cuando se bloquea el respaldo.
G Mesa arriba	Activa o desactiva bloqueos para la sección superior de las piernas. Se ilumina al bloquear la sección superior de las piernas.
H Bloqueo de la mesa/LED de bloqueo de mesa	Activa o desactiva bloqueos para el movimiento de la mesa. Se ilumina al bloquear la sección de la mesa.
I Posición de examen	Aplana la mesa y la sube a la altura máxima
J Indicador de carga de la batería	Se ilumina en ámbar cuando el producto se conecta a una toma de pared y las baterías están recargándose. La batería tardará entre 10 y 12 horas en cargarse por completo. Una vez cargada la batería, el LED se apagará.
K Posición de silla	Coloca el producto en la posición de silla
L Indicador de enchufado	Se ilumina cuando se enchufa el producto
M Posición vascular de un botón	Anula el bloqueo del panel de control para lograr una posición de Trendelenburg de 12°

Nombre	Función
N RCP de emergencia	Anula el bloqueo del panel de control para lograr una posición plana a baja altura. También está disponible si los paneles de control están apagados.
O Contorno automático arriba	Sube el respaldo y la sección superior de las piernas al mismo tiempo
P Trendelenburg	Coloca el producto en posición de Trendelenburg (cabeza abajo con los pies arriba)
Q Posición de cabeza de la cama en ángulo de 30°	Sube el respaldo, baja el reposapiernas superior y coloca la cama en la máxima posición de Trendelenburg al mismo tiempo.
R Respaldo abajo	Baja el abajo
S Sección superior de las piernas abajo	Baja la sección superior de las piernas
T Mesa abajo	Baja la mesa
U Contorno automático abajo	Baja el respaldo y la sección superior de las piernas al mismo tiempo
V Trendelenburg invertida	Coloca el producto en posición de Trendelenburg invertida (cabeza arriba con los pies abajo)
W Salida	Baja la mesa, baja la sección superior de las piernas y sube el respaldo de manera que el paciente pueda entrar y salir del producto

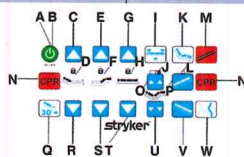

Más información: www.stryker.com

NL-CR-7.5F-26 REV: A

Guía de Limpieza Camas y Camillas

stryker



Advertencia

Siempre desconecte el cable de alimentación de la pared al llevar a cabo tareas de limpieza en la cama.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS

- Productos de limpieza sugeridos para las superficies de la camilla:
- Productos de limpieza cuaternarios (ingrediente activo: cloruro amónico).
- Productos de limpieza fenólicos al 70% (ingrediente activo: o-fenilfenol).
- Solución de lejía con cloro (al 5,25%, menos de 1 parte de lejía por 100 partes de agua).

Más información: www.stryker.com

Precauciones

- No limpie la cama con vapor, con manguera o con Ultrasonido.
- No sumerja las piezas de la cama en ningún tipo de líquido.
- Use un paño para secar las superficies que haya limpiado a fin de evitar la acumulación de sustancias de limpieza.
- Inspeccione el colchón después de cada uso.
- ALGUNOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA SON DE NATURALEZA CORROSIVA Y PUEDEN DAÑAR EL PRODUCTO SI SE USAN DE FORMA INCORRECTA.
- Si los productos descritos anteriormente se utilizan para limpiar el equipo de atención al paciente Stryker, deben tomarse medidas para asegurar que las camas se limpien con un paño impregnado con agua limpia y se sequen bien después de limpiarlas.
- SI NO SE ENJUAGA Y SE SECA BIEN LA CAMA, quedaran residuos corrosivos sobre la superficie, lo que es posible que cause corrosión prematura de componentes importantes.



NL-CR-7.5F-13 REV: C



1. Prepare la solución de desinfectante que va a utilizar para la limpieza de las camas como se recomienda en los productos de limpieza.
2. Con un paño limpio y suave humedézcalo con la solución desinfectante.
3. Limpie la base de la cama con el paño húmedo con la solución desinfectante.
4. Para las barandas laterales levante la barandilla, cierre la barandilla y limpie con el paño húmedo con la solución desinfectante.
5. Para el panel de control límpielo con el paño húmedo con la solución desinfectante.
6. Una vez ha pasado el paño húmedo por todas las superficies de la cama, retire el desinfectante con un nuevo paño limpio y suave.
7. De esta manera deja toda la cama sin residuos del desinfectante.
8. Por último, verifique que ha quedado completamente seca la cama.

9. Si quedan residuos de humedad vuelva a pasar un paño limpio y seco para retirar esos residuos de humedad.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES AL UTILIZAR ESTOS TIPOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA DE ESTOS PRODUCTOS.

INFORMACIÓN REGULATORIA

CAMAS HOSPITALARIAS STRYKER
Registro Sanitario No. INVIMA 2013DM-0009676

SV1 - CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA
Registro Sanitario No. INVIMA 2016DM-0014340

Importador: Stryker Colombia S.A.S.
AV. Calle 82 # 10 - 33 Of. 405
Tel: 57 (1) 743 8200

En caso de falla, comuníquese con nuestro departamento de Servicio Técnico:
serviciotecnico.col@stryker.com
Línea de Atención: 01-8000-80079

Más información: www.stryker.com

NL-CR-7.5F-13 REV: C