


EQUIPO	DESCONGELADOR DE PLASMA	MARCA	HELMER
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA	MODELO	DH2, DH4, DH8

GUIA DE USO

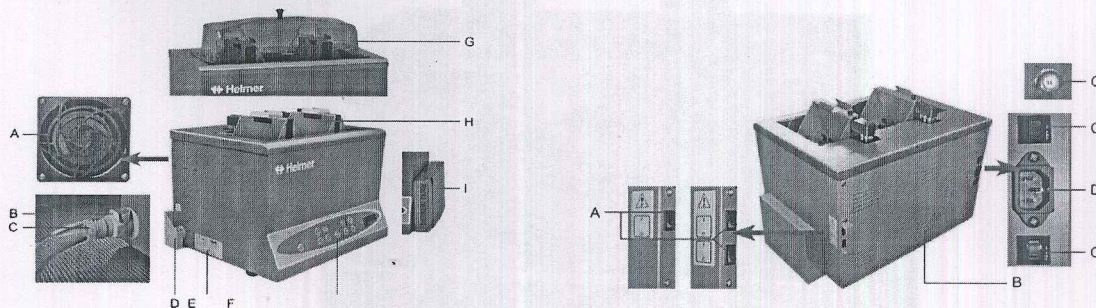

COMPONENTES EXTERNOS

Etiqueta	Descripción
A	Ventilador (modelos DH8 100 V)
B	Puerto de drenaje
C	Tubo de drenaje con válvula de acoplamiento
D	Cubierta del puerto de drenaje
E	Etiqueta de especificaciones del producto

Etiqueta	Descripción
F	Panel de control
G	Cubierta
H	Cesto
I	Soporte de la envoltura de plasma

Etiqueta	Descripción
A	Interruptor de agitación
B	Ventilación

Etiqueta	Descripción
C	Disyuntor
D	Conector de alimentación

ITEM		DESCRIPCIÓN GENERAL	
DATOS TÉCNICOS	VOLTAJE	115 V	TOLERANCIA ELECTRICA ±10 %
	FRECUENCIA	60 Hz	VELOCIDAD N/A
	TEMPERATURA	INTERNA: -15 °C a -30 °C / AREA: 15 °C a 32 °C	
PARAMETROS DE AREA		► Uso en interiores únicamente ► Altitud (máxima): 2000 m ► Rango de temperatura ambiente: 15 °C a 32 °C (59 °F a 90 °F) ► Humedad relativa (máxima para la temperatura ambiente): 80 % para temperaturas de hasta 31 °C (88 °F), disminuyendo linealmente hasta el 50 % a 40 °C (104 °F)	
PRECAUCIONES Y ALERTAS		► Antes de mover la unidad, asegúrese de que se haya eliminado el agua de la cámara. ► Utilice solamente los cables de alimentación suministrados. ► Descontamine las piezas antes de enviarlas para su mantenimiento o reparación. ► Asegúrese de que la cámara y el drenaje estén libres de residuos o contaminantes. ► Llene la cámara al nivel apropiado.	
PUESTA EN MARCHA		► Introduzca la bolsa de plasma en una bolsa de envoltura del tamaño apropiado. ► En el panel de control, pulse el botón LIFT OUT para elevar y abrir el cesto. ► Coloque la bolsa de plasma envuelta en el cesto. Enganche la ranura que hay en la parte superior de la bolsa de envoltura sobre la pestaña del cesto. Para envolturas grandes, asegúrese que ambas ranuras estén enganchadas sobre las pestañas. ► Introduzca un complemento de seguridad, a través del juego superior de orificios, en el compartimiento del cesto. Empuje el cierre hacia el cesto hasta que encaje con la bolsa de envoltura. ► Establecer el tiempo del ciclo de descongelación (en minutos). ► Comenzar un ciclo de descongelación. ► Cuando un ciclo de descongelación llega al final del tiempo programado, el cesto deja de agitarse, se eleva y se abre. Se escucha una alerta sonora para indicar que el ciclo de descongelación se ha completado.	
RECOMENDACIONES		► Los sistemas de descongelación de plasma de Helmer están destinados a descongelar productos congelados de la sangre y otros productos médicos, biológicos y científicos. Deje que la temperatura de la cámara se establezca en el valor establecido, antes de descongelar el producto.	