

Cardioversión sincronizada

1. Enchufe el cable de terapia al puerto de terapia del equipo.
2. Aplique los electrodos de desfibrilación multifunción o las palas externas al paciente.
3. Gire el mando de selección de modo hasta Desfib. manual.
4. Pulse la tecla de software **Activar sinc.** para activar la función.
5. Pulse el botón Selec. deriv. para seleccionar la derivación más adecuada. La derivación seleccionada debe tener una señal clara y un complejo QRS amplio.
6. Verifique que los marcadores blancos de onda R aparecen sobre estas ondas. Si no aparecen o no coinciden con las ondas R (por ejemplo, aparecen sobre las ondas T) seleccione otra derivación.
7. Seleccione el nivel de energía si es necesario.
8. Pulse el botón Cargar del panel frontal o de las palas externas.
9. Pulse el botón descarg. del panel frontal o de las palas externas y suéltelo hasta que se complete la descarga.

Símbolos de estado de alarma

-  indica que las alarmas se encuentran en una pausa.
-  indica que se han reiniciado las alarmas.
-  indica que se han desactivado los sonidos de alarma.
-  indica que el sistema se encuentra en el estado de alarma desactivada.

Prueba de usuario

Antes de cada uso, deberán realizarse las siguientes comprobaciones con el fin de garantizar que el equipo está preparado para ser utilizado en cualquier momento.

1. Pulse el botón Menú principal.
2. Seleccione la tecla de software **Prueba usuario >>**.
3. Seleccione la tecla de software **Iniciar**.
4. **Prueba periódica** está activada de forma predeterminada. Si es necesario, seleccione **Energy Delivery** (Salida energía) y **Controls Test** (Prueba de controles).
5. Siga las indicaciones de la pantalla.

Estimulación no invasiva

Modo a demanda:

1. Aplique electrodos multifunción y derivaciones de ECG.
2. Gire el mando de selección de modo a Marcap.
3. Pulse el botón Selec. deriv. para seleccionar la derivación más adecuada.
4. Verifique que los marcadores blancos de onda R aparecen sobre los complejos QRS. Si no aparecen o no coinciden con la onda R, seleccione otra derivación.
5. Gire el mando de navegación para ajustar la frecuencia del marcapasos y, después, presione el mando. Si es necesario, seleccione la salida inicial del marcapasos.
6. Pulse la tecla de software Inic estim para iniciar la estimulación.
7. Verifique que los marcadores blancos de electroestimulación aparecen sobre la onda del ECG.
8. Ajuste la salida del marcapasos hasta que tenga lugar la captura cardíaca.
9. Verifique la presencia de un pulso periférico.

Modo fijo:


1. Gire el mando de selección de modo a Marcap.
2. Cambie el marcapasos al modo fijo.
3. Si los electrodos de ECG están aplicados, pulse el botón Selec. deriv. para seleccionar la derivación que desee.
4. Ajuste la frecuencia del marcapasos o la salida del marcapasos. Si es necesario, seleccione la salida inicial del marcapasos.
5. Pulse la tecla de software **Inic estim** para iniciar la estimulación.
6. Verifique que los marcadores blancos de electroestimulación aparecen sobre la onda del ECG.
7. Ajuste la salida del marcapasos hasta que tenga lugar la captura cardíaca.
8. Verifique la presencia de un pulso periférico.



046-011292-00(1.0)

BeneHeart D3/BeneHeart D2

Guía de referencia rápida del desfibrilador/monitor

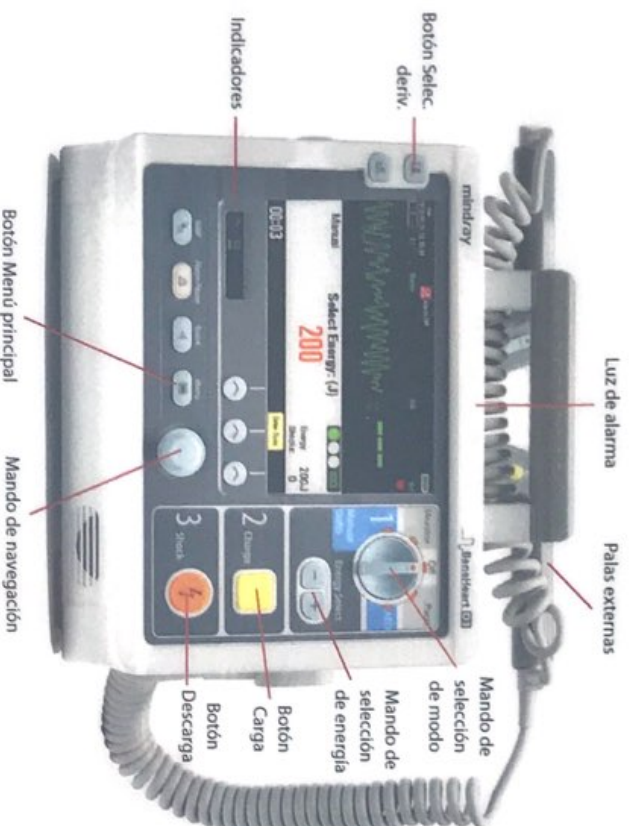

Modo DEA

1. Enchufe el cable de los electrodos al puerto de terapia del equipo.
2. Aplique los electrodos multifunción al paciente.
3. Gire el mando de selección de modo a DEA.
4. Siga las instrucciones de la pantalla y de voz.
5. Si se lo solicita el equipo, pulse el botón de descarga.

Los indicadores se describen de izquierda a derecha:

Indicador de alimentación de CA

■ Encendido: cuando la alimentación de CA está conectada.

■ Apagado: cuando la alimentación de CA no está conectada.

Indicador de carga de la batería

■ Amarillo: la batería se está cargando.

■ Verde: cuando la batería está completamente cargada o el equipo se está utilizando con la batería.

■ Apagado: cuando no hay instalada ninguna batería o ésta falla.

Indicador de estado

■ Parpadeante: cuando se detecta un error o cuando la batería no está instalada si **sin batería** se ha configurado como **Indicador estado act.**

■ Apagado: cuando el equipo funciona correctamente.

Indicador de estado

■ Iluminado: cuando la fuente de alimentación de CA está conectada y el equipo funciona correctamente.

Desfibrilación manual

1. Enchufe el cable de terapia al puerto de terapia del equipo.
2. Aplique los electrodos de desfibrilación multifunción o las palas externas al paciente.
3. Gire el mando de selección de modo hasta Desfib. manual.
4. Seleccione el nivel de energía si es necesario.
5. Pulse el botón Cargar del panel frontal o de las palas externas.
6. Pulse el botón descargar del panel frontal o de las palas externas.

mindray