


GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN Electrobisturí

Marca: Valleylab
Modelo: Force FX-C




Es un generador electro quirúrgico aislado que proporciona energía para cortar, desecar. y tejido fulgurante durante la cirugía bipolar y monopolar. Sus sistemas de retorno y accesorios activos se encuentran diseñados para funcionar como un sistema.

Panel frontal del equipo

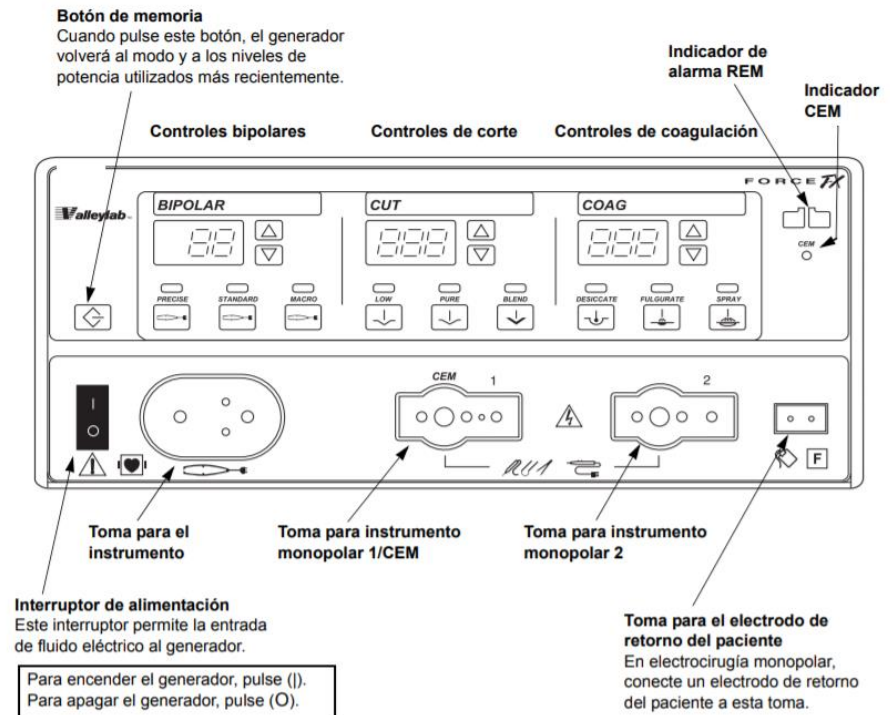


Panel posterior del equipo

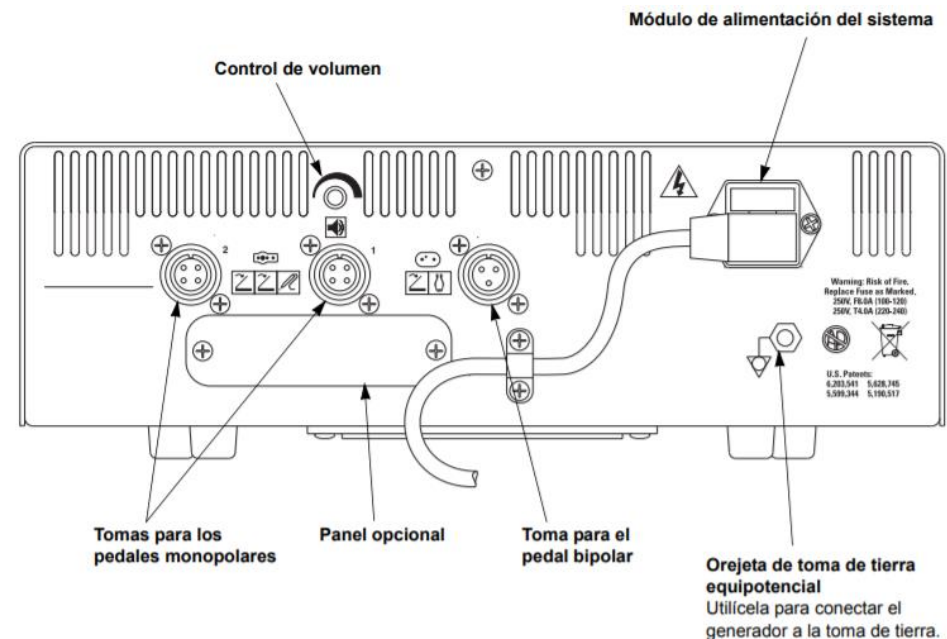


Controles del electrobisturí


Controles bipolares

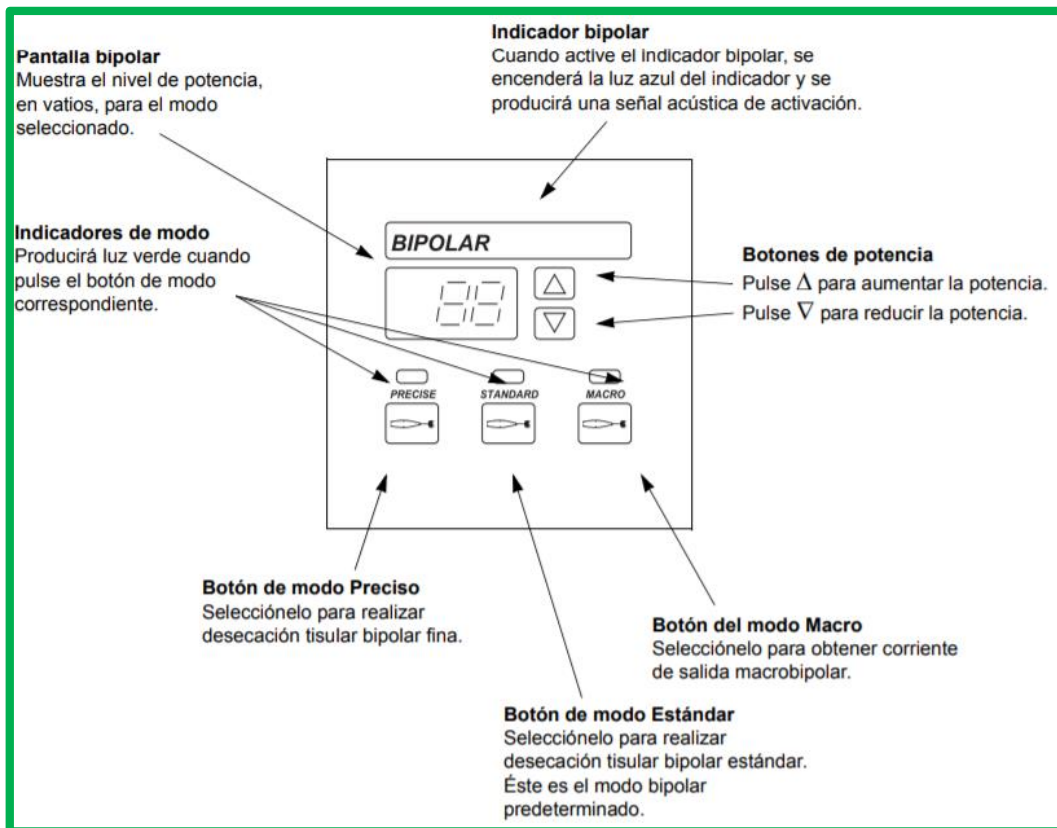

Controles de corte monopolar

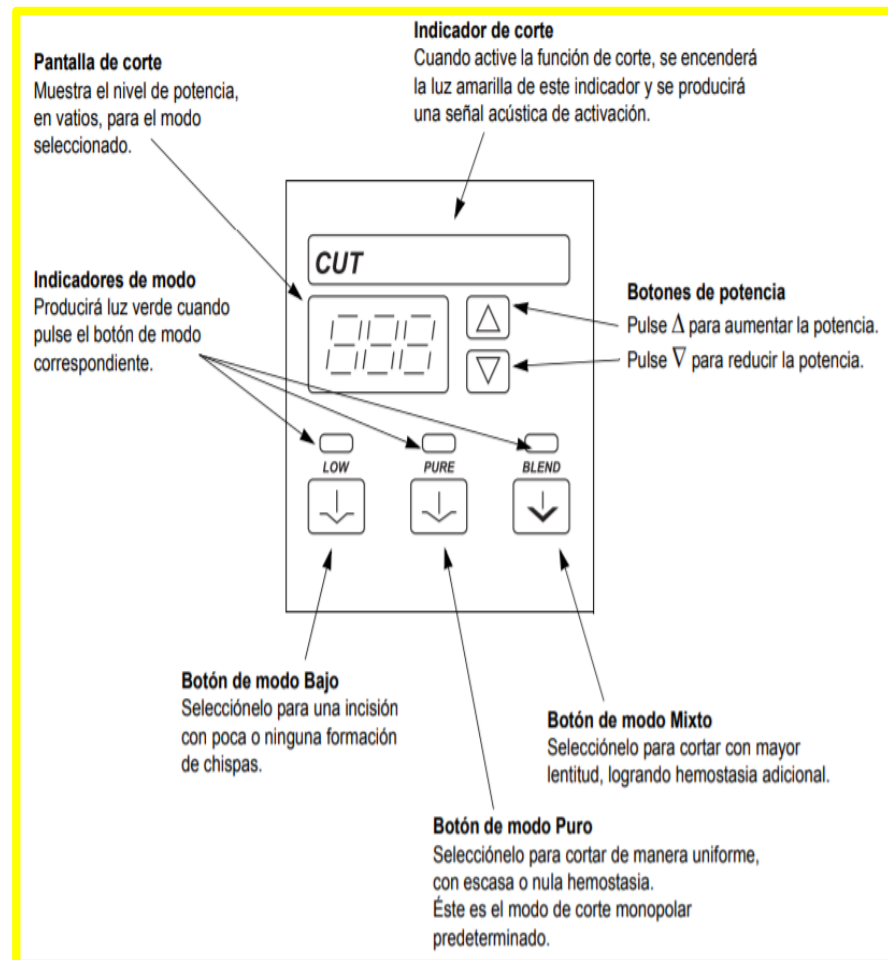

Controles de coagulación monopolar

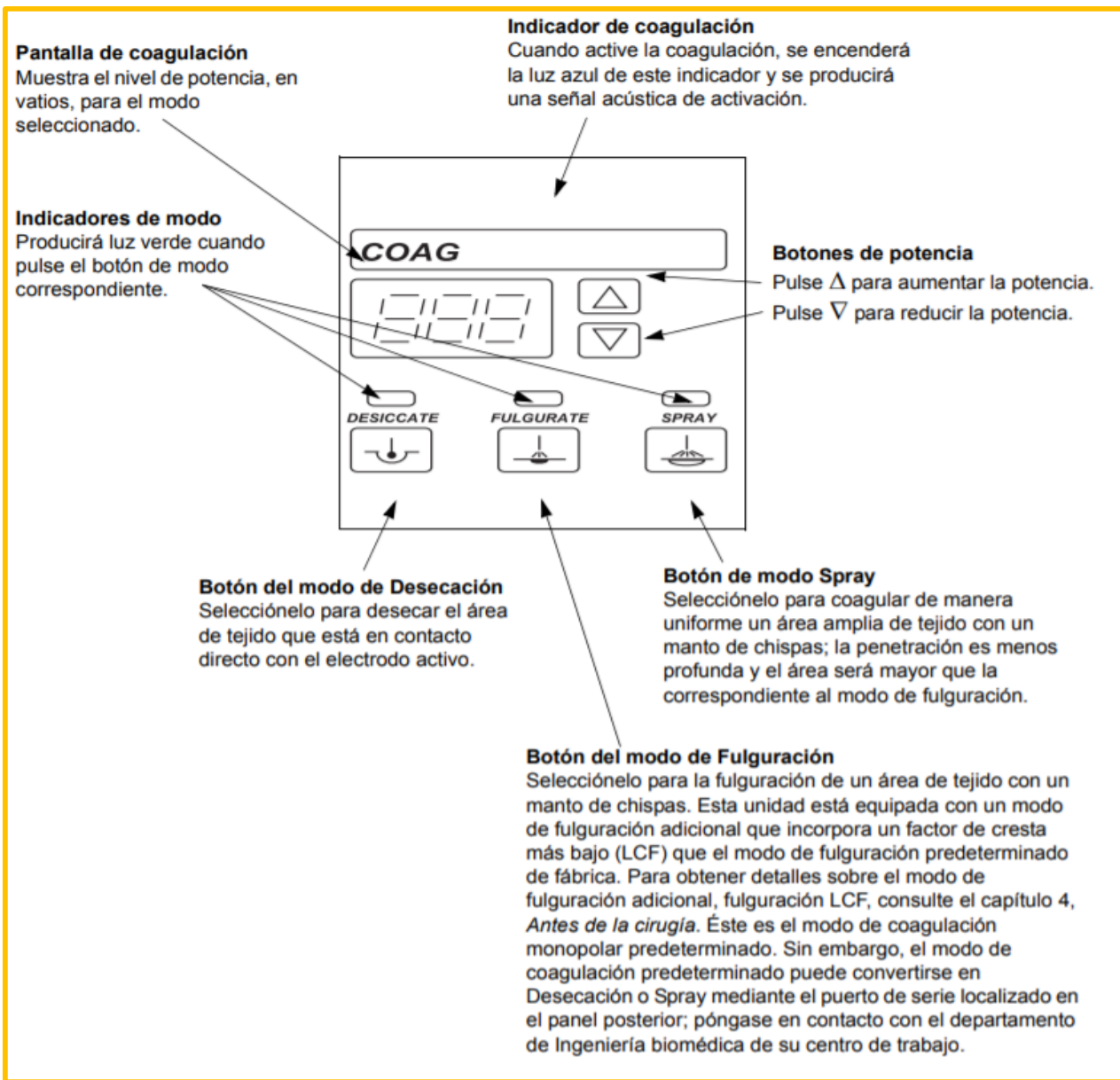


Guía rápida de operación de
equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina
Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y
Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de
Occidente

Modos de operación del electrobisturí

Preparación Cirugía Bipolar o Macro-polar

1. Conectar el pedal Valleylab en su toma correspondiente en la parte posterior del generador. (No conecte materiales húmedos o dañados, ni electrodo de retorno si solo utiliza accesorio bipolares).
2. En caso de ser necesario puede utilizar un accesorio de activación manual en la parte frontal del generador.
3. (Opcional). Para visualizar el nivel anterior de potencia o intensidad pulse el botón memoria.
4. Para establecer el modo bipolar, pulse el botón Bajo (Preciso), Med (Estándar) o Macro-bipolar (Macro). El indicador correspondiente emitirá una luz verde.
5. Para aumentar la potencia del modo seleccionado, pulse el botón correspondiente a la flecha ascendente blanca. Para reducir la potencia pulse el botón correspondiente con la flecha descendente blanca (Nivel de potencia máximo es de 70 Vatios).

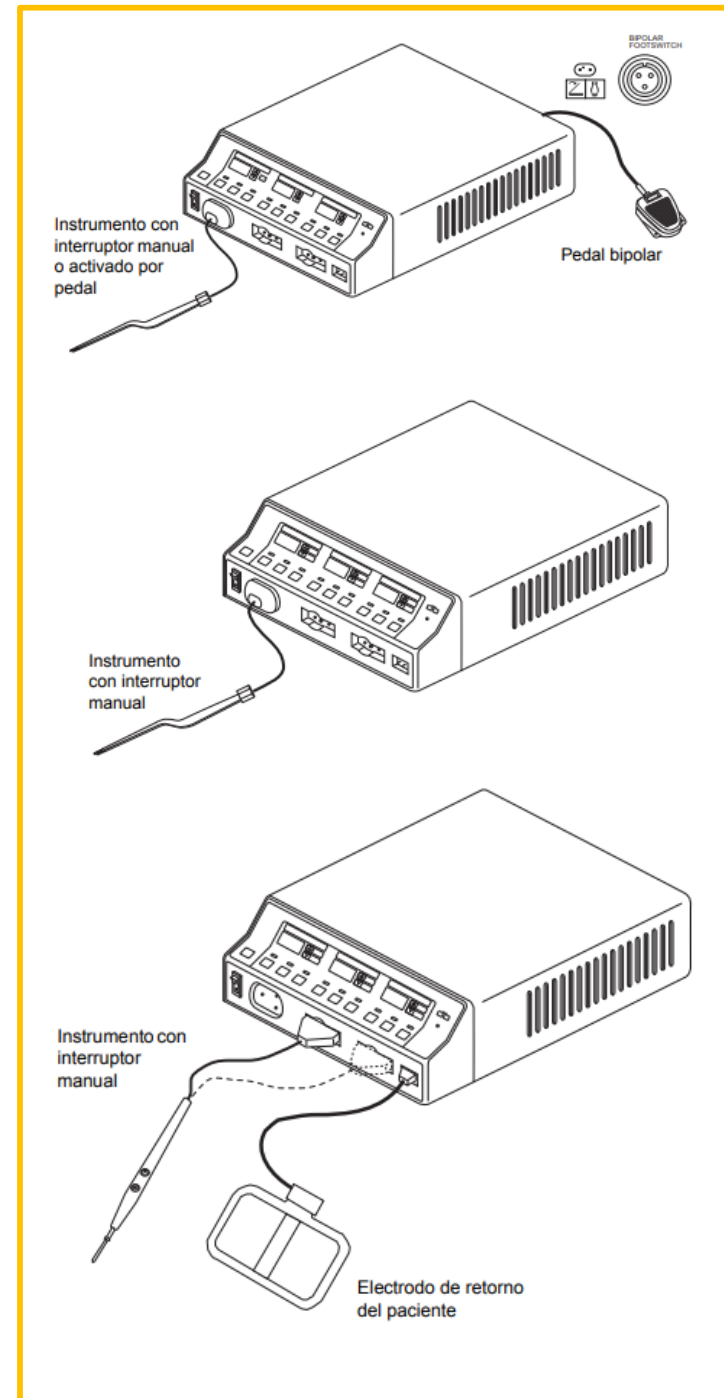


Modos de operación del electrobisturí

Preparación Cirugía Monopolar

1. Conectar el pedal Valleylab en su toma correspondiente en la parte posterior del generador. (No conecte materiales húmedos o dañados, Conecte electrodo de retorno).
2. En caso de ser necesario puede utilizar un accesorio de activación manual o una pieza de mano CUSA con funda cónica CEM en la parte frontal del generador.
3. Para la activación por pedal o activado por pedal, utilice el toma Monopolar 1 o 2 y el toma para Instrumento Monopolar 1/CEM o Monopolar 2.

VITAL IMPORTANCIA

El uso del electrodo de retorno para evitar quemaduras. **NUNCA** recorte el electrodo de retorno. Si el electrodo de retorno no posee la función de seguridad REM no permite activar el control de calidad de contacto del Valleylab.

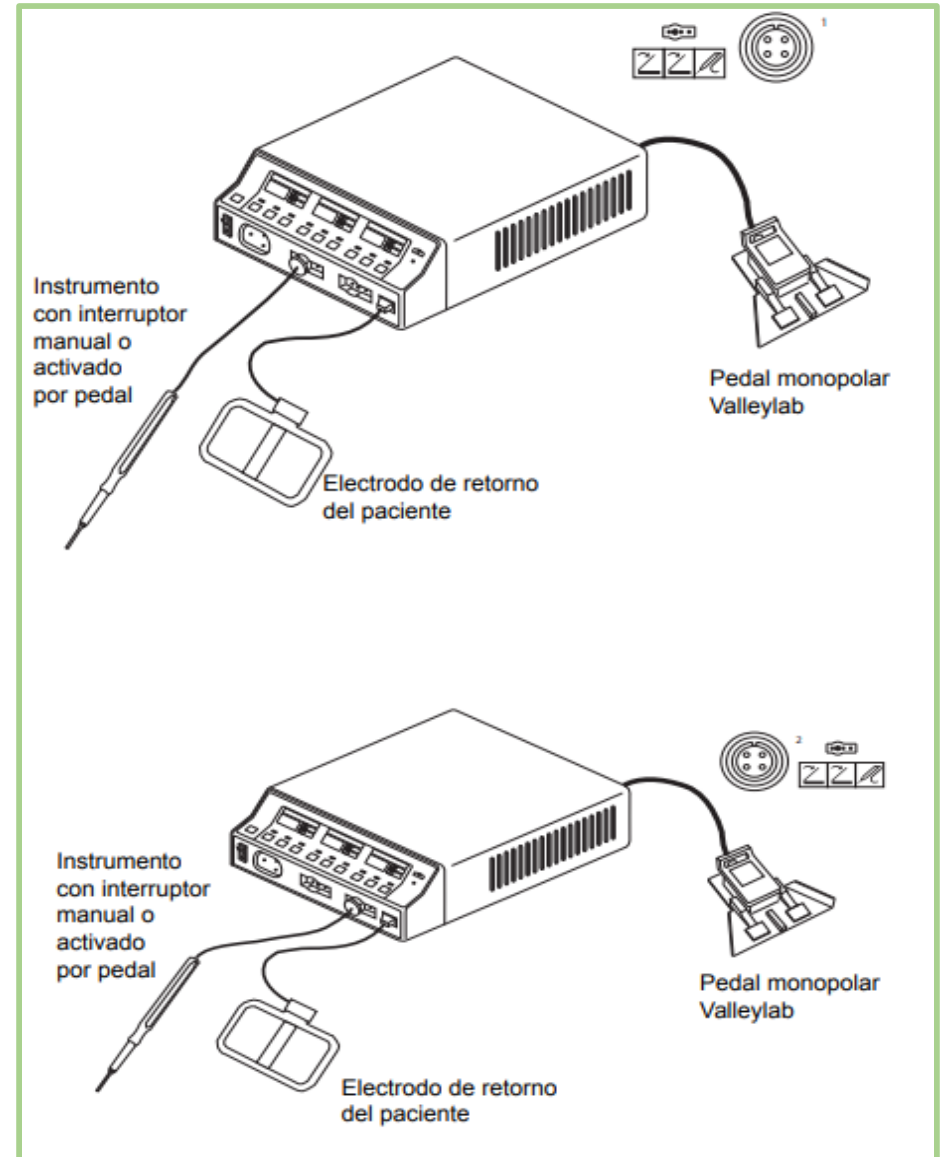

Modos de operación del electrobisturí

Selección Modo de corte o coagulación

1. Pulse el botón Bajo, Puro ,Mixto. El indicador correspondiente emitirá una luz verde.
2. Para aumentar o disminuir la potencia utilice las flechas correspondientes. El nivel máximo para los modos Bajos y Puros es de 300 Vatios para el modo mixto es de 200 Vatios.
3. Para coagulación pulse el botón Bajo (Desecación), Med (Fulguración) o Alto(Spray). Para modo de fulguración LCF pulse Med y manténgalo presionado durante dos segundos, en el lateral izquierdo de la pantalla de coagulación aparecerá una "L" . Para Fulguración estándar pulse Med y manténgalo durante dos segundos y en la pantalla de coagulación desaparecerá la "L".

Coagulación simultánea

Conecte dos instrumentos *monopolares* para la coagulación simultánea. Cada uno de ellos recibe un porcentaje del nivel de potencia total. La potencia que recibe cada instrumento depende de la resistencia tisular que percibe el generador en cada área quirúrgica. En general, a menor resistencia tisular la potencia recibida será mayor. La potencia de salida total combinada no superará el nivel establecido de potencia para el modo de coagulación.

Figura 4-6.
Conexión para la coagulación simultánea utilizando dos instrumentos con interruptor manual


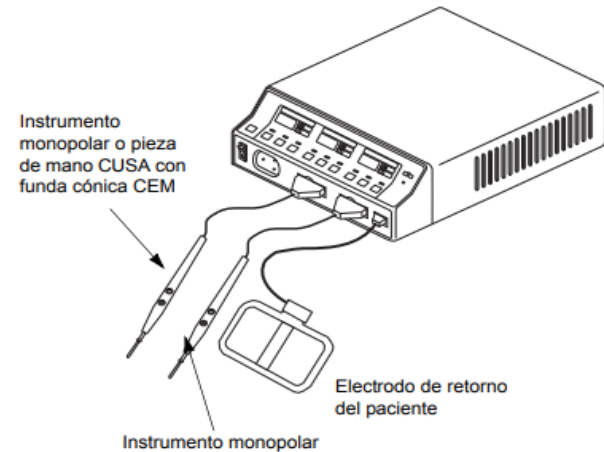


Figura 4-7.
Conexión para la coagulación simultánea utilizando dos instrumentos activados por pedal



GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA

Electrobisturí VALLEYLAB Force FX-C

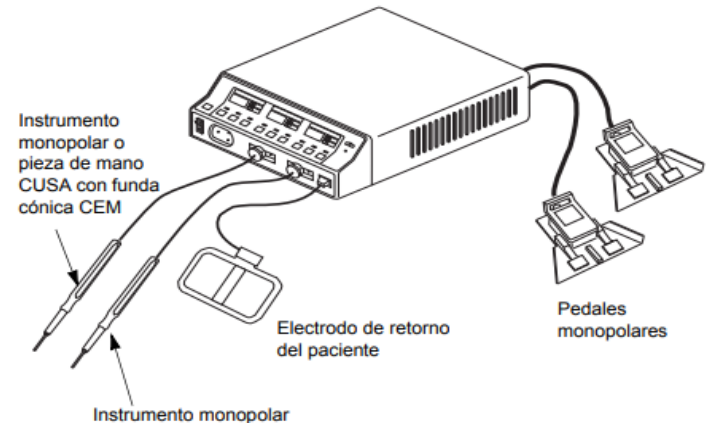

Recomendaciones:

- No realice ningún tipo de intervención mientras el equipo se encuentre conectado o en operación.
- No limpie el generador con productor abrasivos, desinfectantes, disolventes ni ningún otro material capaz de raspar los paneles o dañar el generador.
- El generador no puede esterilizarse.

IMPLEMENTOS

Solución de limpieza

Paños suaves

APAGUE el generador y DESENFUCHE el cable de alimentación de la toma de pared.

Limpie perfectamente todas las superficies del generador y el cable de alimentación con un desinfectante o una solución de limpieza suave y un paño húmedo. Siga los procedimientos aprobados por su centro de trabajo o utilice un protocolo de control de infección validado.

No permita la entrada de NINGÚN líquido en el interior del chasis.

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos

Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina
Ext. 1250

Realizado por: Dahyana Morales y
Juan M. Becerra

Universidad Autónoma de
Occidente

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS

Electrobisturí VALLEYLAB Force FX-C



Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

Recomendaciones

- Compruebe si existe algún signo visible de daño físico
- Asegúrese de que el cajón de los fusibles esté bien cerrado
- Verifique que los cables estén enchufados y conectados correctamente
- Si aparece en la pantalla algún código de error apague el generador y vuelva a encenderlo
- Si persisten los fallos llamen al personal de servicio técnico

Alarma/Mensaje	Causa	Acción a Realizar
REM	Para cualquier situación que active la alarma	• Compruebe la correcta conexión del electrodo de retorno del paciente. • Examine el cable, enchufe y conexión del cable al electrodo de retorno. • Compruebe el contacto del electrodo de retorno con el paciente. • De persistir aplique nuevo electrodo de retorno
Estímulo neuromuscular anormal	• Arco metal- metal • Producirse durante coagulación • Corrientes de fuga anormales de 50 - 60Hz	• Intervenga el procedimiento inmediatamente. • Compruebe conexiones con el generador. • Utilice un nivel de potencia más bajo para los modos fulguración y spray o selección desecación.
Generado no responde al encenderlo	• Desconexión del cable de alimentación o falla de la red eléctrica. • Cajón de fusibles está abierto o se encuentra fundidos. • Fallo de algún componente interno	• Compruebe todas las conexiones eléctricas. • Sustituya el cable de alimentación. • Cierre el cajón de fusibles. • Reemplace fusibles quemados (Personal técnico).
No se completa la auto prueba	• Fallo de software • Fallo de componente interno	• Reinicie el generador. • Consulte al personal de servicio técnico.
Incapacidad para producir corriente por parte del generador	• Fallo del pedal o instrumento con interruptor manual. • Pedal incompatible • Pedal conectado al toma incorrecto. • Potencia establecida demasiado baja. • Fallo de componente interno	• Reinicie el generador , compruebe y corrija conexiones de accesorios. • Utilice únicamente el pedal de Valleylab Force FX. • Conecte el pedal al toma correspondiente en el momento del procedimiento. • Aumente la potencia de generador. • Utilice un generador de repuesto.