

• **COMPOSICIÓN Y CONEXIONES**

- ① Pulsador standby
(CON. – rodeado por anillo iluminado)
- ② Símbolo "Pulsador standby"
- ③ Electrodo neutro para AF aislado de tierra
- ④ Símbolo "Pieza de aplicación protegida contra desfibrilación de la clase CF"
- ⑤ Símbolo "Consultar el Manual de instrucciones"
- ⑥ Pantalla táctil con teclas de activación de los modos
- ⑦ Barra de activación del conector unipolar superior
- ⑧ Barra de activación del conector unipolar inferior
- ⑨ Barra de activación del conector bipolar superior
- ⑩ Barra de activación del conector bipolar inferior
- ⑪ Conector para instrumentos unipolares con interruptor manual o de pedal* (de color blanco en estado activado)
- ⑫ Conector para instrumentos unipolares con interruptor manual o de pedal* (de color blanco en estado activado)
- ⑬ Conector para el electrodo neutro* (de color blanco en estado activado)
- ⑰ Conector para instrumentos bipolares con interruptor de pedal, interruptor de dedo o AUTO-START* (de color blanco en estado activado)
- ⑱ Conector para instrumentos bipolares con interruptor de pedal, interruptor de dedo o AUTO-START* (de color blanco en estado activado)



• **Seleccionar fuente de alimentación**



Seleccione la fuente de alimentación en el submenú (fuente de gas)

Confirme la opción seleccionada pulsando (15), o bien cancele los cambios pulsando (14)





Instrucciones de inicio

- Conecte el cable AC
- Conecte la salida de gas de la botella (alta presión) o de la central de gas (baja presión) mediante el tubo flexible con la conexión para gas del equipo.
- Oprima el interruptor principal.
- Seleccione tipo de paciente.
- Abra la válvula de la botella de CO2

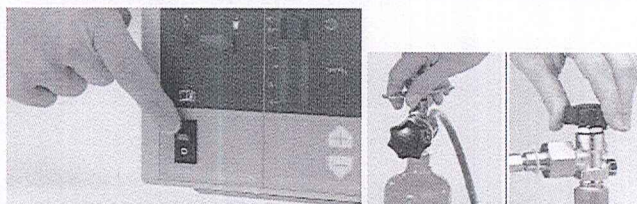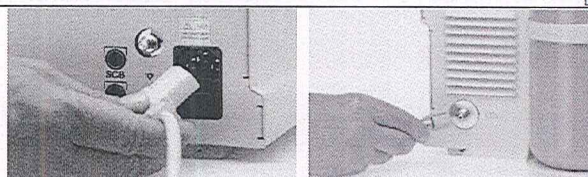

- Confirme los valores nominales de presión y flujo con las teclas de la pantalla táctil +/-
- La activación de la tecla CONEXIÓN/DESCONEXION inicia la insuflación
- Coloque el filtro de gas CO2 esterilizado en el conector de insuflación. Aplique el tubo flexible de insuflación al filtro de gas CO2

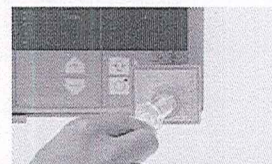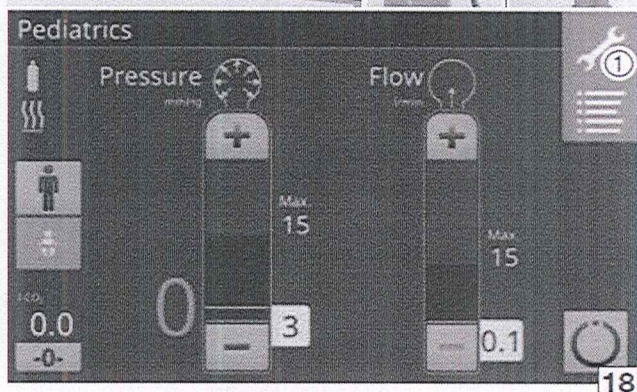

Preparación para la insuflación

- Introduzca la presión de paciente deseada con las teclas +/-.
- Introduzca el flujo de gas previsto con las teclas +/-.
- Comience con el proceso de insuflación presionando la tecla de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN
- La presión de insuflación, el flujo y el volumen del gas utilizado pueden leerse continuamente en los indicadores
- Si la presión del paciente sobrepasa durante más de 3 segundos por más de 5mmHg el valor preseleccionado, suena una señal de alarma.

