

BIOLIGHT

• Any View A5



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE

www.huv.gov.co

• Any View A5

Alarma Técnica

Botón Encendido

Indicador de
Encendido AC/Batería

Información del Paciente

BIOLIGHT

Estado de la
Batería

Estado de Fecha
Alarmas hora

Forma de Onda

Parámetros


- Iniciar o detener PANI
- Confirmar alarmas activas
- Pausar o reactivar alarmas
- Congelar Onda
- Iniciar o detener grabación

Perilla de
Mando



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE

www.huv.gov.co

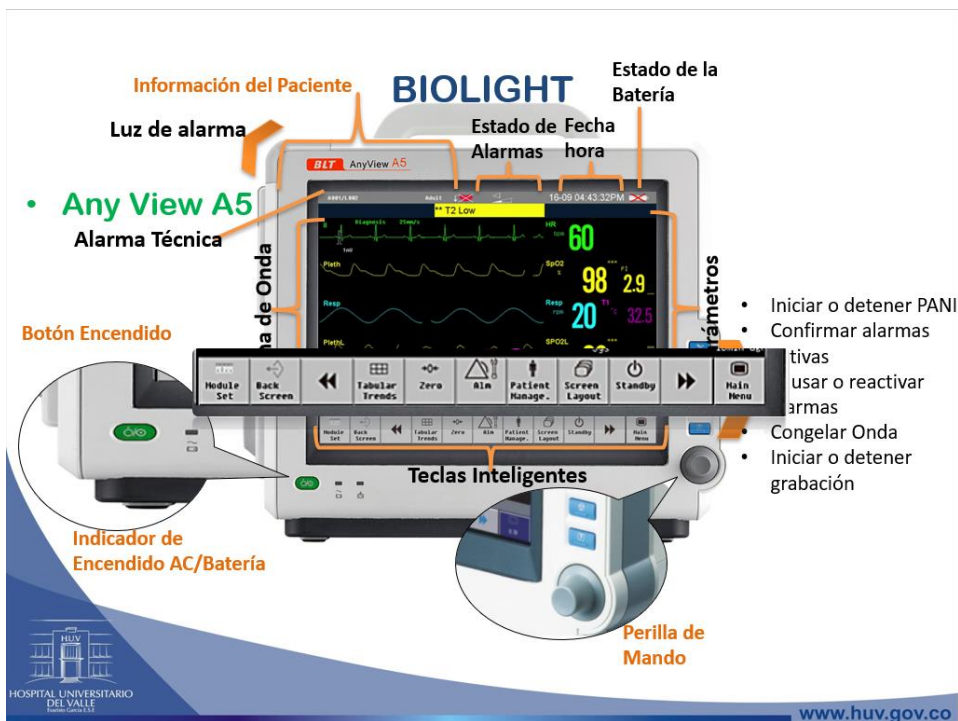

BIOLIGHT

Any View A5

PARÁMETROS

Electrocardiograma (ECG), frecuencia cardíaca (FC), frecuencia respiratorio (FR), temperatura (Temp), pulsioximetría (SpO2), frecuencia del pulso (FP), presión arterial no invasiva (PANI), presión arterial invasiva (PI). Cardiografía por impedancia (ICG), gasto cardíaco (G.C.), dióxido de carbono (CO2), ÓXIDO NITROSO (N2O), índice del estado cerebral (CSI), índice bispectral (BIS), hemoglobina total (SpHb), carboxihemoglobina (SpCO) y metahemoglobina (SpMet)

Puede seleccionar el tipo de paciente, **Adultos, pediátricos, neonatos**

ALARMAS

Categorías: Fisiológicas, técnicas, de aviso.
Niveles: Alto***, medio**, bajo*.
Para ajuste de volumen: [Menu Principal], [Config. Alarm], [Volumen Alarm]
Nivel de Alarma: Alto: "DO-DO-DO---DO-DO, DO-DO-DO---DODO" Luz titila rojo
Medio: "DO-DO-DO" Luz titila amarillo
Bajo: "DO-" Luz amarillo sin titilar
Configuración de límite de alarma: [Parametro], [Config. Alarm], [Lmt Alto] ó [Lmt Bajo]

LIMPIEZA

Mantenga el equipo y sus accesorios libres de suciedad. No utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos como acetona o cloro. Limpie el monitor con un detergente no corrosivo (no cloro). Evite el uso de alcohol. No moje el display ni los cables. Use un paño ligeramente humedecido pero no sumerja el monitor en líquidos.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

www.huv.gov.co

BIOLIGHT

Any View A5



- No retuerza ni doble los cables del sensor de saturación, ECG o manguera de presión
- No utilice el monitor ni el sensor de SpO2 durante los procedimientos de resonancia magnética
- No utilice el sensor de SpO2 en una extremidad que tenga el brazalete para medir la PANI, ni sobre un dedo con una uña pintada
- El monitor solo puede usarse con un paciente a la vez
- No utilice teléfonos celulares cerca
- No derrame líquidos sobre el monitor, podría presentarse descarga eléctrica
- Si duda de la precisión de cualquier valor mostrado en el monitor, determine los signos vitales con medios alternativos
- No confíe exclusivamente en la alarma sonora. Evite ajustar el volumen a un tono bajo. Realice control personal al paciente
- Antes de usar el equipo, verifique que no haya cables dañados.
- Desvíe todos los cables lejos de la garganta del paciente
- No utilice el equipo con anestésicos inflamables

