

## BIOLIGHT

- M8000



[www.huv.gov.co](http://www.huv.gov.co)

## BIOLIGHT

- M8000

Puertos:  
ECG, SpO<sub>2</sub>,  
NIBP,  
TEMP.

Luces indicadoras  
AC/DC, Carga.

Tapa  
batería.

Botón  
ON/OFF

Luz de  
alarma.

Ritmo cardiaco.

Saturación  
de oxígeno  
Presión  
arterial

Temp.

Perilla de  
ajuste.

Botones: Inicio, tendencia,  
detener/registrar,  
suspender/silenciar,  
NIBP/iniciar, Menú.



[www.huv.gov.co](http://www.huv.gov.co)


## BIOLIGHT

- M8000A



## BIOLIGHT

- M8000A

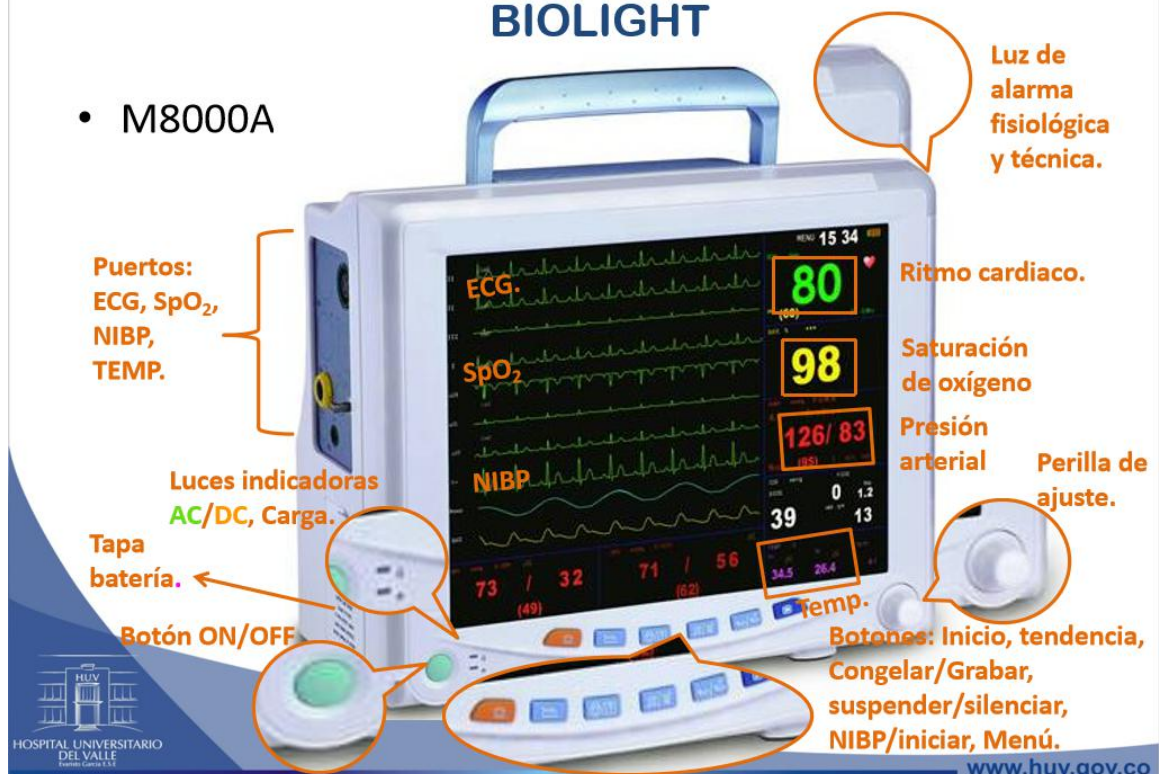



M8000

## BIOLIGHT

M8000A



### PARÁMETROS

- Temperatura corporal **T1, T2**.
- Presión arterial no invasiva **NIBP**.
- Saturación de oxígeno en la sangre **SpO<sub>2</sub>**.
- Derivación de electrocardiógrafo **ECG**.
- Onda y frecuencia respiratoria **Resp.**
- Presión arterial invasiva **IBP (opcional)**.
- Gas anestésico **AG (opcional)**.
- Concentración de oxígeno en vías respiratorias **CO<sub>2</sub> (opcional)**.

### ALARMA

Verificar la condición fisiológica del paciente y ajustar el límite de alarma de todos los parámetros fisiológicos en su menú y continuar en el rango de alarma.

### LIMPIEZA

Antes de limpiar el monitor o sensores, apagar y desconectar el equipo. Utilizar detergentes no causticos para limpiar la carcasa del monitor.

- Evitar el uso de limpiadores basados en amoníaco o acetona.
- No utilizar material abrasivo como acero o lana.
- No dejar que el producto de limpieza entre en el sistema.
- Diluir los limpiadores antes de su uso.
- No dejar agentes de limpieza en cualquier parte del equipo.

Los puntos de inserción de los cables y sondas se encuentran en el costado izquierdo. La grabadora en el costado derecho.

Nivel alto: Roja 2Hz, nivel medio: Amarillo 0.5Hz, bajo: Luz amarilla. Cuando alarmas de diferentes prioridades ocurren al tiempo, el monitor dispara la de alta prioridad.

Limpiadores recomendados por fabricante:

- Solución diluida de jabón.
- Hipoclorito de sodio diluido.
- Peróxido de hidrógeno al 3%.
  - Etanol al 70%

[www.huv.gov.co](http://www.huv.gov.co)

M8000

## BIOLIGHT

M8000A



### PRECAUCIONES



- Si el monitor está conectado a otros equipos o dispositivos eléctricos, se puede producir acumulación de fuga de corriente.
- NUNCA instale el monitor en un entorno donde el gas anestésico inflamable esté presente.
- Al realizar desfibrilación, no entre en contacto con el paciente, la cama y el monitor. Puede resultar en lesiones graves o la muerte.
- El monitor no contiene piezas que puedan ser auto-reparadas por el usuario. La reparación debe ser llevada a cabo por el personal técnico autorizado.
- Si ingresa líquido en el equipo, póngalo fuera de servicio y llame al personal técnico.
- El monitor solo puede ser utilizado para un paciente a la vez.
- Apagar el sonido de la alarma podría poner en peligro al paciente.

[www.huv.gov.co](http://www.huv.gov.co)