

BIOLIGHT


• Q3



www.huv.gov.co


BIOLIGHT

• Q3

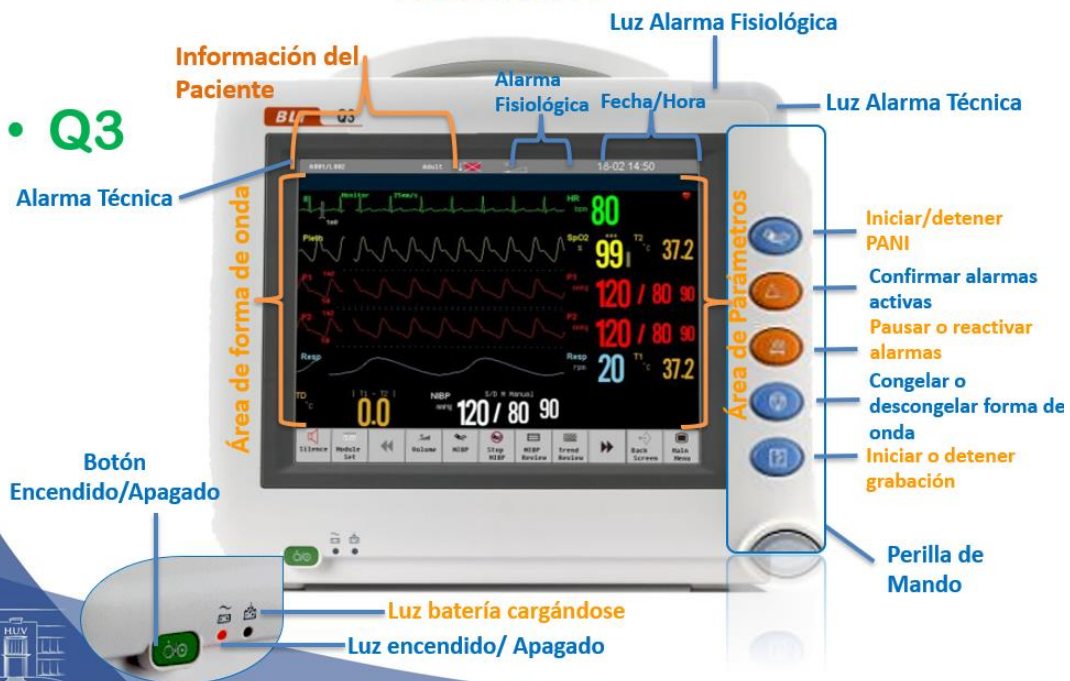

www.huv.gov.co

BIOLIGHT

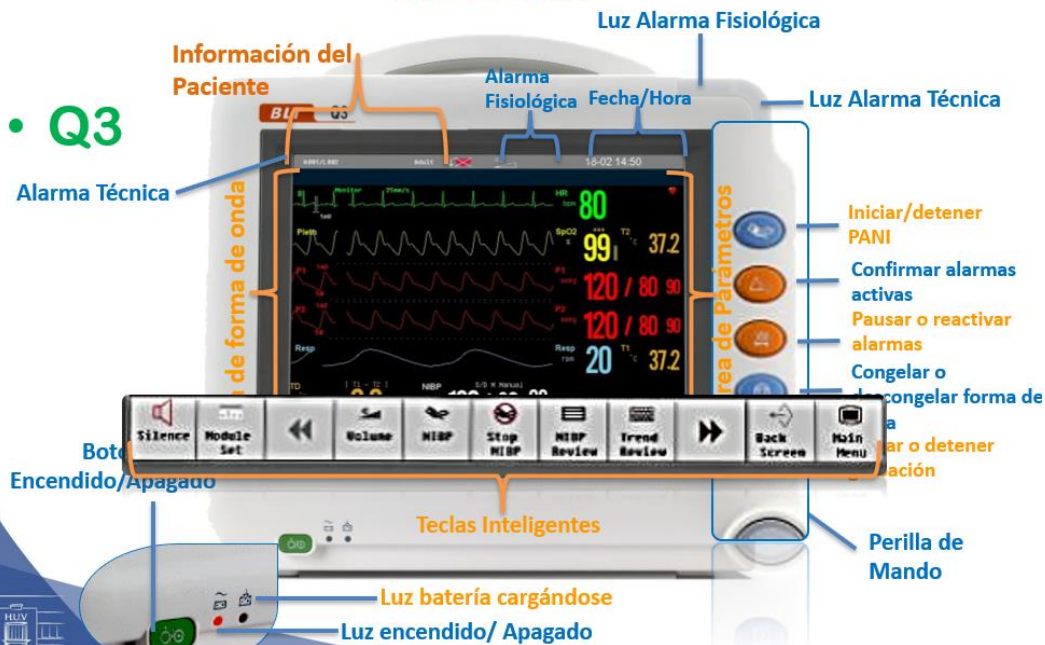

BIOLIGHT

Q3



PARÁMETROS

ECG: Modo cable de ECG: 3-deriv, 5-deriv, o 12-deriv.
Respiración
NIBP
SpO2 BLT (técnica digital)
Temperatura: Canal máximo: 8
IBP: Canal máximo: 8

Módulos opcionales:

Sidestrom CO2, Microstream CO2, Mainstream CO2, AG Módulo, C.O, IBP, Masimo SpO2, Nellcor SpO2

Puede seleccionar el tipo de paciente, **Adultos, pediátricos, neonatos**

ALARMAS

Categorías: Fisiológicas, técnicas, de aviso.
Niveles: Alto**, medio**, bajo*.
Para ajuste de volumen: **[Menu Principal], [Config. Alarm], [Volumen Alarm]**
Nivel de Alarma: Alto: "DO-DO-DO---DO-DO, DO-DO-DO---DODO" Luz titila rojo
Medio: "DO-DO-DO" Luz titila amarillo
Bajo: "DO-" Luz amarillo sin titilar
Configuración de límite de alarma: **[Parametro], [Config. Alarm], [Lmt Alto] ó [Lmt Bajo]**



LIMPIEZA

Mantenga el equipo y sus accesorios libres de suciedad. No utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos como acetona o cloro. Limpie el monitor con un detergente no corrosivo (no cloro). Evite el uso de alcohol. No moje el display ni los cables. Use un paño ligeramente humedecido pero no sumerja el monitor en líquidos.



BIOLIGHT

Q3



- No retuerza ni doble los cables del sensor de saturación, ECG o manguera de presión
- No utilice el monitor ni el sensor de SpO2 durante los procedimientos de resonancia magnética
- No utilice el sensor de SpO2 en una extremidad que tenga el brazalete para medir la PANI, ni sobre un dedo con una uña pintada
- El monitor solo puede usarse con un paciente a la vez
- No utilice teléfonos celulares cerca
- No derrame líquidos sobre el monitor, podría presentarse descarga eléctrica
- Si duda de la precisión de cualquier valor mostrado en el monitor, determine los signos vitales con medios alternativos
- No confíe exclusivamente en la alarma sonora. Evite ajustar el volumen a un tono bajo. Realice control personal al paciente
- Antes de usar el equipo, verifique que no haya cables dañados.
- Desvíe todos los cables lejos de la garganta del paciente
- No utilice el equipo con anestésicos inflamables

