


DRÄGER

- VISTA XL




DRÄGER

- VISTA XL

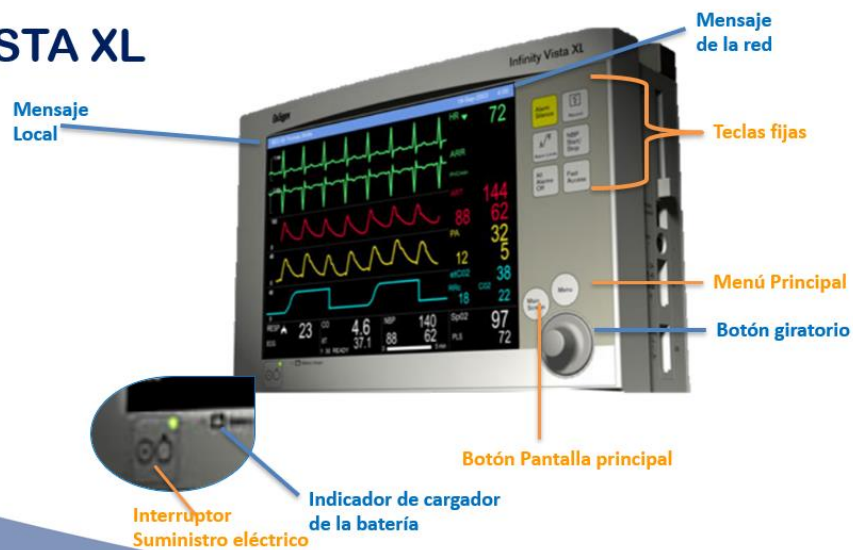

DRÄGER

• VISTA XL

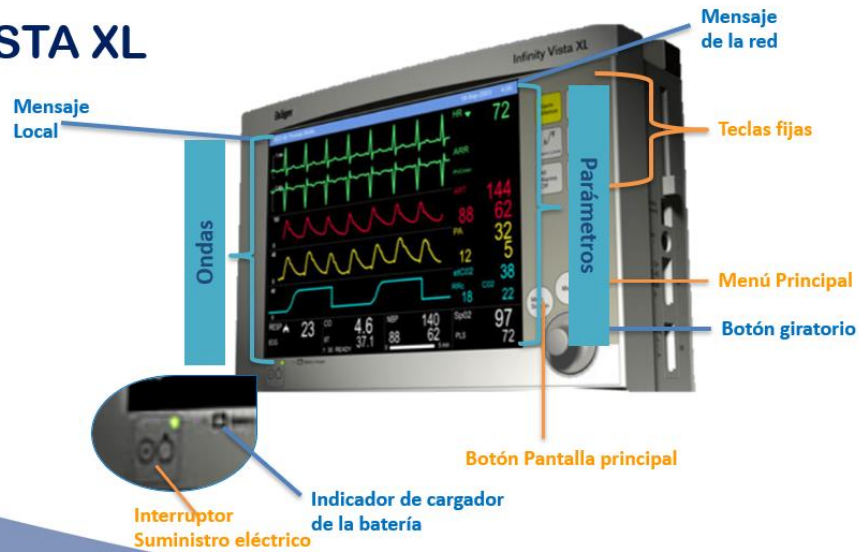

DRÄGER

• VISTA XL



DRÄGER

Vista XL



PARÁMETROS

Frecuencia cardíaca, ECG, Frecuencia respiratoria, Presión invasiva, Presión no invasiva, Arritmia, Temperatura, Gasto cardíaco, Saturación de oxígeno arterial, Frecuencia de pulso, Apnea, Análisis de segmentos ST, Análisis de segmentos ST de 12 derivaciones, FiO2

Puede seleccionar el tipo de paciente, **Adultos, pediátricos, neonatos**, con la excepción de los parámetros de gasto cardíaco, análisis de segmento ST y arritmia

[Menú], [Admitir/Dar de Alta], [Admitir], [Admitir Paciente]

[Menú], [Config. Paciente]

ALARMAS

Tres prioridades de alarma: alta (rojo), media (amarillo) y baja (blanco).

Señal de alarma visual: Colores, cuadro de parámetro de alarma parpadea, aparece mensaje con causa de alarma en la parte superior de la pantalla.

Para arreglo de alarmas: **Botón Límites de alarma.**

Histórico de alarmas: **Botón Acceso rápido, [Histórico de alarmas]**



LIMPIEZA

- Alcohol diluido, solución 1:3 de alcohol
- Solución de 1:10 de fenol de hipoclorito de sodio (lejía para uso doméstico)

No usar alcohol en display ni fenol

No sumerja ni enjuague el monitor ni sus dispositivos periféricos

Limpie los cables con un paño y solución jabonosa. Secar. Siempre proteja el conector de la humedad



www.huv.gov.co

DRÄGER

Vista XL



- No retuerza ni doble los cables del sensor de saturación, ECG o manguera de presión
- No utilice el monitor ni el sensor de SpO2 durante los procedimientos de resonancia magnética
- No utilice el sensor de SpO2 en una extremidad que tenga el brazalete para medir la PANI, ni sobre un dedo con una uña pintada
- El monitor solo puede usarse con un paciente a la vez
- No utilice teléfonos celulares cerca
- No derrame líquidos sobre el monitor, podría presentarse descarga eléctrica
- Si duda de la precisión de cualquier valor mostrado en el monitor, determine los signos vitales con medios alternativos
- No confíe exclusivamente en la alarma sonora. Evite ajustar el volumen a un tono bajo. Realice control personal al paciente
- Antes de usar el equipo, verifique que no haya cables dañados.
- Desvíe todos los cables lejos de la garganta del paciente
- No utilice el equipo con anestésicos inflamables



www.huv.gov.co