

GOLDWAY


• UT7000C



GOLDWAY

• UT7000C



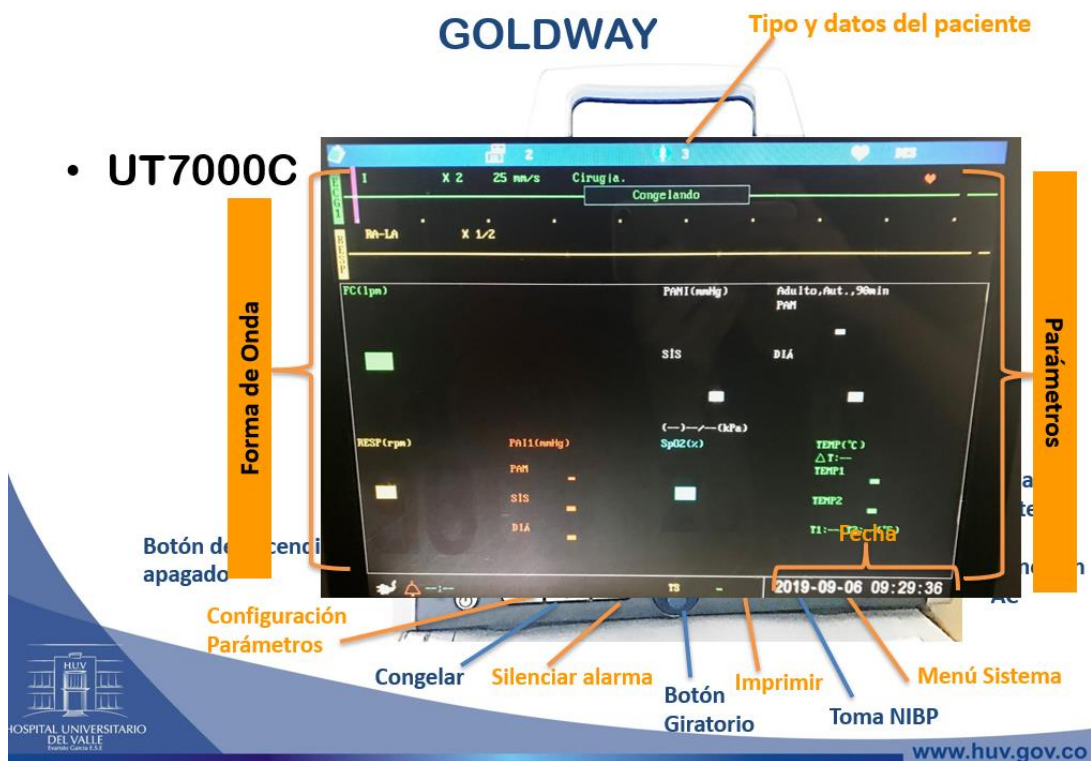

GOLDWAY

UT700C

PARÁMETROS

Electrocardiograma ECG, Análisis de arritmia y segmentos ST, respiración RESP, Saturación de oxígeno SPO2, medición de presión no invasiva NIBP, frecuencia cardíaca HR, ratio de pulso PR, temperatura TEMP

Puede seleccionar el tipo de paciente, **Adultos, pediátricos, neonatos** [Menu sistema], [Inform. Del paciente],

ALARMAS

Alarmas de taquicardia, frecuencia respiratoria, apnea, PANI, temperatura, SpO2

Límites de alarma:

- [menú], [selecciona parámetro], [Alarma, Lim Sup, Lim Inf]
- [Menu], [Sistema], [Config. Alarmas sistema], [Modo alarma]
- [Menu], [Sistema], [Config. Alarmas sistema], [Alarma ACT/DES]

LIMPIEZA

- Solución jabonosa suave
- Alcohol isopropílico (Solución en agua al 70%)
- Solución salina al 1% para sensores
- Retirar utilizando paño suave
- Secar en un lugar fresco y ventilado
- Para Desinfección: Etanol (hasta un 70%)
- Glutaraldehído (Hasta un 3,6%)

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

www.huv.gov.co

GOLDWAY

UT700C



- No retuerza ni doble los cables del sensor de saturación, ECG o manguera de presión
- No utilice el monitor ni el sensor de SpO2 durante los procedimientos de resonancia magnética
- No utilice el sensor de SpO2 en una extremidad que tenga el brazalete para medir la PANI, ni sobre un dedo con una uña pintada
- El monitor solo puede usarse con un paciente a la vez
- No utilice teléfonos celulares cerca
- No derrame líquidos sobre el monitor, podría presentarse descarga eléctrica
- Si duda de la precisión de cualquier valor mostrado en el monitor, determine los signos vitales con medios alternativos
- No confíe exclusivamente en la alarma sonora. Evite ajustar el volumen a un tono bajo. Realice control personal al paciente
- Antes de usar el equipo, verifique que no haya cables dañados.
- Desvíe todos los cables lejos de la garganta del paciente
- No utilice el equipo con anestésicos inflamables

