


GUÍA RÁPIDA MONITOR MINDRAY IMEC 10

Antes de operar el equipo asegúrese que tenga la batería instalada correctamente.

Descripción General


Vista Frontal

1. Luz de alarma
2. Pantalla de visualización
3. Interruptor de encendido y apagado
4. LED de alimentación de CA
5. LED indicador de batería.
6.  Pulsado para restablecer alarmas
7.  Pulsado para poner en pausa o restaurar alarmas
8.  Pulsado para congelar o continuar las ondas
9. Mando
10.  Menú
11.  Pulsado para iniciar o detener los registros
12.  Pulsado para iniciar o detener las mediciones de PNI

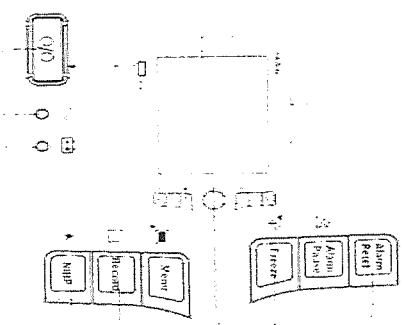

Vista Lateral

1. Registrador
2. Compartimento de la batería
3. Conector para el cable de GC 4. Salida de CO₂
4. Ranura para colector de agua de CO₂
5. Conector para el cable de (flujo lateral) ECG
6. Conector para el cable de SpO₂
7. Conector para el manguito de PNI
8. Conector para la sonda de temperatura 1
9. Conector para la sonda de temperatura 2
10. Conector para el cable de PI

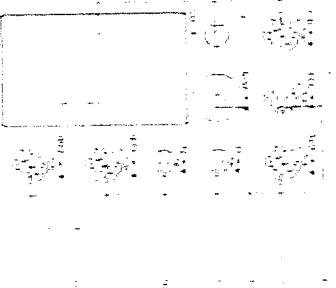

Encendido

1. Antes de empezar a realizar mediciones, compruebe el monitor del paciente en busca de cualquier daño mecánico y asegúrese de que todos los cables externos, complementarios y de accesorios se han conectado correctamente.
2. Enchufe el cable de alimentación a una fuente de alimentación de CA. Si pone en marcha el monitor de paciente con la alimentación de las baterías, asegúrese de que las baterías están suficientemente cargadas.
3. Pulse el interruptor de encendido/apagado de la parte frontal del monitor.
4. Pulse el botón Encendido/apagado para iniciar el equipo.

Ajuste de fecha y hora

1. Seleccione [Menú principal] -> [Mantenimiento >>] -> [Hora del sistema >>].
2. Ajuste la fecha y la hora.
3. Seleccione [Formato fecha] y alterne entre [aaaa-mm-dd], [mm-dd-aaaa] y [dd-mm-aaaa].
4. Seleccione [Formato hora] y [24 h] o [12 h]

Apagado del equipo

Para desconectar el monitor del paciente de la fuente de alimentación de CA, siga este procedimiento:

1. Asegúrese de que ha terminado la monitorización del paciente.
2. Desconecte los sensores y los cables del paciente.
3. Asegúrese de guardar o borrar los datos de monitorización del paciente, según sea necesario.
4. Mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado. El monitor de paciente se apagará; a continuación, puede desenchufar el cable de alimentación.

Limpieza

El equipo deberá limpiarse regularmente. Si el entorno de utilización está muy sucio o está muy expuesto a acumulaciones de polvo, el equipo deberá limpiarse con más frecuencia. Antes de limpiar el equipo, consulte la normativa del hospital para limpiar el equipo.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA MONITOR IMEC 10

Limpieza

El equipo deberá limpiarse regularmente. Si el entorno de utilización está muy sucio o está muy expuesto a acumulaciones de polvo, el equipo deberá limpiarse con más frecuencia. Antes de limpiar el equipo, consulte la normativa del hospital para limpiar el equipo.

Los agentes de limpieza recomendados son: „ lejía de hipoclorito sódico (diluida), Peróxido de hidrógeno (3%), etanol (70%), isopropanol (70%)

Para limpiar el equipo, siga estas normas:

1. Apague el monitor de pacientes y desconéctelo de la línea de alimentación.
2. Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y humedecido con limpiacristales.
3. Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el limpiador.
4. Retire toda la solución limpiadora con un paño seco después de la limpieza, si es necesario.
5. Seque el equipo en un lugar fresco y ventilado.
- 6.

Desinfección

La desinfección puede provocar daños en el equipo y, por lo tanto, no se recomienda efectuarla en este monitor de pacientes a menos que se indique lo contrario en el programa de servicios del hospital. Se recomienda limpiar el equipo antes de desinfectarlo.

Entre los desinfectantes recomendados, se incluyen: etanol al 70%, isopropanol al 70%, concentrado estándar OXY (Perform®) (solución KHSO₄).

Advertencia

Utilice únicamente las sustancias aprobadas por nosotros y los métodos incluidos en este capítulo para limpiar o desinfectar su equipo. La garantía no cubre ningún daño provocado por sustancias o métodos que no se hayan aprobado. No se ha indicado de ninguna forma la eficacia de los componentes químicos o métodos incluidos como un recurso para el control de contagio. Para informarse del método para controlar contagios, consulte con el responsable de control de contagio o epidemiología del hospital.

Precauciones

- Asegúrese de apagar el sistema y desconectar todos los cables de alimentación de las tomas antes de limpiar el equipo.
- Si derrama líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con nosotros o con su personal de servicio.
- Para limpiar o desinfectar accesorios reutilizables, consulte las instrucciones que se incluyen con los accesorios.

Para mayor información por favor diríjase al capítulo No. 23 de Manual de Usuario.