

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN

Monitor de signos vitales

Marca: Draeger

Modelo: Vista 120




El monitor vista 120 se ha optimizado para uso en entornos de atención quirúrgica, cardíaca, médica y neonatal. Permite almacenar datos de tendencias y eventos. Además, el usuario puede ver y registrar tendencias en gráficos y tablas. Su pantalla táctil a color ofrece una visualización clara de los datos del paciente y su menú de acceso rápido, teclas fijas y mando rotatorio facilitan la navegación.

Vista general del equipo




- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| A. Indicador de alarma | G. Menú |
| B. Pausa de audio | H. Botón giratorio |
| C. Medición de NIBP | I. Indicador de red eléctrica |
| D. Tendencias | J. Encender Alarma |
| E. Congelar | |
| F. Impresión | |

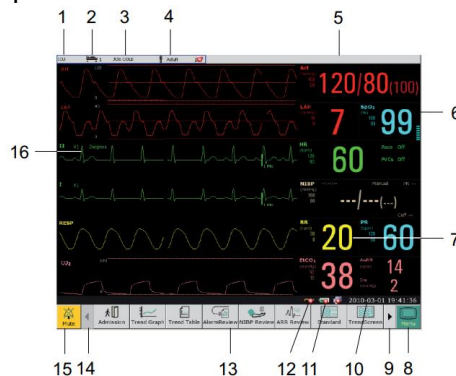


- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Departamento | 9. Desplazarse hacia la de derecha |
| 2. Número de cama | 10. Fecha y Hora |
| 3. Nombre de pacientes | 11. Estado de batería |
| 4. Tipo de paciente | 12. Fuente de alimentación AC |
| 5. Área de estado de la alarma | 13-14 Zona de teclas rápidas |
| 6. Alarma desactivada | 15. Reinicio de alarma |
| 7. Valor de medición | 16. Forma de onda de parámetro |
| 8. Menú | |

Vista lateral

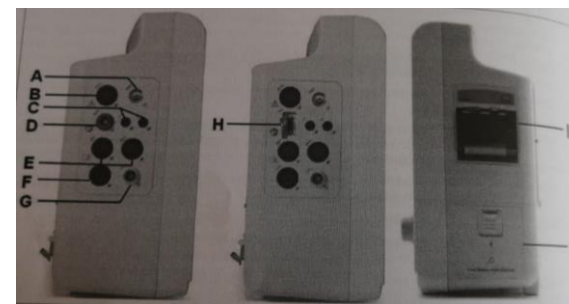


- | | |
|----------------------------|---|
| A. Puerto de NIBP | G. Puerto de EtCO2(op) |
| B. Puerto de ECG | H. Puerto de SpO2 Nellcor (op) |
| C. Puertos T1 y T2 | I. Impresora |
| D. Puerto SpO2 Draeger | J. Tapa del comportamiento de la batería (op) |
| E. Puerto IBPI e IBPI2(op) | |
| F. Puerto de C.O (op) | |

Vista posterior



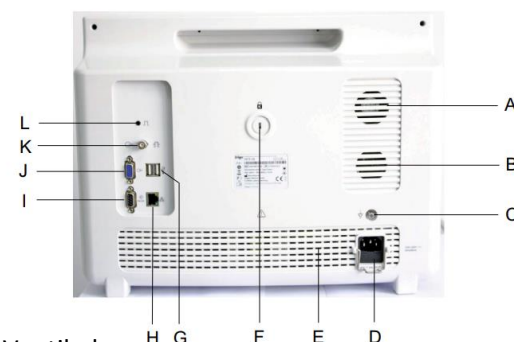


- | |
|---|
| A. Ventilador |
| B. Altavoz |
| C. Terminal de conexión a tierra |
| D. Dispositivo de seguridad |
| E. Rejilla de ventilación |
| F. Cierre antirrobo |
| G. Interfaz USB |
| H. Interfaz de red RJ45 |
| I. Interfaz RS232 |
| J. Salida VGA |
| K. Sincronización desfibrilador/ salida analógica |
| L. Puerto de llamada al personal de enfermería |

Teclas permanentes

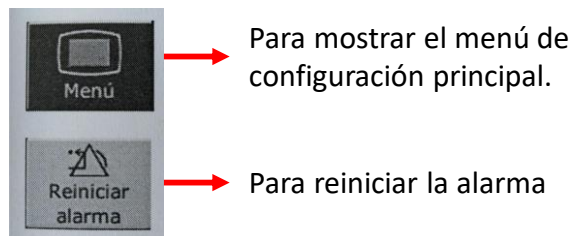

Teclas rápidas

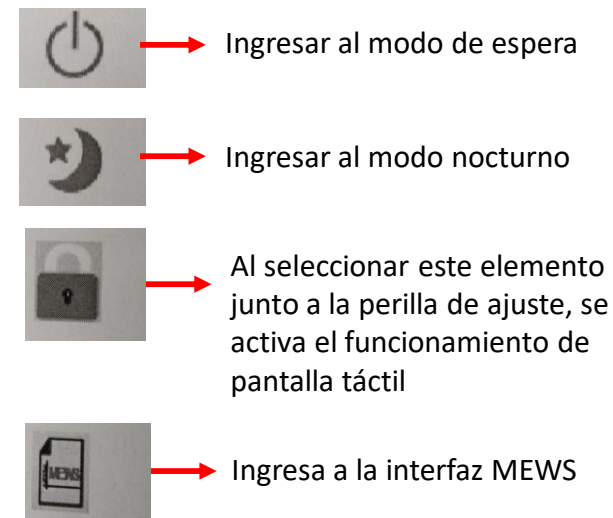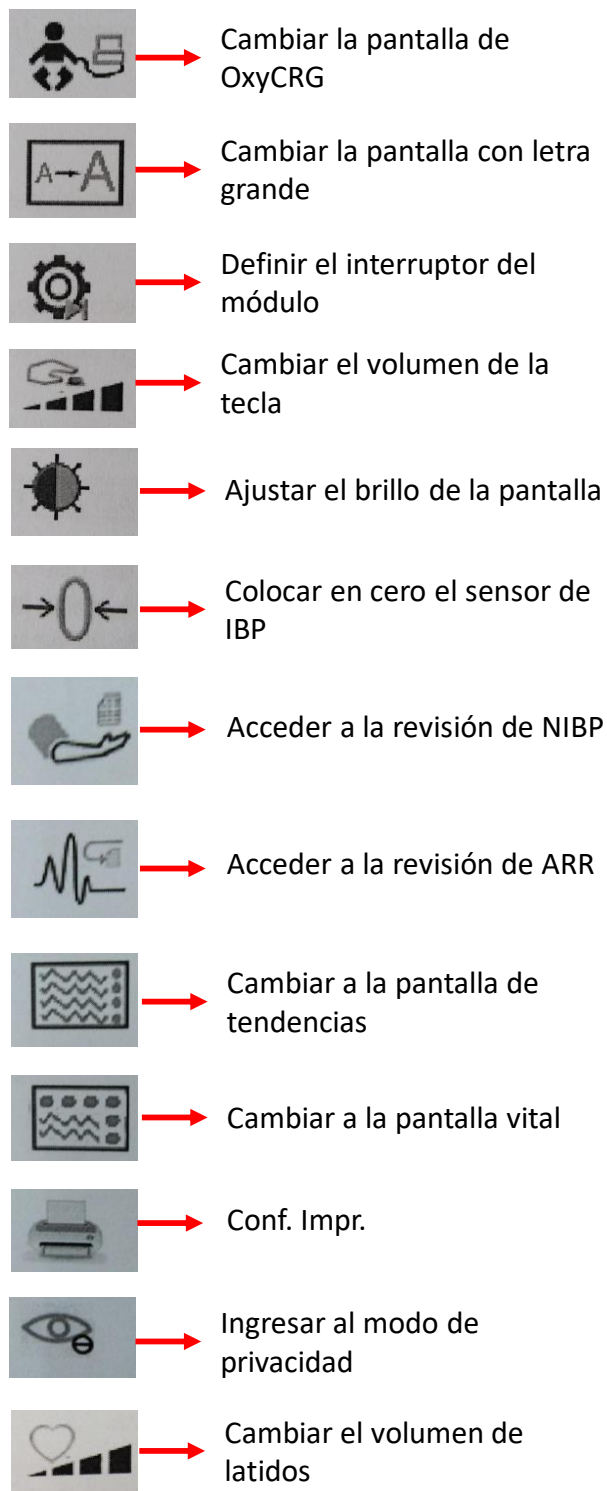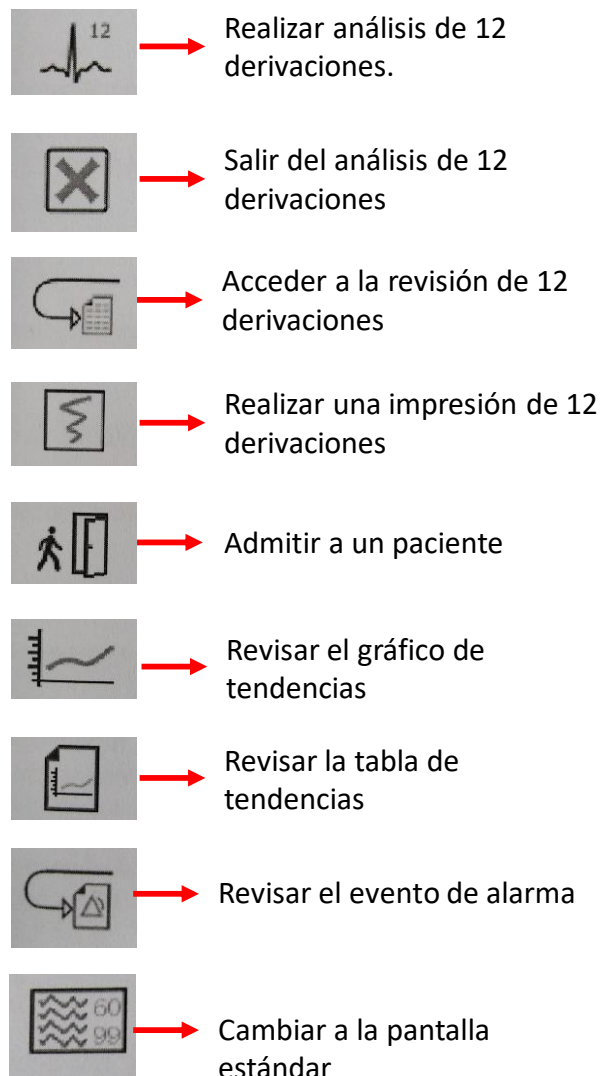

Guía rápida de operación de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina
Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

MODOS DE OPERACIÓN MONITOR DRAGUER VISTA 120

Monitorización de ECG

1. Conecte el cable Draeger de ECG o EKG al monitor.
2. Conecte los electrodos al paciente.
3. Utilice la perilla para seleccionar el parámetro a mostrar en pantalla en CONFIGURACIÓN ECG.
4. Verifique la señal del ECG en pantalla se pueden utilizar 3 o 5 electrodos seleccione **Tipo Elec** y presione **5Elec** o **3Elec**.

Visualización del Análisis de ARR (ECG)

1. Seleccione **Conf ECG > Análisis ST**.
2. **Análisis ARR**.
3. Seleccionar **Encend o Apag**
4. (Opcional) Seleccione **Conf Alarm PVCs** y seleccione **Encend** para configurar la alarma de PVCs.

Monitorización de SpO2

1. Seleccione correctamente la categoría del paciente. (Adulto/pediátrico y neonato)
2. Posicione el sensor en el sitio adecuado del dedo del paciente.
3. Posicione el conector del cable de extensión del sensor al toma de SpO2 del monitor.

Visualización del ST(ECG)

1. Seleccione **Conf ECG > Análisis ST**.
2. **Encend o Apag**.
3. Ajustar los puntos de medición girando el botón a la izquierda o derecha para mover el cursor.

Monitorización de RESP

1. Para cambiar los electrodos de monitorización de la respiración seleccione **Conf RESP** y luego **Elec RESP**.
2. Seleccione el electrodo correspondiente en la lista emergente.
3. Para cambiar el modo de cálculo seleccione **Conf RESP, TipoFijac** en modo **Manuel o Auto**.

Monitorización de TEMP

1. Conecte el cable de temperatura al monitor
2. Conecte la sonda al cable de ser necesario
3. Aplique la sonda de temperatura al paciente
4. Encienda el monitor (tarda aprox. 5 minutos)

Monitorización de NIBP

1. Asegure la posición del paciente apoyando espalda y brazos , se debe encontrar sentado sin cruzar las piernas y deberá tener los pies apoyados en el suelo.
2. Asegure que la parte central del brazalete indicado con la marca correspondiente se encuentre a nivel de la aurícula derecha.
3. Para iniciar, conecte el tubo de aire a la salida del monitor y encienda en monitor.
4. Asegúrese que el brazalete esté desinflado completamente.
5. Conecte el brazalete al tubo de aire.
6. Compruebe el modo paciente en **Conf Paciente**.
7. Seleccione en el menú **Conf NIBP** para indicar un modo de medición.
8. Pulse el botón del panel frontal para iniciar la medición. 

Guía rápida de operación de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina
Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA

Monitor de signos vitales Vista 120 Draeger

Recomendaciones:

- Mantenga el monitor, cables y accesorios libres de polvo y suciedad.
- Utilice solo implementos recomendados en esta guía.
- Salvo se indique lo contrario no sumerja ningún componente del monitor en ningún líquido.
- No permita que el líquido se filtre en la carcasa.
- Inspeccione el monitor y accesorios reutilizables después de terminar la limpieza.

IMPLEMENTOS: Detergente neutro, etanol al 75%, isopropanol al 70%, paños suaves.



Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos

Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina
Ext. 1250

Realizado por: Dahyana Morales y
Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

PARTES / ACCESORIOS	LIMPIEZA
Monitor	• Apague y desconecte el monitor, limpie con un paño suave humedecido con la solución hasta no ver contaminantes. • Al terminar limpie el monitor con nuevos paños humedecido con agua de grifo hasta eliminar la solución ; por último seque el monitor en un lugar fresco y ventilado.
Cables ECG	• Limpiar el conjunto de cables con un paño humedecido con la solución de limpieza. • Luego limpiar el conjunto con nuevos paños humedecidos con agua de grifo hasta eliminar la solución; Por último limpie los cables con un paño seco y deje secar al aire
Manguito de presión Arterial	• Extraiga la cámara de aire antes de proceder, lave la mano del manguito con un paño humedecido con la solución de limpieza. • Luego limpie el manguito con paños nuevos humedecidos con agua de grifo; por último límpielo con un paño seco y deje el manguito al aire libre
Sensor de SpO2	• Limpie la superficie del sensor con un paño suave humedecido con la solución de limpieza. • Limpie la zona de contacto con el paciente con un bastoncillo de algodón. • Retire la solución de limpieza con paños suaves nuevos humedecidos con agua de grifo • Limpie el sensor con un paño seco y deje secar al aire libre.
Sensor de TEMP	• Limpie zona de contacto con el paciente con paños suaves humedecidos con la solución de limpieza. • Retire la solución con paños suaves nuevos humedecidos con agua de grifo • Limpie con un paño seco la humedad residual y deje secar al aire libre.

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS

Monitor de signos vitales Draeger Vista120



Recomendaciones:

- No usar accesorios o combinación de dispositivos que no cumplan con los requisitos de seguridad del proveedor para evitar posibles fallas.
- El equipo NO se encuentra apto para funcionar en áreas con peligro de explosión.
- Equipos de comunicaciones por radiofrecuencias se deben utilizar a 30 cm como mínimo de cualquier componente del Vista 120 Draeger

Alarma/Mensaje	Causa	Acción a Realizar
Apag Elec: ECG, LL,LA,RA,V	• El electrodo se ha desprendido de la piel de paciente. • El electrodo se da soltado del monitor.	• Asegúrese que todos los electrodos se encuentran conectados tanto al paciente como al monitor.
Falla Comunica ECG	• Falla de comunicación o del módulo de ECG.	• Comunicarse con el personal técnico y detenga la medición
Falla Comunica RESP	• Falla de comunicación o del módulo de RESP.	• Comunicarse con el personal técnico y detenga la medición
SONIDO RESP	• No se puede medir RR debido al movimiento del paciente	• Comprueba la conexión del electrodo y el estado de su paciente.
Apag Sensor SpO2	• Es posible que el sensor de SpO2 se haya desconectado del paciente o del monitor.	• Compruebe que el sensor se encuentra correctamente conectado al paciente.
Err Sensor SpO2	• Funcionamiento incorrecto del sensor de SpO2 o en el cable de propagación.	• Reemplace el sensor o cable de propagación.
Falla de comunicación SpO2	• Falla de comunicación o del módulo de SpO2.	• Comunicarse con el personal técnico y detenga la medición
Falla de comunicación NIBP	• Falla de comunicación o del módulo de NIBP.	• Comunicarse con el personal técnico y detenga la medición

Alarma/Mensaje	Causa	Acción a Realizar
Fuga NIBP	La bomba, la válvula el manguito o el tubo de NIBP tienen una fuga.	Compruebe el ajuste de las conexiones del manguito
Sobrepresión NIBP	La presión supera el límite de seguridad.	Repita la medición , si el error continua detenga la medición y llama al personal técnico.
Anomalía presión sist. NIBP	Presión atmosférica o presión del sistema anormales. La válvula está obstruida y el desinflado no es posible.	Compruebe si la vía respiratoria está obstruida o si el sensor de presión funciona correctamente. Si el problema persiste póngase en contacto con el personal técnico.
Manguito NIBP suelto	Falla del manguito o no está correctamente conectado	Vuelva a conectar el manguito
Apag Sensor: TEMP T1, TEMP T2	Es posible que el sensor T1 o T2 se encuentra desconectado	Asegure la conexión correcta de los cables.
Excedida: T1, T2	El valor de medición de sensor TEMP1 o TEMP2 ha superado el rango.	Compruebe la conexión del sensor y el estado del paciente.
Fallo de Calibración: T1, T2	No se ha podido calibrar T1 o T2.	Detenga la medición y comuníquese con el personal técnico.
Falla de comunicación TEMP	Falla del modulo de TEMP.	Detenga la medición y comuníquese con el personal técnico.

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
 Hospital Universitario del Valle
 Departamento de electromedicina Ext. 1250
 Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
 Universidad Autónoma de Occidente