


Guía Rápida Monitor Mindray iMEC 8

Antes de operar el equipo asegúrese que tenga la batería instalada correctamente.

Descripción General


Vista Frontal

1. Luz de alarma
2. Pantalla de visualización
3. Interruptor de encendido y apagado
4. LED de alimentación de CA
5. LED indicador de batería
6.  Púselo para restablecer alarmas
7.  Púselo para poner en pausa o restaurar alarmas
8.  Púselo para congelar o continuar las ondas
9. Mando
10.  Menú
11.  Púselo para iniciar o detener los registros
12.  Púselo para iniciar o detener las mediciones de PNI

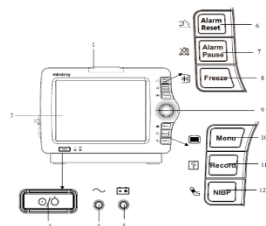

Vista Lateral

1. Registrador
2. Compartimento de la batería
3. Conector para el cable de GC 4. Salida de CO2
4. Ranura para colector de agua de CO2
5. Conector para el cable de (flujo lateral) ECG
6. Conector para el cable de SpO2
7. Conector para el manguito de PNI
8. Conector para la sonda de temperatura 1
9. Conector para la sonda de temperatura 2
10. Conector para el cable de PI

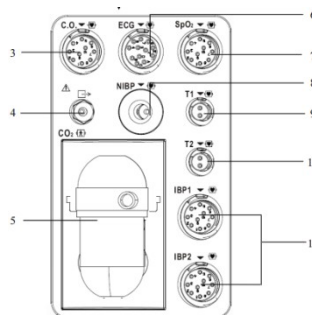

Encendido

1. Antes de empezar a realizar mediciones, compruebe el monitor del paciente en busca de cualquier daño mecánico y asegúrese de que todos los cables externos, complementarios y de accesorios se han conectado correctamente.
2. Enchufe el cable de alimentación a una fuente de alimentación de CA. Si pone en marcha el monitor de paciente con la alimentación de las baterías, asegúrese de que las baterías están suficientemente cargadas.
3. Pulse el interruptor de encendido/apagado de la parte frontal del monitor.
4. Pulse el botón Encendido/apagado para iniciar el equipo.

Ajuste de fecha y hora

1. Seleccione [Menú principal] -> [Mantenimiento >>] -> [Hora del sistema >>].
2. Ajuste la fecha y la hora.
3. Seleccione [Formato fecha] y alterne entre [aaaa-mm-dd], [mm-dd-aaaa] y [dd-mm-aaaa].
4. Seleccione [Formato hora] y [24 h] o [12 h]

Apagado del equipo

Para desconectar el monitor del paciente de la fuente de alimentación de CA, siga este procedimiento:

1. Asegúrese de que ha terminado la monitorización del paciente.
2. Desconecte los sensores y los cables del paciente.
3. Asegúrese de guardar o borrar los datos de monitorización del paciente, según sea necesario.
4. Mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado. El monitor de paciente se apagará; a continuación, puede desenchufar el cable de alimentación.

Limpieza

El equipo deberá limpiarse regularmente. Si el entorno de utilización está muy sucio o está muy expuesto a acumulaciones de polvo, el equipo deberá limpiarse con más frecuencia. Antes de limpiar el equipo, consulte la normativa del hospital para limpiar el equipo.