

VENTILADOR MECANICO ETERNITY SH300



UB SAS



ETERNITY 易世恒

SISTEMA DE ARRANQUE

1. CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN A LA TOMA CORRIENTE. VISUALICE LA LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO

FIGURA 4 INDICADOR DE CARGA



2. PRESIONE EL INTERRUPTOR EN ENCENDIDO. LA PANTALLA SE ENCIENDE Y MUESTRA INICIO EN INTERFAZ

FIGURA 5 INTERFACE CARGA DE SISTEMA



FIGURA 6 INTERFACE CONFIGURACIÓN DE PACIENTE

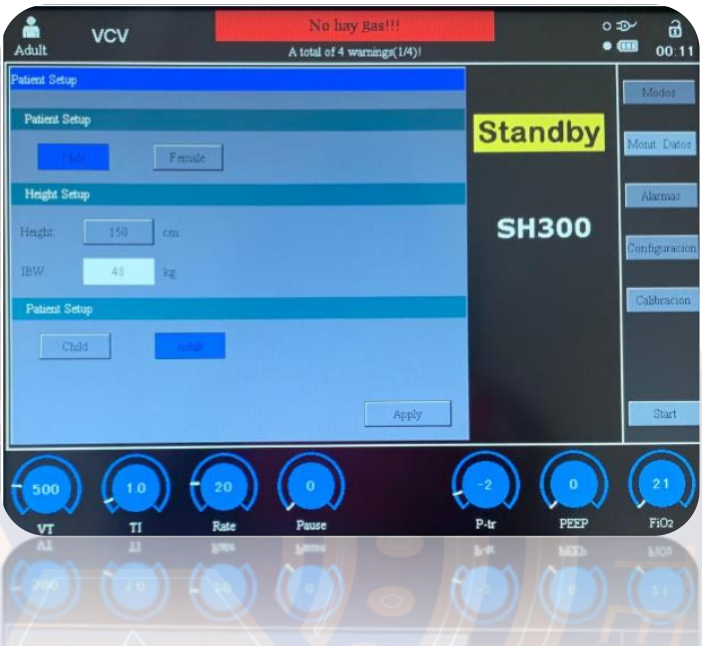



FIGURA 7 INTERFACE INICIAL



3. CONFIGURACIÓN DEL PACIENTE. REALICE LA SELECCIÓN DE LOS DATOS DEL PACIENTES Y PRESIONE LA TECLA APLICAR PARA CONFIRMAR Y VOLVER A LA INTERFAZ.

4. UNA VEZ INGRESADOS LOS DATOS ANTERIORES RETORNAR A LA INTERFAZ PRINCIPAL.

**FIGURA 1 VISTA
FRONTAL VENTILADOR**

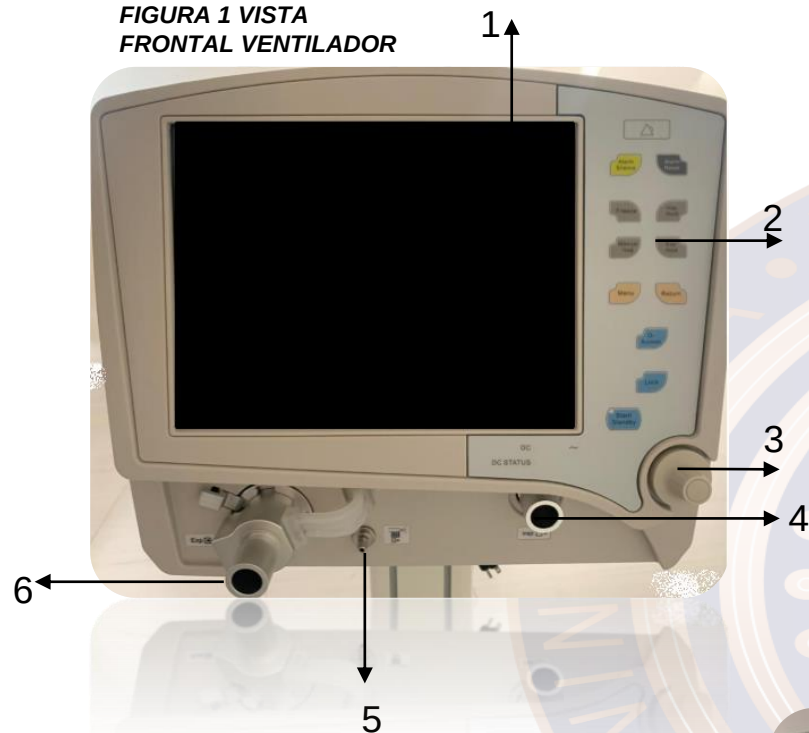

VISTA FRONTAL

1. PANTALLA TÁCTIL PARA VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN EQUIPO, PACIENTE, MODOS VENTILATORIOS, ONDA DE MONITOREO.

2. CONTROL Y CONFIGURACIÓN DE MODOS Y PARÁMETROS

3. PERILLA DE SELECCIÓN

4. PUERTO INSPIRATORIO

5. NEBULIZADOR

6. MODULO DE VÁLVULA ESPIRATORIA

PANTALLA LCD

1. MENÚ BARRA LATERAL
2. PARÁMETROS DE MONITOREO INTERFAZ PRINCIPAL: MV, VTE, PEEP, FIO2, NIVEL INFERIOR CONFIGURACIÓN DE ALARMA.
3. BARRA INFERIOR PARÁMETROS DE VENTILACIÓN
4. TIPOS DE ONDA SEGÚN CONFIGURACIÓN
5. BARRA DE INFORMACIÓN PERMITE VISUALIZAR MODO PROGRAMADO Y ALARMAS



FIGURA 2 PANTALLA LCD

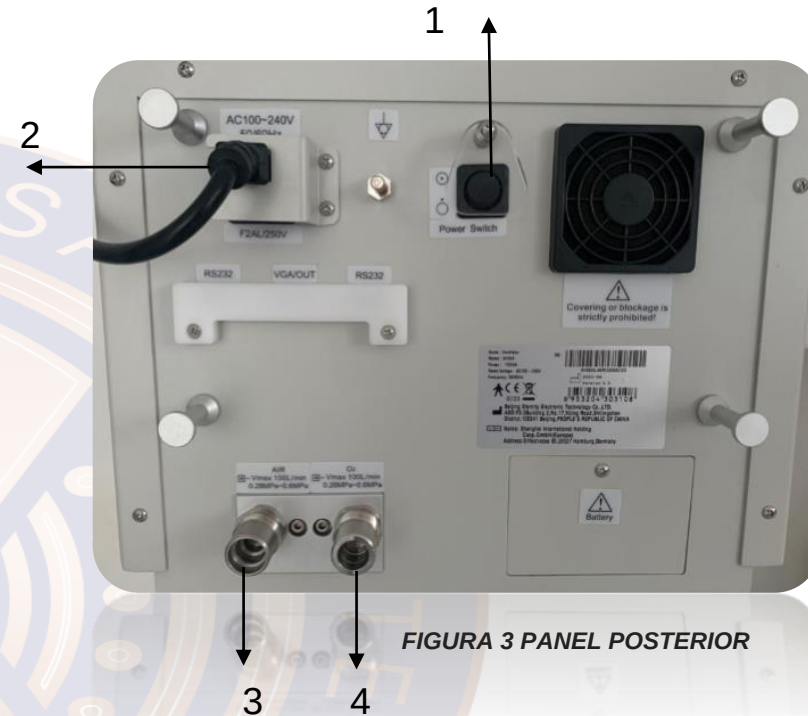


FIGURA 3 PANEL POSTERIOR


PANEL POSTERIOR

1. INTERRUPTOR ENCENDIDO Y APAGADO
2. CONEXIÓN CABLE AC
3. ENTRADA DE O2
4. ENTRADA DE AIRE

ESTRUCTURA

CONFIGURACIÓN DE MODO VENTILATORIO


FIGURA 8 CONFIGURACIÓN DE MODOS 1

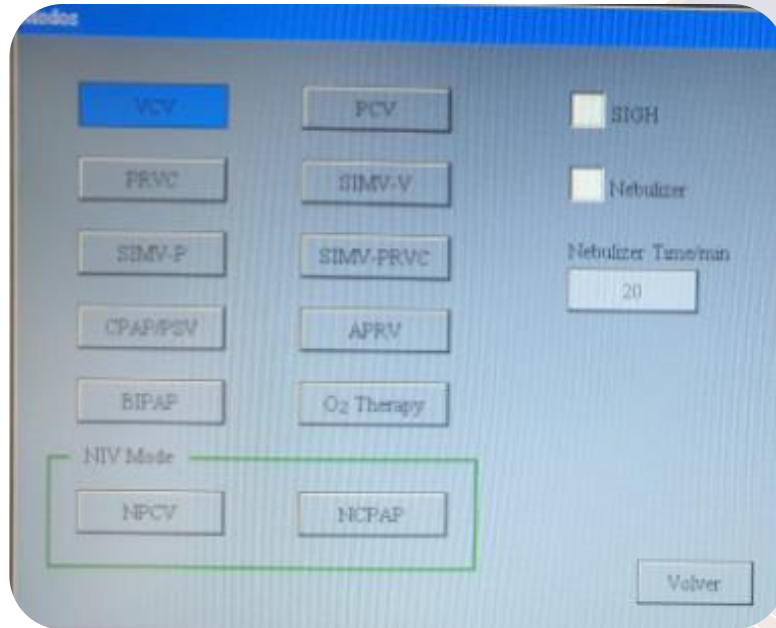

1. CONFIGURACIÓN DE MODOS. GIRE LA ERILLA O TOQUE LA PANTALLA. SELECCIONE “MODOS” EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESQUINA DERECHA DE LA PANTALLA. EL MENÚ DEL MODO SE EVIDENCIA EN LA PANTALLA.

ENCONTRARÁ LOS DIFERENTES MODOS DE VENTILACIÓN Y OPCIÓN DE NEBULIZACIÓN

FIGURA 9 INTERFACE DE PARAMETROS 2

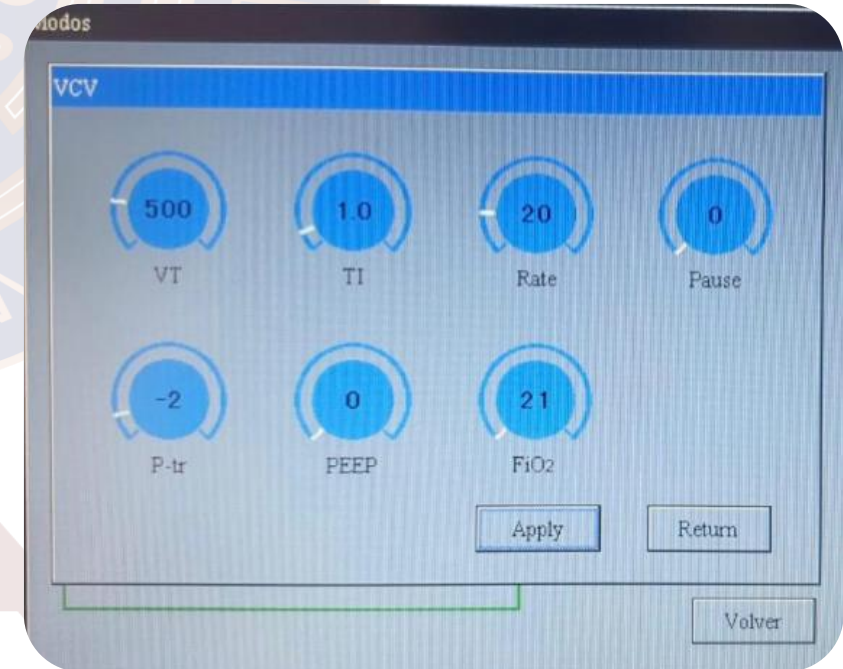

2. INTERFACE DE PARAMETRO. GIRE LA PERILLA Y SELECCIONE EL PARÁMETRO EN EL VALOR REQUERIDO POR DEMANDA DEL PACIENTE. PRESIONE “APLICAR” Y REGRESE A LA INTERFAZ INICIAL.

FIGURA 10 HUMIDIFICADOR Y RESERVORIO

1. RESERVORIO. AJUSTE EL RESERVORIO SOBRE LA BASE DEL HUMIDIFICADOR.

2. HUMIDIFICADOR: CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE Y PULSE EL INTERRUPTOR, EVIDENCIE EL INDICADOR DE ENCENDIDO EN EL EQUIPO



CAMARA DE HUMIDIFICACIÓN

CIRCUITO PARA CONEXIÓN DE VENTILADOR Y HUMIDIFICADOR A PACIENTE. CIRCUITO PACIENTE, TRAMPA DE AGUA Y PIEZA EN "Y"

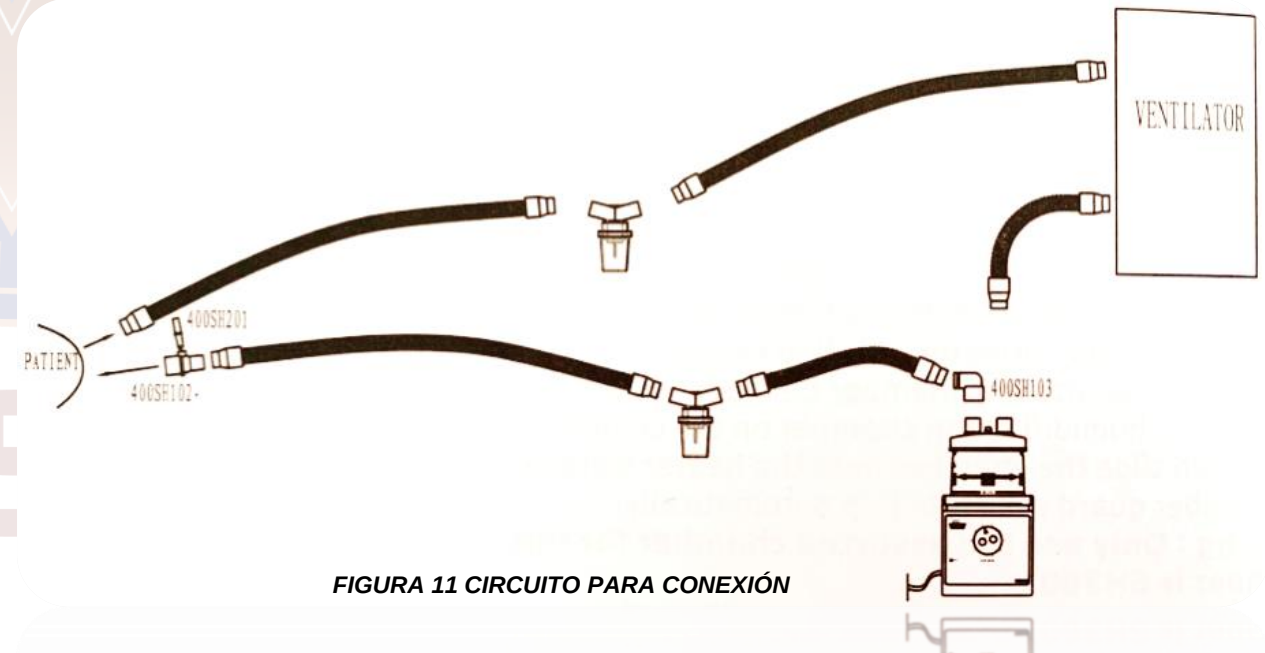


FIGURA 11 CIRCUITO PARA CONEXIÓN

COMPRESOR

INSTRUCCIONES

1. VERIFIQUE CONEXIÓN DEL COMPRESOR A FUENTE DE ALIMENTACIÓN
2. COMPRUEBE LA CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE AIRE
3. ENCIENDA EL EQUIPO Y VERIFIQUE EL INDICADOR
4. ESPERE QUE EL MANÓMETRO SE RESTABLEZCA E INDIQUE FLUJO DE AIRE 0.4 – 0.5MPA

FIGURA 12 PANEL POSTERIOR


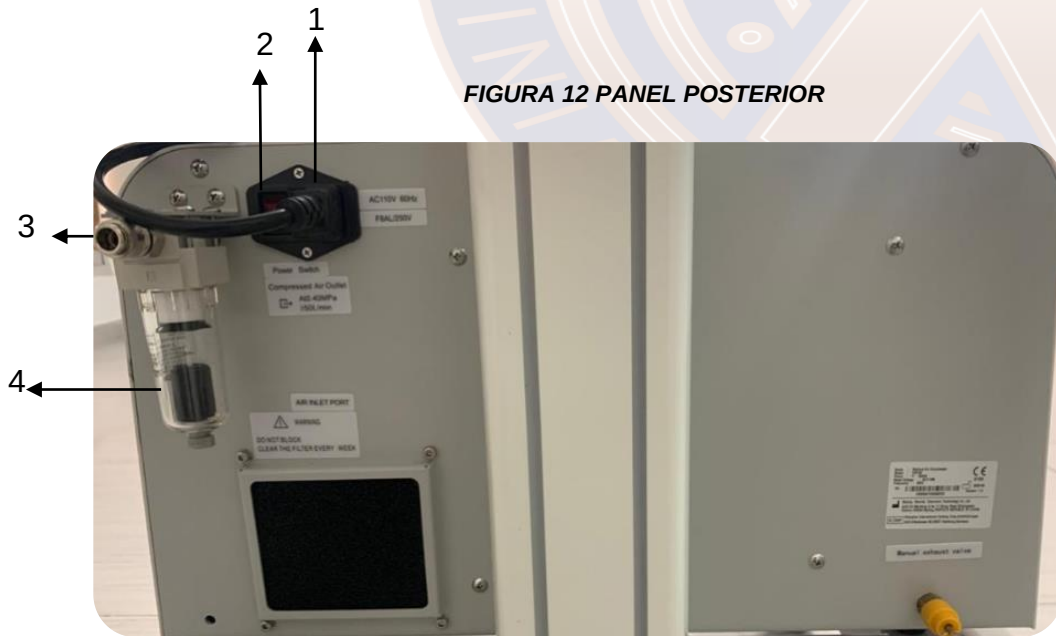


FIGURA 13 PANEL DE MONITOR

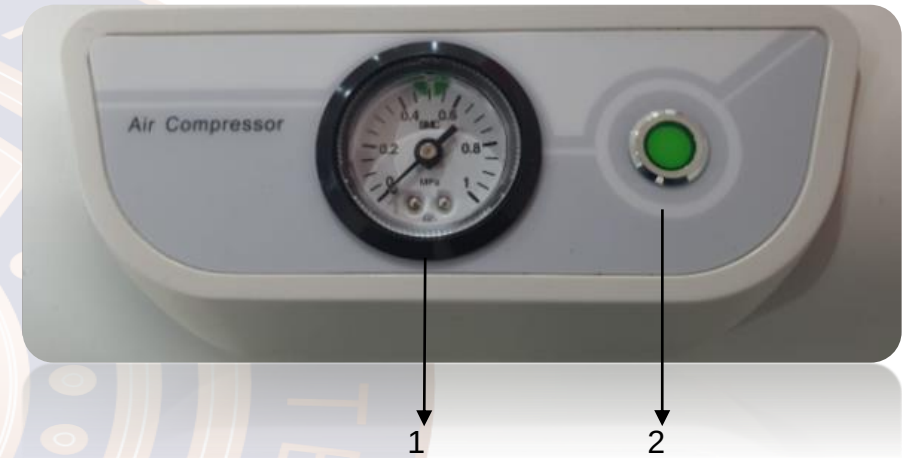

1. MANÓMETRO DE PRESIÓN
2. LED INDICADOR DE ENCENDIDO

1. CABLE DE PODER
2. TRAMPA DE AGUA
3. CONEXIÓN MANGUERA DE AIRE
4. INTERRUPTOR ENCENDIDO Y APAGADO