

EG-530FP SERIES

VIDEO GASTROSCOPIO

FUJIFILM

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO

Esta guía rápida
contiene información
importante para el
manejo adecuado y
limpieza de los
endoscopios EG-530
series marca FUJIFILM.

JOMEDICAL S.A.S.
Carrera 7 # 124-25
Bogotá, Colombia.

www.jomedical.com

PBX: 6375177

Fax: 6295958

Uso destinado

Este equipo es un Endoscopio medicinal para el tracto digestivo superior. Se utiliza para la observación, diagnóstico y tratamiento endoscópico del esófago, estómago y bulbo duodenal en instituciones hospitalarias bajo el control de los médicos.

Este producto tiene la capacidad para la ampliación óptica de imágenes. En el modo de ampliación, el rango de observación es muy pequeño y el enfoque en las vistas intermedia y distante se ve borroso. Se debe utilizar la posición de enfocado normal para llevar a cabo observaciones y/o tratamientos en vistas intermedias y distantes.

Durante la Operación del Endoscopio

- El Endoscopio es un instrumento de precisión. La aplicación de una fuerza o impacto anormal sobre la parte de inserción, parte flexible o en el extremo distal puede lesionar el interior del paciente o dañar el instrumento. Al encontrar cualquier resistencia, deberá insertarse lentamente. No forzar la introducción. No inserte ni doble el Endoscopio sin asegurar el área de visión en el monitor.

- Al sujetar el Endoscopio, sosténgalo por la parte de control. Al manipularse por la parte de inserción o parte flexible del conductor de luz, se hace difícil sostener y puede ejercerse una fuerza anormal causando falla del instrumento.

- Utilizar guantes de caucho durante la manipulación del Endoscopio para prevenir cualquier infección o cargas estáticas.

Ambiente adecuado de trabajo


Temperatura: +10 a +40°C
Humedad relativa: 30 a 85% Nota
Presión atmosférica: 70 a 106 kPa

DESCRIPCIÓN DE PARTES DEL EQUIPO

Parte de control


La parte de control consta de una empuñadura para la sujeción del Endoscopio.

También contiene las partes para la operación del Endoscopio.

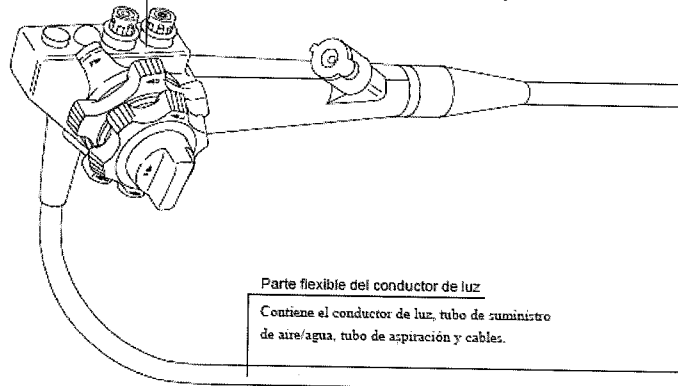

Parte flexible del conductor de luz

Contiene el conductor de luz, tubo de suministro de aire/agua, tubo de aspiración y cables.

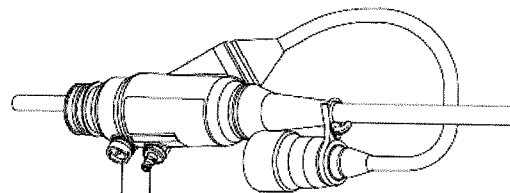


Conector del agua de alimentación

Conecta el tanque de agua.


Conector de ventilación

Conecta el verificador de estanqueidad o adaptador de ventilación.

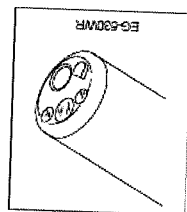

Vista ampliada del extremo distal

* Parte de inserción
Esta parte se inserta en las cavidades del cuerpo y contiene el extremo distal de la parte curva y la parte flexible.

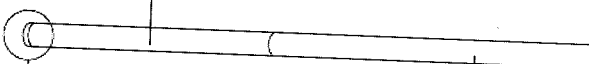


Parte curva *

Doblar esta parte con la palanca de la parte de control.

Extremo distal *
Contiene el lente objetivo, las boquillas de aire/agua, el conducto del forpaz, etc. El suministro de aire/agua y la aspiración se controla con los botones de la parte de control.

Parte flexible *
Conecta la parte curva y la parte de control. El Endoscopio puede insertarse dentro de la cavidad del cuerpo hasta esta parte.

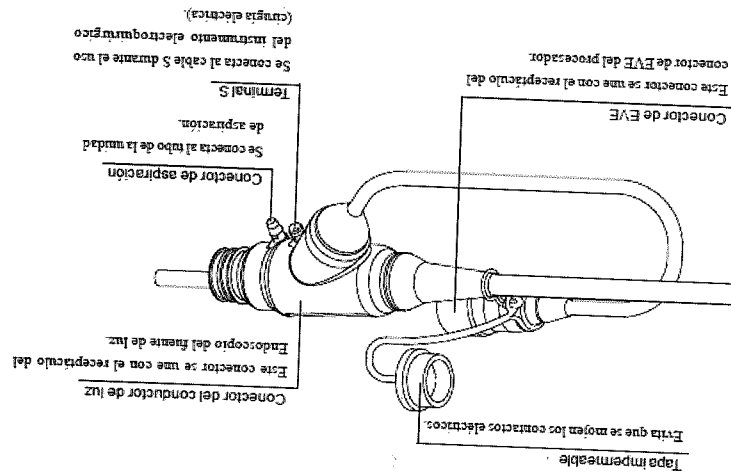

GUÍA DE REPROCESAMIENTO

[Nota:] Este producto no está esterilizado. Al usarse el equipo por primera vez, deberá realizarse la desinfección o la esterilización apropiada para la aplicación.

Para realizar un reprocesamiento efectivo del endoscopio se debe realizar Lavado Preliminar (realizado al costado de la cama inmediatamente después del uso del Endoscopio), el cual consta de:

- Secado y limpieza exterior de la parte de inserción
- Lavado del canal aire/agua (con aire y líquido de limpieza)
- Desmontaje del endoscopio de la unidad de procesamiento

Después de realizado el proceso de lavado preliminar se debe seguir el procedimiento de desinfección y/o esterilización descrito en el manual de limpieza y desinfección del endoscopio.

GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO

- (1) Si aparecen problemas, vuelva a revisar el manual por si eventualmente pueda resolverse el problema.
- (2) Si el problema persiste, por favor, contáctese con su distribuidor local.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

- Nombre del modelo: EG-530 SERIES

[Nota]: para información detallada de cada una de las partes y funciones del equipo remítase al manual de operación

METODO DE USO

- Prepare los accesorios y dispositivos a utilizar. Ej. Fórceps, tanque de agua, etc.
- Cuando se requiera mantener el endoscopio a una distancia adecuada del objeto de estudio en un enfoque cercano durante el procedimiento, debe prepararse y montar una cubierta según lo descrito en el manual de operación del equipo.
- Conecte la energía de la fuente de luz y encienda la lámpara de acuerdo a las instrucciones detalladas en el manual de usuario de la fuente de luz.
- Enchufar el conector del tanque de agua en la conexión de suministro de agua del endoscopio
- Antes de realizar cualquier procedimiento realice una verificación física de la parte de inserción y verifique la angulación e irrigación del equipo. Si encuentra alguna anomalía suspenda el muso del dispositivo y solicite verificación por el personal técnico.
- Coloque al paciente de forma adecuada siguiendo los protocolos de su compañía.
- Inserte el extremo distal del endoscopio desde la cavidad oral hacia la faringe observando en todo momento la imagen.
- Cierre el orificio central del botón aire/agua con el dedo para suministrar aire al tracto digestivo (se recomienda la utilización de gas CO₂ endoscópico)
- Dirija el extremo distal del endoscopio hacia el lugar de la biopsia y realice el procedimiento requerido
- Este producto tiene la capacidad para la ampliación óptica de imágenes, por lo cual se sugiere leer detenidamente el manual de operación del equipo.
- Endurezca la parte curva del endoscopio hasta que quede casi recta accionando las perillas de control de Angulo.
- Extraiga lentamente el endoscopio