


Vista posterior

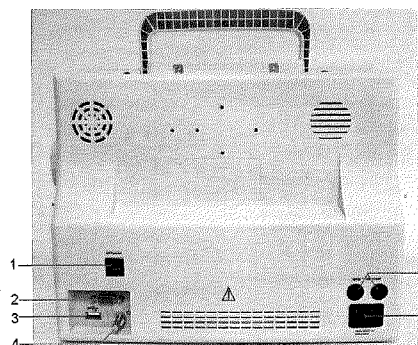

- 1 Interfaz de red
- 2 VGA (opcional)
- 3 Puerto USB
- 4 Terminal de conexión a tierra equipotencial
- 5 Caja de fusibles
- 6 Toma del cable de alimentación

NOTA:


- 1 Antes de comenzar la medición de NIBP, especifique el tipo de paciente en **MENÚ DEL SISTEMA>PROGR PACIENTE**. El tipo incorrecto puede generar mediciones imprecisas o lesiones graves. Ingrese **AJUSTAR NIBP >INTERVALO** para especificar el intervalo para la modalidad automática.
- 2 Si la onda ECG aparece de forma intermitente o si hay interferencia evidente en las señales de ECG, limpie cuidadosamente la piel y escoja electrodos efectivos.
- 3 El dispositivo debe conectarse a masa para evitar señales de interferencia.
- 4 Tenga cuidado al insertar el papel. Evite dañar el cabezal de impresión termosensible. No deje la tapa de la impresora abierta a menos que esté insertando papel o solucionando un problema.
- 5 Si no utiliza el dispositivo durante un tiempo prolongado, cárguelo una vez por mes.




4 / 4

P/N: 01.54.457654
MPN: 01.54.457654010

Vista frontal

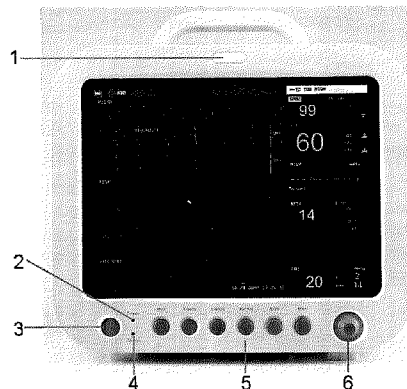

- 1 Indicador de alarma
- 2 Indicador de alimentación
- 3 Interruptor de encendido/apagado
- 4 Indicador de carga
- 5 Botones
- 6 Perilla de ajuste

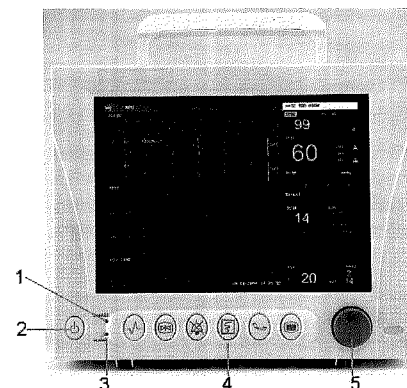

- 1 Indicador de carga
- 2 Interruptor de encendido/apagado
- 3 Indicador de alarma
- 4 Botones
- 5 Perilla de ajuste

1 / 4

Las funciones de los botones del panel frontal



Interruptor de alimentación: Presione este botón para encender o apagar el monitor.



Botón Menú: Presione este botón para abrir el **MENU DEL SISTEMA**.



Botón Iniciar/detener NIBP: Presione este botón para inflar el brazal e iniciar la medición de la presión sanguínea. Durante la medición, presione el botón para detener la medición y desinflar el brazal.



Botón Registrar: Presione este botón para iniciar un registro en tiempo real. El tiempo de registro se configura en **REG TIEMPO RT** de **REGISTR**. Presione el botón nuevamente para detener el registro actual.



Botón Silenciar: Presione este botón durante menos de 2 s para pausar la alarma audible. Aparecerá **Alarma pausada** xxs en la pantalla. Al volver a presionarlo, o una vez que haya terminado el tiempo de pausa, el sistema volverá al estado normal. Cuando **Alarma de audio desactivada** se especifica como **ENC**, mantener presionado el botón por 3 s puede desactivar la alarma de audio. Al presionarlo de nuevo se reanudará. Si ocurre una nueva alarma durante este período, la nueva alarma no sonará.



Botón Congelar: En modo normal, presione este botón para congelar todas las ondas en la pantalla. En el modo congelar, presione este botón para restaurar la actualización de la forma de onda.



Botón Principal: Presione este botón para volver a la interfaz principal.



Perilla giratoria: El usuario puede usar la perilla giratoria para seleccionar los elementos del menú y modificar la configuración. Esta perilla se puede rotar en sentido horario o antihorario como otros botones. El usuario puede usarla para realizar las operaciones en pantalla y en el menú.

Panel izquierdo

