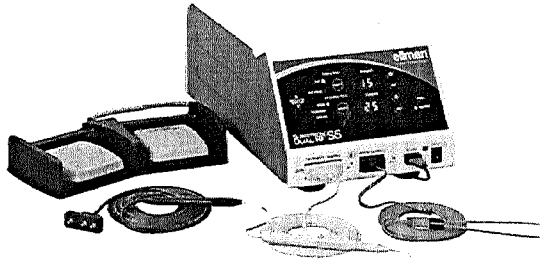


Guía rápida: Operación, Cuidado y Mantenimiento

Equipo: Radiocirugía
Marca: Ellman
Modelo: S5
Serial: 912000578

**Descripción:**

El Ellman S5-Pelleve es una fuente de energía altamente confiable que corta y coagula tejidos blandos utilizando tecnología de ondas de radio de alta frecuencia. Este equipo opera a 4.0 MHz, lo cual permite realizar cortes precisos con mucho menor daño térmico que los equipos convencionales de electro-cirugía. Además del modo de corte, el S5-Pelleve ofrece otros tres tipos de onda para alcanzar un efecto más hemostático en los tejidos. El modo Cut/Coag (corte y coagulación) utiliza una onda completamente rectificada. El modo Coag (coagulación) usa una onda parcialmente rectificada. El cuarto tipo es fulguración que se usa para ocasionar daño intencional al tejido.

Antes de utilizar

1. Verificar el buen estado físico del equipo (cable de alimentación, accesorios).

Guía rápida de utilización

1. Conectar el cable de alimentación al equipo y a la toma de aislamiento.
 2. Ponga el interruptor en la posición de encendido.
 3. Conectar los accesorios y asas según el tipo de procedimiento, según las indicaciones del médico a cargo del procedimiento.
 4. Seleccione el modo de operación según el procedimiento:
 - Modo Coagulación
 - Modo Corte
 - Modo Corte – Coagulación
 - Fulguración
 - Bipolar
 5. Seleccione la potencia deseada, comenzar por potencia baja e ir aumentando gradualmente.
 6. Ubique la placa neutra en el paciente.
 7. Presione pedal o pieza de mano para activar el equipo.
- No permita que se acumulen líquidos bajo o alrededor del paciente

Después de Utilizar el Equipo

1. Ponga el interruptor en la posición de apagado.
2. Desconecte el cable de alimentación del equipo de la toma.
3. Recoja los cables en forma circular y evite doblarlos bruscamente para evitar que se quiebre internamente.
4. Limpie los accesorios (Vea Aseo y Limpieza del Equipo)

Aseo y Limpieza del Equipo

1. La limpieza de la superficie del equipo y los accesorios se puede realizar con un paño suave humedecido con un limpiador comercial, no abrasivo o una solución de 70% de alcohol diluido en agua. Secar bien la superficie y evitar exceso de líquidos.
2. Si las asas son desechables proceda a botarla adecuadamente, si son reutilizable debe esterilizar.

Precauciones en su Utilización

1. Evite contactos de piel con piel, entre los miembros y el tronco: coloque campos estériles secos aislándolos entre sí.
2. No tocar las puntas de los accesorios ni la placa de paciente mientras el equipo esté conectado.
3. El equipo solo debe ser operado por personal médico.
4. El mal uso de los mandos puede provocar daños al paciente o personal médico por ejemplo: Juegos, tomar los mandos haciendo contacto con las puntas o distraerse durante el procedimiento.
5. No use adaptadores o cables de extensión entre el cable de alimentación del equipo y la toma.
6. Alertar al departamento de ingeniería biomédica si ven signos de cables en mal estado; agrietados o con desgastes (en particular en los extremos), así como conectores flojos u oxidados son causa de fallos en la potencia o se pueden generar chispas y podría haber gran riesgo de incendio.
7. No use el equipo en presencia de anestésicos inflamables, desinfectantes inflamables u otros materiales combustibles.
8. Los campos estériles superpuestos pueden retener gases inflamables propios de la anestesia o metano propios del paciente. Asegúrese de ventilar el cuerpo del paciente en forma adecuada.
9. No use la superficie del equipo a modo de estante como punto de almacenamiento temporal para líquidos. El líquido derramado sobre la unidad podrá tornarla peligrosa para el paciente o personal de quirófano, dañar la unidad temporal o permanentemente o causar un incendio en caso de ser inflamable.