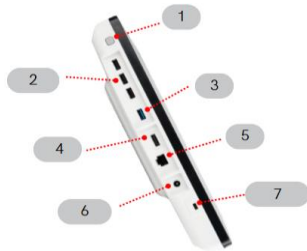
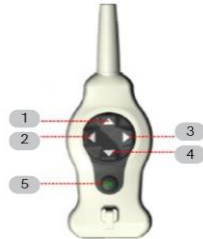
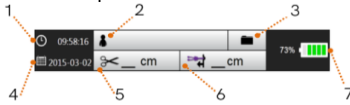
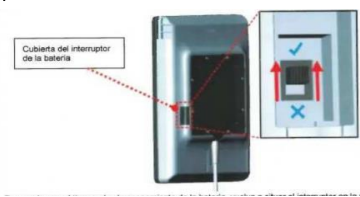


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012					
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES	AÑO	
				16	09	2024		
Nombre del equipo:	SISTEMA ECOGRÁFICO	Modelo:	SITE-RITE 8		Riesgo del equipo:		IIA	
Marca:	BARD ACCESS SYSTEMS				Clasificación del equipo:		DIAGNÓSTICO	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO			PARTES DEL EQUIPO			PARTES DE LA PANTALLA		
 El sistema ecográfico Site-rate 8 es un dispositivo portátil que realiza ecografía en 2D en tiempo real y cuenta con aplicaciones personalizadas de acceso vascular, documentación sobre procedimientos, herramienta de medida de vaso y conectividad electronica(si esta habilitada). Esta indicado para obtener ecografias de diagnostico del cuerpo humano.			 1.Interruptor de alimentación 2.USB 2.0 (3 puertos) 3.USB 3.0 4.Salida de video HDMI 5.Ethernet 6.Conexión de alimentación 7.Ranura Kensington (para cable de seguridad)  1.Cursor arriba 2.Cursor izquierdo 3.Cursor derecha 4.Cursor abajo 5.Ok (Aceptar)			 1.Barra de información 2.Escala de profundidad de la imagen 3.Barra de herramientas principal 4.Iconos de catéter 5.Marcadores de profundidad  1.Hora 2.Información del paciente 3.Gestión de archivos 4.Fecha 5.Longitud de recorte del catéter 6.Marcado del lugar de salida 7.Información de la batería		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
1.Temperatura de funcionamiento: Entre 10°C y 40°C 2.Temperatura de almacenamiento: Entre -18°C y 40°C 3.Dimensiones: 30 cm x 22 cm x 5cm 4.Peso: 2.3 KG 5.Fuente de alimentación: Adaptador de CA, batería interna 6.Consumo de alimentación: 60vatios 7.Monitor: 10.4". 8.Modos de imagen: 2D. 9.Batería: Aproximadamente 3 horas 10.Tiempo de carga completa: 8 horas 11.Frecuencia de sonda lineal de 32 mm: 7.5-10 MHz 12.Profundidad máxima de exploración: 6 cm (1.5 cm, 3 cm, 4.5 cm y 6 cm). 13.Ancho de exploración de sonda lineal: 32 mm.						Mantenga el equipo apagado mientras realiza la limpieza. Después de terminar la terapia, limpie el exceso de gel de la piel del paciente y del cabezal. La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:								
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.								
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica								
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo								
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.								
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describira la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.								
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas								
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.								

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES
				16	09	2024

Nombre del equipo:	SISTEMA ECOGRÁFICO	Modelo:	SITE-RITE 8	Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	BARD ACCESS SYSTEMS			Clasificación del equipo:	DIAGNÓSTICO

MODO DE CONGELACIÓN	PASOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	ALARMAS Y POSIBLES ERRORES
Para acceder al modo de congelación, pulse el botón de congelación en la pantalla ecográfica principal. Aparecera lo siguiente:  1.Fecha y hora de congelación de la imagen. 2.Descongelar: Vuelve a la imagen activa. 3.Guardar/imprimir 4.Iconos de catéter: Muestra los tamaños de los iconos de catéter disponibles. 5.Modo Sherlock™: Al seleccionarse, cambia al modo 6.Sherlock™ (si está habilitado) 7.Herramienta de medida: Activa y desactiva la herramienta de medida NOTA: Cuando se selecciona el botón para guardar/imprimir, la imagen ecográfica actual se guarda en el disco duro del sistema y en cualquier unidad de almacenamiento USB conectada. La imagen también se imprimirá si hay alguna impresora compatible conectada.	1.Encienda el sistema: Para ello, pulse el interruptor de alimentación situado en el lateral izquierdo superior del sistema. 2.Aplique el gel conductor y las cubiertas para sondas. Haga lo siguiente para envolver la sonda para uso estéril: a) Coloque la sonda en el soporte para sonda. b) Aplique una capa de gel de acoplamiento ecográfico a la ventana acústica de la cabeza de la sonda. c) Asegúrese de que la cubierta de la sonda esté completamente replegada. d) Coloque la cubierta para sonda por encima de la cabeza de la sonda, con cuidado de no eliminar el gel de acoplamiento. e) Cubra la sonda y el cable con la cubierta para sonda. f) Alise la cubierta para sonda por encima de la ventana acústica de la cabeza de la sonda para eliminar todas las burbujas de aire o pliegues de la cubierta. g) Utilice las bandas de poliéster sin látex para mantener la cubierta de la sonda en su sitio. h) Aplique una capa de gel de acoplamiento estéril a la ventana acústica cubierta. 3.Si es necesario, acople la guía para agujas a la sonda según las instrucciones de uso de la cubierta para sondas y guía para agujas Site-Rite". 4.Ajuste la imagen como desee. 5.Realice el procedimiento 6.Al finalizar, quite la cubierta de la sonda y deséchela de acuerdo con el protocolo del centro para limpiar el sistema.	1.Código de error CE: 201-205: Fallo de los componentes técnicos ecográficos.Reinicie el sistema. 2.Código de error CE:101: Temperatura del sistema demasiado alta.Apague el sistema y espere a que se enfrie. 3.El sistema reproduce un sonido cada minuto: Batería baja. Conecte el sistema a una fuente de alimentación para que siga funcionando. 4.Código de error -  Error de la batería.Conecte el adaptador de CA para encender el sistema. 5.Problema de alimentación: El sistema no se enciende o bien se enciende pero se paga enseguida. Mantenga pulsado el interruptor de alimentación durante 2 segundos como mínimo para encender el sistema. Conecte el sistema a una fuente de alimentación para que siga funcionando y cargue la batería.
CONEXIÓN DE LA BATERÍA Para permitir que el sistema reciba alimentación de la batería, el interruptor de la batería debe estar encendido. Para activar la batería, abra la cubierta de la batería situada en la parte trasera del sistema. Sitúe el interruptor en la posición : 		

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

- Definición de uso del equipo:** En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
- Especificaciones técnicas:** En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
- Partes del equipo:** Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
- Modos de operación del equipo:** En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
- Limpieza y desinfección:** En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
- Alarmas y posibles errores:** Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
- Pasos de operación del equipo:** Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.