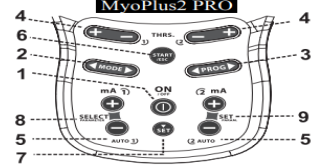


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001														
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: <table border="1"> <tr> <td>PAGINA</td> <td>01</td> <td>DE</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>28</td> <td>MES</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>AÑO</td> <td colspan="3">2024</td> </tr> </table>				PAGINA	01	DE	01	DÍA	28	MES	08	AÑO	2024	
PAGINA	01	DE	01														
DÍA	28	MES	08														
AÑO	2024																
Nombre del equipo:	Biofeedback	Modelo:	Pro 2	Riesgo del equipo:	IIA												
Marca:	NeuroTrac			Clasificación del equipo:	Diagnóstico												
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		BOTON OCULTO													
 Este dispositivo forma parte de un nuevo tipo de estimuladores neuromusculares y de EMG de última generación creados por Verity Medical Ltd específicamente para satisfacer las necesidades tanto de los fisioterapeutas		 1. ON/OFF : Pulsar para encender o apagar la unidad. 2. MODE: Seleccionar uno de los modos clínicos preestablecidos o un conjunto de programas manuales. 3. PROG: Elegir uno de los programas del modo seleccionado en el punto 2. 4. THRS 1 y THRS 2 : Ajustar el nivel del umbral EMG (objetivo ETS) individualmente en los dos canales. 5. AUTO.1 y AUTO.2 : Si está en fase EMG o ETS, la pantalla principal (antes de comenzar la sesión), pulsar el botón AUTO para ajustar manualmente el umbral por separado en ambos canales. 6. START/ESC: Pulsar para comenzar la fase EMG del programa seleccionado, pulsar el mismo botón (ESC) para finalizar la sesión (programa) o finalizar la configuración de los parámetros. 7. SET : Ir a la siguiente fase, pulsar y mantener pulsado durante 3 segundos para cambiar los parámetros de la fase seleccionada. 8. STIM.1 mA y STIM.2 mA: Comenzar la fase STIM o ETS, aumentar o disminuir la intensidad de la estimulación. SELECT PARAM: En el menú de configuración de programa se utiliza para seleccionar el siguiente parámetro. 9. SET PARAM: En el menú de configuración de programa se utiliza para ajustar el valor.		(Accesible después de quitar la tapa de las pilas). Pulsarlo con la patilla del cable principal para bloquear el programa y guardar la información. 													
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN													
1.EMG de doble canales 2.Gama EMG: de 0,2 a 2000 μV RMS (prolongado) 3.Sensibilidad: 0,1 μV RMS 4.Presición: 4% de indicaciones $\mu V \pm 0,3 \mu V$ en 200 Hz 5.Períodos de trabajo / descanso: 2-99 segundos 6.Cantidad de ensayos: 2-99 7.Condiciones de medio ambiente para utilización: De +10 a +30 grados Centígrados. Humedad de 0-90%. 8.Condiciones de almacenaje y transporte: De -10 a +50 grados Centígrados. 0-90% Humedad. Dimensiones físicas: -Largo 150 mm -Ancho 89 mm -Fondo 35 mm				La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.													
				PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES													
				La estimulación neuromuscular no debe usarse en los siguientes casos: -Pacientes con marcapasos -Durante el embarazo -Pacientes con dolores sin diagnosticar -No aplicar estimulación a la zona facial a menos que lo haga bajo la estrecha supervisión de un profesional sanitario debidamente calificado. EMG: No existe ninguna precaución especial durante la utilización de la EMG a menos que se use para ejercicios y valoración de la función del suelo pélvico. En este caso la EMG no debería utilizarse nunca: -Durante la menstruación. -Si hay algún síntoma de infección en la vejiga. -Para aquellos pacientes con algún tipo de disminución física o psíquica que no puedan manejar debidamente el													
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:																	
1. Definición de uso del equipo : En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.																	
2. Especificaciones técnicas : En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica																	
3. Partes del equipo : Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo																	
4. Modos de operación del equipo : En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.																	
5. Limpieza y desinfección : En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.																	
6. Alarmas y posibles errores : Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas																	
7. Pasos de operación del equipo : Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.																	

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO:		FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES	AÑO	
				28	08	2024		

Nombre del equipo:	Biofeedback	Modelo:	Pro 2	Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	NeuroTrac			Clasificación del equipo:	Diagnóstico

INICIO RÁPIDO	FASE EMG	MODO CLÍNICO AJUSTABLE P+A	
1. Introducir cuatro pilas AA 2. Introducir el cable Introducir el/los cable/s conductor/es en las conexiones de la unidad, El cable de referencia de EMG negro y redondo se conecta en el agujero circular mas grande situado en la parte superior del aparato; el cable conductor dual de estimulación en color marfil se conecta en la conexión del medio. 3. Electrodo cutáneos/colocación de la sonda Si se utiliza la fase EMG o ETS, conecte el cable de referencia EMG a un electrodo de superficie cutánea y colóquelo correctamente en el cuerpo. 4. Encienda el MyoPlus pulsando una sola vez el botón On/Off. 5. Seleccione uno de los modos clínicos (Incontinencia, Deporte, Rehabilitación) o uno de los modos personalizados (STIM , EMG, ETS o P+A) pulsando el botón MODE consecutivamente hasta que en pantalla aparezca el modo deseado. 6. Seleccionar y ejecutar el programa Pulsando el botón basculante PROG se puede seleccionar dentro de esta	Para comenzar la sesión de EMG, pulse el botón START (inicio) y aparecerán en pantalla los indicadores de Work/Rest (actividad/descanso). Contraiga los músculos cuando aparezca Work	Hay fases P+A preconfiguradas (listas para usar) y fases personalizadas de P+A (que pueden ser ajustadas por el fisioterapeuta). Las fases preconfiguradas de P+A se incluyen en algunos modos clínicos preconfigurados como Rehabilitación, Incontinencia y Deporte. P+A (pasivo y activo) personalizado es un modo en el que el profesional sanitario puede establecer fases de distinta duración (EMG, STIM, ETS) en un solo tratamiento que pueden repetirse muchas veces tanto en casa como en la clínica.	
	FASE ETS		Al principio configure el nivel de Threshold (umbral) igual que ha hecho para la fase EMG. Ajuste el nivel de estimulación pulsando los botones mA + y -. La sesión de ETS comienza automáticamente después del ajuste de los mA. La sesión de ETS funciona igual que la de EMG (indicadores de actividad/ descanso) con una diferencia: en cuanto el paciente alcanza el nivel deseado (umbral) se produce estimulación durante unos segundos, lo que ayuda a contraer los músculos.
	MODO CLÍNICO		Puede elegir el modo clínico adecuado pulsando el botón MODE: Deporte, Incontingencia, Rehabilitación, EMG personalizado, STIM personalizado, ETS personalizado o P+A personalizado (P-pasivo, A-activo es una combinación de fases con distintos tipos: EMG, STIM, ETS, todos ellos en un solo programa). Cada programa se divide en un máximo de 5 fases secuenciales. Al contrario de otros dispositivos, el NeuroTrac permite al paciente utilizar fases secuenciales de electromiografía (EMG), electroestimulación (STIM) y estimulación inducida por EMG (ETS), todo ello en un solo programa. Se puede seleccionar el tipo de modalidad (EMG, STIM o ETS) y la duración de cada fase. Cuando finaliza la sesión del programa, en la pantalla LCD aparecerán las estadísticas de EMG, STIM y ETS de la sesión.
FASE STIM			
Para comenzar la sesión STIM, aumente el nivel de estimulación pulsando los botones mA + y -. Puede hacer una pausa en el programa en cualquier momento pulsando el botón ESC una sola vez; para continuar, pulse el botón mA+ o si desea interrumpirlo vuelva a pulsar el botón ESC.			

ALARMAS Y POSIBLES ERRORES Falla en cables -Comprobar que no haya ninguna grieta o rotura en los cables o en los extremos. -Comprobar los cables y los electrodos de superficie o internos, unos electrodos de mala calidad generan lecturas incorrectas. Falla de suministro de corriente -Verificar estado de electrodos y cables, ir al menú de configuración y verificar que el parámetro de corriente se encuentre ajustado a 20mA. -Verificar estado de baterías. -Verificar contacto de electrodos y/o sondas intracabitarías. Fallas en conexión a software -Verificar conexión de stick USB si es el caso. -Verificar conexión via bluetooth del ordenador.

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:	
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.	
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica	
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo	
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.	
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.	
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas	
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.	