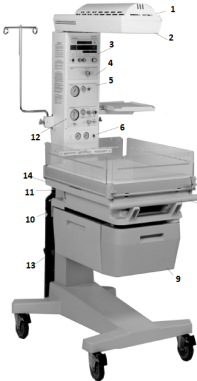


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012																							
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	AÑO: 2023																				
Nombre del equipo: CUNA DE CALOR RADIANTE			Modelo: RESUCITAIRE		Riesgo del equipo: Clase II																					
Marca: DRAEGER			Clasificación del equipo: Terapeutico																							
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO																						
 Equipo diseñado para emitir y controlar de manera uniforme el calor a los pacientes recién nacidos que requieren un ambiente térmico regulado por medio de un elemento radiante cerámico. Combina una plataforma de terapia de calentado con los componentes necesarios para los procesos de emergencia clínica y resucitación.		 1. Módulo calefactor 2. Luz de examen 3. Controlador 4. Módulo de suministro de mezcla de gas 5. Aspiración 6. Módulo de suministro de gas 7. Cuna, colchón y paneles 8. Asa delantera 9. Compartimiento para almacenamiento de equipo de reanimación y aspiración 10. Cajón a ambos lados 11. Mecanismo de inclinación 12. Módulo de reanimación - Accesorios: 13. Depósito de gas de tamaño E 14. Bandeja para chasis radiográfico		Modo Precalentado: Desactiva las alarmas, y la potencia del calentador disminuye progresivamente del 100% al 30% durante un lapso específico. Modo Manual: Para calentamiento a corto plazo, con vigilancia del personal médico. Modo de Neonato: Calentamiento a largo plazo, la temperatura se mantiene consistente.																						
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		ALARMAS Y POSIBLES ERRORES																								
Limpie y desinfecte el calefactor radiante después del alta de un neonato. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la superficie externa del equipo, también utilice la solución desinfectante utilizada en la institución. Aplique la solución con un paño y asegúrese de cubrir todas las áreas del equipo, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Característica</th> <th>Especificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temperatura alta</td> <td>Se activa si la sonda de temperatura de la piel se encuentra conectada y el sensor de temperatura de la piel alcanza 39.0°C ±0.2°C (102.2°F). Se reinicia a 38.5°C (101.3°F).</td> </tr> <tr> <td>Compruebe paciente</td> <td>Se activa en Modo manual después de 10 min. Continúa activa con alarma sonora cada 30 segundos durante 5 minutos o durante un total de 15 min. Luego se apaga el calentador.</td> </tr> <tr> <td>Temporizador Apagar</td> <td>Se activa a intervalos de 1 min., 5 min. y 10 min. del temporizador Apagar.</td> </tr> <tr> <td>Fallo de alimentación</td> <td>Se activa cuando se produce pérdida de alimentación. Se mantiene activa durante > 10 min.</td> </tr> <tr> <td>Fallo de la sonda</td> <td>Se activa si falla la sonda de temperatura de la piel (abierto o cortocircuito).</td> </tr> <tr> <td>Fallo del sistema</td> <td>Indica un fallo del sistema. Envíe la unidad al servicio técnico inmediatamente.</td> </tr> <tr> <td>Temperatura del neonato</td> <td>Se activa si la temperatura del neonato fluctúa 1°C por encima o por debajo del punto fijado.</td> </tr> <tr> <td>Módulo eléctrico, alarmas de volumen en aumento (máximo de 80 dba para el lactante)</td> <td>Frecuencia del tono: 1.2 kHz máximo con un nivel de sonido en tres etapas: 15 segundos bajo, 15 segundos medio y, a continuación, alto.</td> </tr> <tr> <td>Módulo mezclador, tipo de alarma sonora neumática</td> <td>Varilla vibradora, con alimentación neumática.</td> </tr> </tbody> </table>					Característica	Especificación	Temperatura alta	Se activa si la sonda de temperatura de la piel se encuentra conectada y el sensor de temperatura de la piel alcanza 39.0°C ±0.2°C (102.2°F). Se reinicia a 38.5°C (101.3°F).	Compruebe paciente	Se activa en Modo manual después de 10 min. Continúa activa con alarma sonora cada 30 segundos durante 5 minutos o durante un total de 15 min. Luego se apaga el calentador.	Temporizador Apagar	Se activa a intervalos de 1 min., 5 min. y 10 min. del temporizador Apagar.	Fallo de alimentación	Se activa cuando se produce pérdida de alimentación. Se mantiene activa durante > 10 min.	Fallo de la sonda	Se activa si falla la sonda de temperatura de la piel (abierto o cortocircuito).	Fallo del sistema	Indica un fallo del sistema. Envíe la unidad al servicio técnico inmediatamente.	Temperatura del neonato	Se activa si la temperatura del neonato fluctúa 1°C por encima o por debajo del punto fijado.	Módulo eléctrico, alarmas de volumen en aumento (máximo de 80 dba para el lactante)	Frecuencia del tono: 1.2 kHz máximo con un nivel de sonido en tres etapas: 15 segundos bajo, 15 segundos medio y, a continuación, alto.	Módulo mezclador, tipo de alarma sonora neumática	Varilla vibradora, con alimentación neumática.
Característica	Especificación																									
Temperatura alta	Se activa si la sonda de temperatura de la piel se encuentra conectada y el sensor de temperatura de la piel alcanza 39.0°C ±0.2°C (102.2°F). Se reinicia a 38.5°C (101.3°F).																									
Compruebe paciente	Se activa en Modo manual después de 10 min. Continúa activa con alarma sonora cada 30 segundos durante 5 minutos o durante un total de 15 min. Luego se apaga el calentador.																									
Temporizador Apagar	Se activa a intervalos de 1 min., 5 min. y 10 min. del temporizador Apagar.																									
Fallo de alimentación	Se activa cuando se produce pérdida de alimentación. Se mantiene activa durante > 10 min.																									
Fallo de la sonda	Se activa si falla la sonda de temperatura de la piel (abierto o cortocircuito).																									
Fallo del sistema	Indica un fallo del sistema. Envíe la unidad al servicio técnico inmediatamente.																									
Temperatura del neonato	Se activa si la temperatura del neonato fluctúa 1°C por encima o por debajo del punto fijado.																									
Módulo eléctrico, alarmas de volumen en aumento (máximo de 80 dba para el lactante)	Frecuencia del tono: 1.2 kHz máximo con un nivel de sonido en tres etapas: 15 segundos bajo, 15 segundos medio y, a continuación, alto.																									
Módulo mezclador, tipo de alarma sonora neumática	Varilla vibradora, con alimentación neumática.																									
PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																								
1. Conecta el equipo a la fuente de alimentación. 2. Encienda el interruptor de Encendido. - Comienza la función de autocomprobación 3. Cuando se completa la función de autocomprobación, el controlador comienza a funcionar en Modo de precalentamiento 4. Compruebe los modos: - Precalentamiento - Manual - Tecla de bloqueo - Neonato - Amulación de temperatura - Alarma de la sonda - Temporizador apagar - Luz de reconocimiento - Alarma fallo de alimentación. 5. Apaga el equipo utilizando el panel de control. 6. Desconecta el equipo de la fuente de alimentación		Alimentación: Modelo de 100V, 50/60 Hz, 750W sin VHA, 13002W con VHA Dimensiones: - Altura del colchón: 100 cm - Longitud del colchón: 66 cm - Anchura del colchón: 53 cm - Altura de la cuna: 190 cm - Anchura de la cuna: 75 cm - Profundidad de la cuna: 121 cm - Peso de la cuna: 145 kg - Ruedas giratorias 4 piezas.																								
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:																										
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.																										
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica																										
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo																										
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.																										
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.																										
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas																										
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.																										