

GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: INCUBADORA	CÓDIGO: NA
MARCA: MAMII	VERSIÓN: 1
MODELO: CHS-I1000	FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2022

USO DEL EQUIPO




Dispositivo empleado para dar soporte vital a los bebés recién nacidos, bien sean prematuros o a término, que no estén preparados para adaptarse al medio extrauterino.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Mantener el equipo conectado a la red eléctrica, la cual tenga conexión a tierra
- Evite la radiación directa del sol y otra fuente infrarroja la cuales pueden causar sobrecalentamiento del bebé
- Agregue agua destilada en la incubadora hasta la línea límite y así se evita la pérdida de agua del infante.
- Recuerde revisar constantemente los valores de humedad del equipo

PARTES DEL EQUIPO

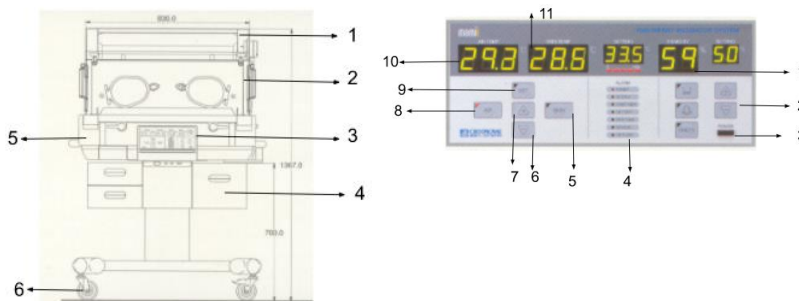

Partes delanteras del equipo:

1. Repisa de la incubadora para accesorios
2. Base de la incubadora
3. Panel de control del equipo
4. Gabinete móvil de la incubadora
5. Ruedas para traslado del equipo

Partes del panel de control:

1. Indicador de la humedad relativa
2. Botones de acceso para modos de la incubadora
3. Indicador para el estado de la batería
4. Indicador de las alarmas
5. Botón para activar el modo bebé
6. Botón para realizar diferentes selecciones en el panel o disminuir valores
7. Botón para acceder al menú principal
8. Botón para activar el modo aire

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

1. Verifique que el equipo esté conectado a la red eléctrica
2. Verifique que los accesorios de monitoreo estén conectados
3. Verifique que los frenos estén activados
4. Adicionar el agua destilada en el compartimento de suministro del equipo
5. Revise los filtros de aire del equipo
6. Accione el botón de ON/OFF
7. Configurar los parámetros según sean necesarios
8. Mantener el compartimento del bebé lo más cerrado posible.



ADVERTENCIAS DE USO DEL EQUIPO


1. No excederse ni limitarse a la medida de H2O del equipo
2. Evite las altas temperaturas
3. Evite ubicar el equipo cerca de gases medicinales
4. Evite ubicar el equipo cerca de campos electromagnéticos
5. Evite usar extensiones de conexión

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: INCUBADORA	CÓDIGO: NA
	MARCA: MAMII	VERSIÓN: 1
	MODELO: CHS-I1000	FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2022

PRINCIPIO DE CONTROL DE TEMPERATURA

El funcionamiento de control de temperatura dentro de la cámara se logra por medio del sistema de circulación forzada de aire:

1. El aire exterior se filtra
2. Fluye a través del calentador
3. El aire entra a la cámara a través del puerto de entada
4. Ese aire baja directamente al motor de ventilador
5. Se convierte en flujo de aire, y este llega al tanque de agua
6. Finalmente, entrara a la cámara de vapor sobre el agua.

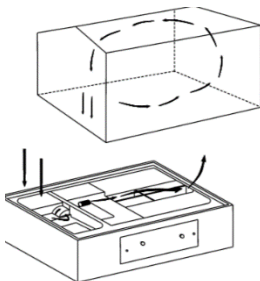

9. Botón para realizar diferentes selecciones en el panel o aumentar valores
10. Indicador del estado de la temperatura del aire
11. Indicador del estado de la temperatura de la piel

NIVELES DE ALARMA



ALARMA POR FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA	Activa un indicador, especificando que el suministro de potencia no está disponible
ALARMA POR DESVIACIÓN DE TEMPERATURA	Indica que los valores de temperatura no están en los rangos normales
ALARMA POR SOBRECALENTAMIENTO	Indica que los motores no están trabajando
ALARMA POR FALLA EN EL SENSOR	Si se activa este indicador, comunicarse con el área de mantenimiento.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS



Clasificación IIA de Riesgo moderad.



MODOS DE TRABAJO

1. **MODO AIRE:** Control de la salida del calentador por el sensor de T° aire.
2. **MODO BEBÉ:** Control de la salida del calentador por el sensor de T° de la piel.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



1. No limpie el monitor con material abrasivo.
2. En caso de utilizar Klorkleen + Vital Care retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco.
3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo.
4. Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.