

	GUÍA RAPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	CÓDIGO: NA
	MARCA: GOLDWAY	VERSIÓN: 1
	MODELO: UT-7000C	FECHA DE ELABORACIÓN: 10/09/2022

USO DEL EQUIPO




Dispositivo que detecta, procesa y muestra los parámetros fisiológicos de un paciente conectado a éste, en este caso. Este monitor multiparametros entrega señal de ECG de 5 y 3 derivaciones, Respiración, Sensor de SpO2, 2 Canales de temperatura, NIBP, 2 Canales de Presión Invasiva

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Mantener conectado el equipo a la red eléctrica
- Verificar que tenga encendido los indicadores del panel de control
- Colocar los accesorios siguiendo la guía de los cables
- No forzar ni arrancar los cables de los accesorios cuando no se desconectan del equipo
- Ajustar en cero el monitor para utilizar la presión invasiva
- Tener en cuenta los canales que estén activados para evitar confusiones en la temperatura y presión

PARTES DEL EQUIPO

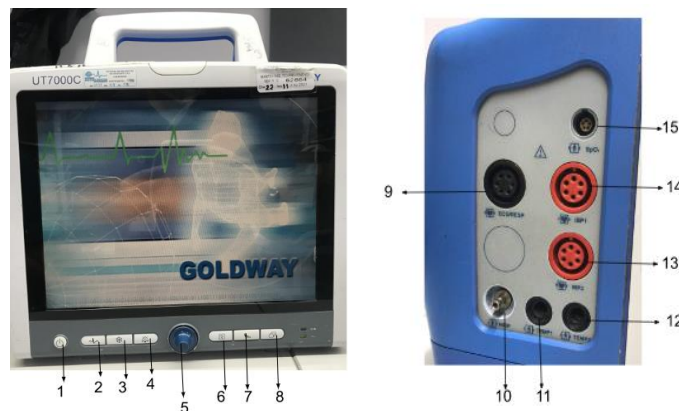

1. Botón de Encendido/ Apagado
2. Botón para modificar la señal del ECG
3. Botón para congelar la imagen
4. Botón para silenciar alarmas
5. Perilla para configuraciones del monitor
6. Botón para imprimir imagen
7. Botón para NIBP
8. Botón para acceder al menú
9. Conexión para accesorio del ECG
10. Conexión para manguera de NIBP
11. Conexión para accesorio de Temperatura 1
12. Conexión para accesorio de Temperatura 2
13. Conexión para manguera de IBP 1
14. Conexión para manguera de IBP 2
15. Conexión para accesorio de SP02


MODOS DE OPERACIÓN DEL MONITOR



MODO ECG:

1. Examine la piel del paciente. La piel debe estar limpia y sin vello.
2. Ubique los electrodos en el paciente.
3. Conecte el cable paciente a los electrodos y al monitor
4. Encienda el monitor y verifique la correcta monitorización.
5. Si es necesario, modifique desde el monitor la derivación del ECG:

[Menú] [Parámetros de ECG] [Otros] y seleccione la derivada correspondiente y aceptar configuración.

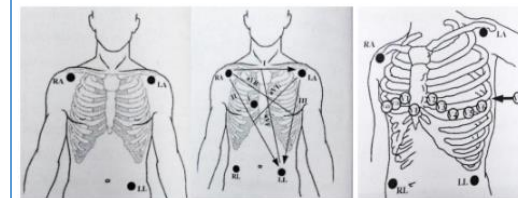

3 electrodos.

RA: Debajo de la clavícula cerca del hombro derecho.
LA: Debajo de la clavícula cerca del hombro izquierdo.
LL: Abdomen inferior izquierdo

5 electrodos.

RA: Debajo de la clavícula cerca del hombro derecho.
LA: Debajo de la clavícula cerca del hombro izquierdo.
LL: Abdomen inferior izquierdo
RL: Abdomen inferior derecho

Electrodo V

El electrodo V puede posicionarse en cualquiera de las partes mostradas en la figura de arriba.

	GUÍA RAPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	CÓDIGO: NA
	MARCA: GOLDWAY	VERSIÓN: 1
	MODELO: UT-7000C	FECHA DE ELABORACIÓN: 10/09/2022



MODO SP02:

1. Seleccione el sensor de oximetría adecuado para la entrada del monitor
2. Ubique el sensor en el dedo del paciente
3. Conecte el accesorio al monitor y verifique la correcta monitorización del paciente



MODO TEMPERATURA:

1. El monitor viene con un accesorio en forma de moneda de acero inoxidable el cual se coloca sobre la superficie del cuerpo.
2. El monitor cuenta con dos entradas de temperatura, conectar debidamente el cable al monitor en la entrada deseada y configurar las entradas desde el menú del monitor.
3. Ubicar el sensor firmemente en el cuerpo del paciente.
4. Revisar desde el menú la configuración de las alarmas sobre temperatura para adaptarlas al paciente.
5. En tal caso de que la temperatura se encuentre en grados F° desde el menú se puede modificar la unidad de medida.

MODO NIBP:



El monitor cuenta con diferentes modos para la toma de presión, con el modo manual, con el modo automático de seguimiento, y modo IBP:

MODO MANUAL:

1. Encendemos el monitor.
2. Conectamos la válvula de aire con el manguito de presión arterial
3. Confirmamos que el brazalete se encuentra completamente desinflado y conectamos al monitor
4. Presionamos el botón de NIBP y esperamos que inicie la toma de medida.

MODO AUTOMÁTICO: Se configura directamente desde el menú, y lo iniciamos cuando necesitamos señales de monitoreo continuo, este puede configurar para que tome medidas de presión cada cierto tiempo establecido y estas tomas se guardan en el historial del monitor.



1. Hora de medida
2. Modo medida
3. Límites de alarma
4. Presión sistólica/Presión diastólica
5. Presión promedio
6. Unidad de medida

MODO IBP:

1. Seleccionar en el monitor la opción de IBP
2. Preparar el envase con el transductor para la debida conexión.
3. Montar adecuadamente el transductor aplicando suero fisiológico y retirando debidamente el aire del sistema
4. Después de realizar la punción de la línea arterial, conectar al paciente con el cable de IBP suministrado.
5. Poner en cero el sistema de la línea arterial
6. Ajustar en cero el sistema accediendo por el menú
7. Verificar la curva inicial de monitoreo

ALARMAS Y POSIBLES ERRORES

El monitor no enciende 	Compruebe si el cable de poder está conectado a la energía y debidamente al monitor
Uno o varios de los botones del monitor no sirven 	Trate de mantener el botón presionado durante 30 segundos, si sigue sin funcionar comuníquese con el

  	GUÍA RAPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	CÓDIGO: NA
	MARCA: GOLDWAY	VERSIÓN: 1
	MODELO: UT-7000C	FECHA DE ELABORACIÓN: 10/09/2022

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  Clasificación IIB de Alto riesgo. PASOS DE OPERACIÓN DEL MONITOR 1. Verifique que el monitor esté conectado a la red eléctrica. 2. Encienda el monitor. 3. Realice la conexión de los accesorios a utilizar para el monitoreo. 4. Decida que variables quiere monitorear. 5. Chequee que el cable paciente y sensores son correctos, y verifique si el monitor inicia a monitorizar correctamente. ADVERTENCIAS DE USO DEL EQUIPO  1. Si el monitor presenta fallos o daños en el momento de funcionamiento dejar de utilizarlo y llamar al equipo de mantenimiento. 2. No destapar el equipo ni realizar cambio de accesorios de equipo en equipo cuando no funcionan.	 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%. ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 1. No limpie el monitor con material abrasivo. 2. En caso de utilizar Klorkleen + Vital Care retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco. 3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo. 4. Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.		
		 La toma del NIBP no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos	personal de mantenimiento biomédico Verifique el brazalete de presión no tenga ninguna fuga, verifique que la manguera se encuentre colocada correctamente.
		 La toma del SP02 no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos	Verifique que el LED del señor de oximetría este encendido, sino comuníquese con el personal de mantenimiento.
		 La toma del IBP no me entrega ningún valor ni se ve la grafica en el monitor	Intentar cambiar cable del IBP y ajustar a cero nuevamente, en caso de no funcionar. Comuníquese con mantenimiento.