

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	



SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE PACIENTE

MARCA: COVIDIEN


MODELO: WARM TOUCH 6000

Recomendaciones antes de usar

- Antes de operar el equipo lleve a cabo una inspección visual.
- Si el equipo presenta algún daño muy grande, no use la unidad.
- No use el equipo durante una resonancia magnética.
- No permita que se derrame liquido sobre el equipo.
- Asegúrese que la entrada de aire en la parte posterior de la unidad no este obstruida.
- Asegúrese que el equipo esta correctamente posicionado al carro de transporte.



No.	Nombre	No.	Nombre
1	Manguera	4	Cable de alimentación
2	Botón de encendido/apagado	5	Contador de horas
3	Boquilla	6	Panel de control

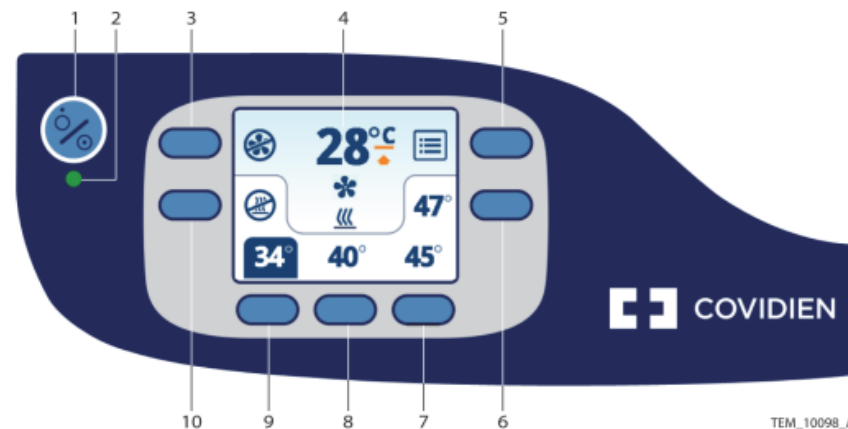

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES		AÑO

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Botón encendido/en espera	6	Tecla de 47°C (modo Boost)
2	LED de estado	7	Tecla de 45°C (Alta temperatura)
3	Tecla de apagado de ventilador	8	Tecla de 40°C (Temperatura media)
4	Área de información de la temperatura	9	Tecla de 34°C (Baja temperatura)
5	Botón de “Menú”	10	Enviar aire a temperatura ambiente

FUNCIONAMIENTO.


Para operar el equipo siga los siguientes pasos:

1. Conecte el equipo en un tomacorriente de grado hospitalario. El LED de estado debe iluminarse de color ámbar indicando que la unidad está en modo de espera.
2. Presione la tecla de encendido (presione nuevamente la tecla para volver al modo de espera), el LED debería cambiar a color verde y la pantalla se debe encender.



3. Posicione el equipo cerca al paciente y coloque la manguera en su posición bajo las sábanas del paciente.

4. Presione la tecla de temperatura correspondiente a la temperatura del aire que desea suministrar al paciente (34°C, 40°C o 45°C), esto iniciará el “modo de tratamiento”.

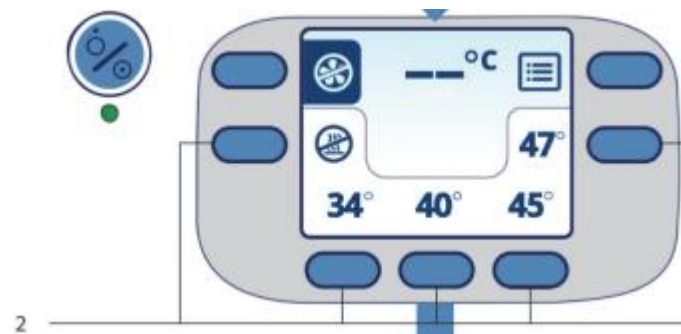

5. De ser necesario, presione la tecla de encender o apagar el ventilador para pausar el suministro de aire durante el tratamiento.



6. Para usar el modo “Boost” o “Impulso” presione la tecla de 47°C, esto iniciará el modo y pondrá un contador en pantalla el cual indicará el tiempo que queda para volver al modo

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Parte/Accesorio	Proceso
Superficie	Use un trapo limpio humedecido con un limpiador comercial no abrasivo o una solución de alcohol al 70% y agua. Ligeramente sacuda la superficie de la unidad de calentamiento.
Desinfección	Use un trapo suave empapado con una solución de cloro al 10% en agua del grifo. Limpie ligeramente la superficie de la unidad de calentamiento.

RECOMENDACIONES:

- Mantenga el equipo y accesorios libres de polvo y suciedad.
- Utilice solo los implementos recomendados para su limpieza.
- Salvo se indique lo contrario, no sumerja ningún componente del monitor en ningún líquido.
- No permita que el líquido se filtre a la carcasa.
- Inspeccione el equipo y accesorios reutilizables después de terminar la limpieza.
- Seguir procedimiento según lo establecido en la institución.
- Limpie la unidad después de cada uso.

ADVERTENCIAS:

- No rocíe, vierta o derrame ningún líquido sobre la unidad de calentamiento, accesorios, conectores, switches o aberturas en la superficie.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el equipo, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

Falla	Solución
Falla al encender el equipo	Revise la conexión del cable de poder de la unidad. Si el cable de poder esta correctamente conectado, una parte interna puede haber fallado. Reporte la falla.
Interferencia electromagnética entre la unidad y otros equipos	Intente aumentar la distancia entre la unidad de calentamiento y los demás equipos, reposicione los cables o conecte los equipos en diferentes tomacorrientes.
El filtro necesita ser reemplazado. 	No use la unidad mientras aparezca esta alerta. Reporte el equipo a mantenimiento para que se lleve a cabo el reemplazo del filtro por personal cualificado. ala

ALARMAS.

El equipo cuenta con dos tipos de alarma:

Alarmas de baja prioridad:

Aparecerá en pantalla el siguiente símbolo  seguido de dos tonos que se repiten constantemente. Esto indica una condición que no representa un riesgo de herir al paciente, pero requiere la atención del operador.

Para eliminar esta alarma presione la tecla indicada en la pantalla de alarma para apagar el equipo y posteriormente presione la tecla de “Encendido”. Si la alarma no desaparece deje de usar el equipo hasta que pueda ser reparado por personal cualificado.

Alarmas de alta prioridad:

Aparecerá el siguiente símbolo en pantalla  parpadeando, seguido de tres tonos sucesivos en intervalos decrecientes. Esta alarma indica una condición que tiene el riesgo de herir al paciente.

Deje de usar el equipo hasta que pueda ser revisado y reparado por personal cualificado.