

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MINI CENTRIFUGA	CÓDIGO: NA
	MARCA: GLOBE CIENTIFIC	VERSIÓN: 1
	MODELO: GCM-B	FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2022

USO DEL EQUIPO




Dispositivo portátil que se utiliza para la extracción de muestras de ADN/ARN, la sedimentación de componentes biológicos y para análisis bioquímicos y químicos de micro cubetas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Cuando emplee muestras con componentes tóxicos o material patológico deberá tomar las precauciones debidas cerrando herméticamente los tubos.
- Cuando no vaya a hacer uso del equipo por largos períodos de tiempo, asegúrese de que está desconectado de la red para evitar posibles accidentes.
- Procure que no entre ningún líquido en el interior de la centrífuga aunque éste se encuentre debidamente aislado.

PARTES DEL EQUIPO

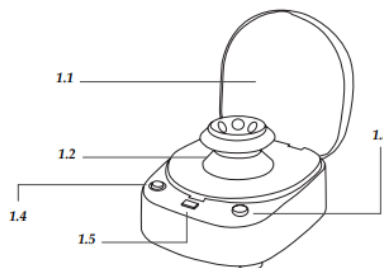

- 1.1 Tapa de la centrífuga
- 1.2 Cabezal de la centrífuga
- 1.3 Botón para apertura de la tapa
- 1.4 Interruptor ON/OFF
- 1.5 Botón para seleccionar velocidad requerida

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO



La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. No limpie el monitor con material abrasivo.
2. En caso de utilizar Klorkleen + Vital Care retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco.
3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo.
4. Llevar registro de limpieza y desinfección.

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO



1. Conecte el equipo a la red eléctrica AC
2. Accione el botón para apertura de la tapa
3. En caso de utilizar tubos de 0.5 o 0.2 mL coloque los adaptadores correspondientes en los orificios del cabezal.
4. Equilibre las cargas de los tubos de muestra. Nunca debe centrifugar un único tubo; si necesita centrifugar solamente 1 muestra, llene otro tubo con un volumen equivalente de agua para poder equilibrar el cabezal.
5. Asegúrese de que todos los tubos están bien cerrados e insértelos completamente en los orificios de manera que queden enfrentados entre sí según el siguiente esquema.



2 tubos



3 tubos



4 tubos



6 tubos

6. Seleccione la velocidad requerida
7. Cierre la tapa
8. Accione el botón de ON/OFF