


**BOMBA DE
INFUSIÓN hawk-i I**


**GUÍA
RÁPIDA**



CÓMO INSTALAR EL SET?

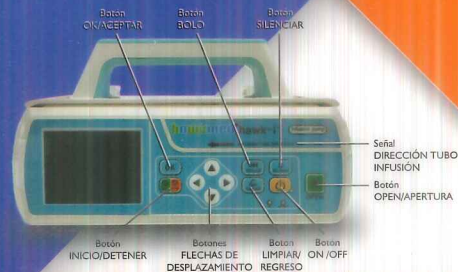

¡IMPORTANTE! No instalar el set de izquierda a derecha

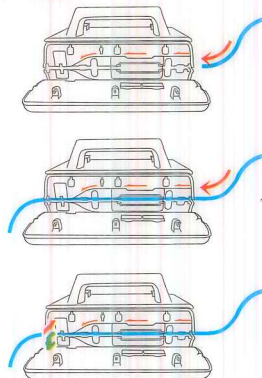

1. Mantener presionado el botón OPEN / APERTURA para abrir el frontal de la bomba
2. Completar la apertura halándolo suavemente
3. Verificar que la guía se encuentra libre de obstáculos
4. Ocluir el set de infusión con la NiproKey
5. Insertar la parte más delgada de la NiproKey en la ranura ubicada a la izquierda
6. Posicionar el set de derecha a izquierda siguiendo las señales grabadas
7. Realizar el cierre del equipo afrontando las dos partes con las manos

CÓMO DESINSTALAR EL SET?

1. Obturar manualmente el Clamp de Robert para causar oclusión total del fluido
2. Mantener presionado el botón OPEN / APERTURA para abrir el frontal de la bomba
3. Pulsar botón Antiflujo Libre
4. Halar el tubo suavemente hasta que sea liberado por completo
5. Realizar el cierre del equipo afrontando las dos partes con las manos
6. Verificar que no exista escape de líquido

¿CÓMO INICIAR LA INFUSIÓN?

MODO TASA

Encender el equipo	Mantener presionado el botón ON/OFF
Instalar Set	Ver instrucciones
Seleccionar Modo Infusión	Oprima el botón OK
Seleccionar Infusión Directa	Oprima el botón OK
Advertencia	Oprima el botón OK después de leer
Seleccionar Modo Tasa	Oprima el botón OK
Configurar Tasa	Oprima el botón OK
(Velocidad de infusión)	Desplace cursor blanco por las casillas de número
	Usar los botones de dirección arriba o abajo para modificar el número
	Oprima el botón OK
Cambio de datos	Use el botón de dirección abajo para ubicarse en VTBI
Configurar VTBI	Oprima el botón OK
(Volumen total a ser infundido).	Desplace cursor blanco por las casillas de número
	Usar los botones de dirección arriba o abajo para modificar el número
	Oprima el botón OK
Inicie Infusión	Oprima botón INICIO
Detener la Infusión	Oprima botón INICIO/DETENER