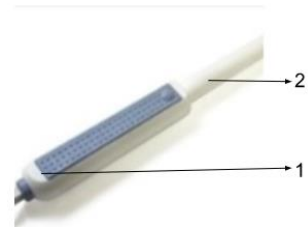


		GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: ULTRASONIDO ENDORECTAL		CÓDIGO: NA	
MARCA: MORPHEUS		VERSIÓN: 1	
MODELO: CTS-1500		FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2023	

USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		DETALLES DE LAS IMÁGENES	
  Dispositivo biomédico, usado para verificar y realizar un seguimiento de posibles anomalías en el recto y estructuras cercanas, permite visualizar fistulas, obstrucciones y tumores. Por medio, de diferentes ángulos y canales.		  1. Mango para sujetar el equipo 2. Sonda de ultrasonido		MARCADORES DE DISTANCIA:  1. Haga clic en la imagen en el primer punto 2. Mantenga pulsado y arrastre hasta el punto final que desee marcar la distancia 3. El punto inicial se denomina D1 y los adicionales inician en D2.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  • Profundidad permitida de a 3 Cm • Frecuencia de pulso de 10 MHz, 12MHz y 15 MHz. • Zona focal visualizada de 0.5 a 2 Cm • Punto focal de 1.6 Cm • Angulo de Scan 360º		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO  1. Abra el software Morpheus y seleccione comenzar 2. Seleccione la opción de crear nuevo paciente e ingrese los datos del mismo 3. Guarde los datos del paciente y seleccione la opción iniciar ultrasonido “Launch Real Time 360º) 4. Cubra la sonda de ultrasonido con gel conductor, y ponga el preservativo en el equipo hasta la parte final del mismo 5. Inserte la sonda con el paciente acostado sobre su lado izquierdo, con las rodillas flexionadas 6. Pulse el botón del software escanear para mostrar las imágenes anterior, posterior, superior e inferior en tiempo real respectivamente 7. Pulse el botón congelar para guardar los canales		MARCADORES DE PUNTO:  1. Haga clic en la imagen, verifique que aparezca una flecha con etiqueta P1 2. Repita el procedimiento para tener los punteros deseados	
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  Clasificación IIA de riesgo moderado.		MARCADORES DE CIRCULO:  1. Haga clic en la imagen, mantenga y arrastre el cursor al lado opuesto del círculo 2. El círculo se denomina C1 con la distancia y el área determinada 3. Repita el proceso para adicionales, los cuales serán nombrados como C2 en adelante.		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la Institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.	