

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MARCAPASOS EXTERNO	CÓDIGO: NA
	MARCA: OPYSKA	VERSIÓN: 1
	MODELO: PACE 101H	FECHA DE ELABORACIÓN: 11/04/2023

USO DEL EQUIPO



Equipo biomédico encargado de estimular el corazón a través de una vía externa transcutánea o percutánea. Está compuesto por un generador de estímulos conectado a unos electrodos que se aplican y son los encargados de transmitir el impulso eléctrico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




- Batería alcalina de 8 V
- Funcionamiento en rango normal de 17° a 33°C
- Modo de estimulación por demanda, asincrónica y frecuencia alta.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS



Clasificación IIB de alto riesgo.

PARTES DEL EQUIPO

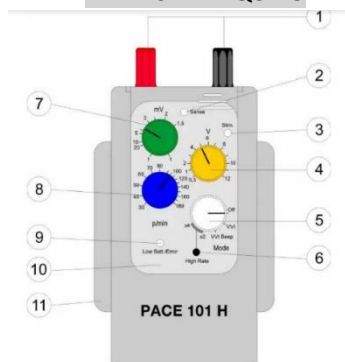

1. Conectores de cables de electrodos
2. Indicador de onda P-R sensibilidad
3. Indicador de pulso de estimulación
4. Perilla para ajuste de estimulación
5. Perilla para seleccionar MODO de trabajo y apagar equipo: VVI, VVI Beep, X2, X4.
6. Botón para estimular el modo básico
7. Perilla para ajuste de sensibilidad onda P-R
8. Perilla para control de frecuencia
9. Indicador de errores
10. Protección de seguro del equipo
11. Ranura para correa de brazo portátil
12. Compartimento para batería

MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

MODO A DEMANDA:



1. Establezca el equipo en el modo VVI o VVI Beep
2. Determine el umbral de detección
3. Establezca el valor de sensibilidad según su necesidad
4. Determine el umbral de captura cardiaca
5. Establezca el valor de la amplitud de la onda

MODO ASINCRÓNICO:



1. Para seleccionar el modo asincrónico, gire la perilla de sensibilidad completamente hacia a la izquierda en la posición 'f'.
2. Establezca el modo VVI, el dispositivo se cambiara al modo A00/V00
3. Determine el umbral de captura cardiaca
4. Ajuste el valor de amplitud de la onda.

MODO ESTIMULACIÓN DE FRECUENCIA ALTA:



1. Establezca el modo de X2 o X4
2. Ajuste la frecuencia del equipo según su necesidad

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la Institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.