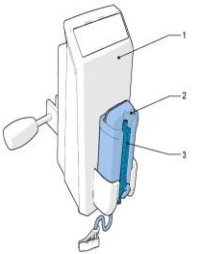
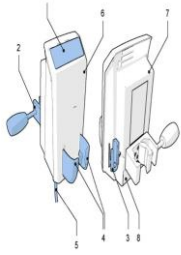
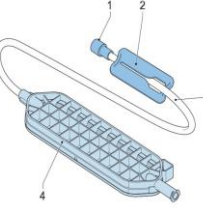


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CÓDIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: DÍA 28 MES 12 AÑO 2023			
Nombre del equipo:	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS Y SANGRE	Modelo:	FUIDO COMPACT	Riesgo del equipo:		
Marca:	THE 37 COMPANY			Clasificación del equipo:		
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		PRECAUCIONES		
El dispositivo se ha diseñado para suministrar líquidos calientes a un paciente. El Fuido Compact Standard Set se ha diseñado para adultos. Utilice el dispositivo para calentar: - Líquidos intravenosos cristaloides - Líquidos intravenosos coloides sintéticos - Concentrados de hematíes		 - Módulo de control (consulte Vista general del módulo de control [REF 650100] en la página 16) - Módulo de calentamiento (consulte Vista general del módulo de calentamiento [REF 650200] en la página 17) - Juego desechable (consulte Vista general de los juegos desechables en la página 17)		- Respete la normativa local. - Tenga cuidado de no dejar caer el dispositivo para reducir el riesgo de daños. - Cuando conecte o desconecte el cable de interfaz, asegúrese de que el enchufe de red esté desconectado de la toma de corriente.		
FUNCIONAMIENTO		 - Panel de control (consulte Vista general del panel de control en la página 16) - Abrazadera universal - Soporte de la cámara de gato - Soporte del módulo de calentamiento - Cable de suministro de alimentación - Cubierta frontal - Cubierta trasera - Trampilla		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - Para limpiar la superficie exterior del dispositivo, utilice un paño suave ligeramente humedecido con una solución de agua tibia y detergente suave o un desinfectante de hospital que no deje manchas. - Utilice una de las siguientes soluciones de limpieza: - alcohol isopropílico al 90 % (o 70 %) - solución de detergente suave - lejía de cloro diluida (30 mil de agua) - limpiadores con base de amoníaco - limpiadores con base de glutaraldehído al 2,4 % - peróxido de hidrógeno al 3 %		
- Conecte el cable de suministro de alimentación a la toma. El LED indicador de modo de espera/encendido del módulo de control pasa a estar de color naranja. - Pulse el botón de modo de espera/encendido (A). - Oirá un único pitido. - Los LED indicadores del módulo de control parpadearán una vez. - El LED indicador de modo de espera/encendido permanece en verde. - El LED indicador de estado del módulo de calentamiento pasa a estar de color naranja. 		- Desembale e inspeccione el juego desechable. - Conecte el juego de administración del hospital (A) al casete del juego desechable (B). - Saque el módulo de calentamiento del soporte del módulo de calentamiento. - Abra la cubierta deslizante (C) del módulo de calentamiento. - Ponga el casete del juego desechable (D) en el módulo de calentamiento. El casete solo encaja en un sentido. 		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SET  - Luer Lock (macho) - Abrazadera deslizante - Catéter para pacientes - Casete con Luer Lock (hembra)		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						