

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MAQUINA DE ANESTESIA	CÓDIGO: NA
	MARCA: GETINGE	VERSIÓN: 1
	MODELO: FLOW C / FLOW I	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2023

USO DEL EQUIPO



Dispositivo compuesto por elementos mecánicos, neumáticos y electrónicos, la cual tiene como finalidad administrar de manera segura por ventilación espontánea o mecánica, gases medicinales que permitan realizar una anestesia adecuada monitorizando al tiempo los signos vitales del paciente.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Modos de ventilación múltiple como: VCV, PCV, SIMV, PSV.
- Batería hasta de 90 minutos.
- Canister de cal sodada de 1.5 L
- Cilindros de respaldo de 2 o 4 yugos
- Vaporizadores compatibles de isoflurano, enflurano, sevoflurano, halotano, desflurano.

PARTES DEL EQUIPO


PARTE A:

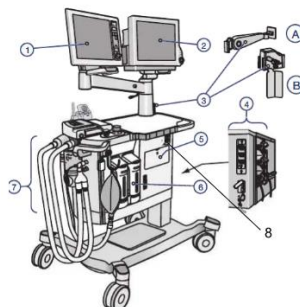

PARTE A:

1. Panel de control
2. Monitor de paciente
3. Soporte de seguridad
4. Conexiones externas
5. Ventilación emergencia
6. Unidad vaporizador
7. Sistema de respiración
8. Botón de ON/OFF

PARTE B:

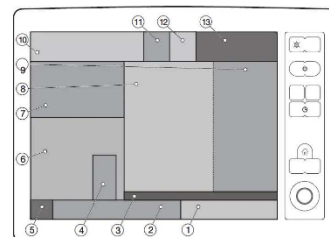


PARTE B:

1. Ajustes de ventilación
2. Ajuste de gases anestésicos
3. Ventana de ajustes
4. Mezclas de gases frescos
5. Valor de válvula APL
6. Área de medición de gases
7. Área de modo ventilatoria
8. Área de curvas
9. Área de teclas rápidas
10. Área de alarmas
11. Funciones de alarmas
12. Temporizador
13. Indicador de régimen

PRUEBAS DEL SISTEMA

La intervención del usuario no es requerida 100% en esta etapa. El sistema verifica las funcionalidades básicas del sistema: comunicación con los subsistemas, la integridad de la memoria interna y las conexiones de gas, mostrando un progreso de las mismas pruebas:

COMPROBACIONES QUE REQUIEREN INTERACCIÓN:

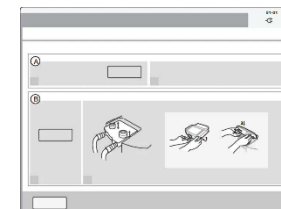

1. Compruebe manualmente la ducha de O₂
2. Inspeccione el funcionamiento de las válvulas unidireccionales inspiratorias e espiratorias

COMPROBACIONES AUTOMÁTICAS:



1. Pruebas internas
2. Comprobaciones de transductores de presión
3. Comprobaciones de válvulas de entrada
4. Comprobaciones de fugas
5. Comprobaciones de vaporizadores
6. Comprobaciones de alarmas técnicas
7. Resultados preliminares
8. Comprobaciones de modos ventilatorios

  	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MAQUINA DE ANESTESIA	CÓDIGO: NA
	MARCA: GETINGE	VERSIÓN: 1
	MODELO: FLOW C / FLOW I	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2023

PREPARACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	ALARMAS Y POSIBLES ERRORES	
1. Conecte el equipo a la red eléctrica AC 2. Conecte las mangueras de suministro de gas: Oxígeno y aire 3. Compruebe el funcionamiento de los manómetros de presión 4. Compruebe el funcionamiento del soporte de tubería plástica 5. Conecte el circuito respiratorio del paciente 6. Instale o compruebe el funcionamiento de la celda de oxígeno 7. Revise el estado de la cal del canister, si es necesario haga el cambio de la cal 8. Revise el estado de los vaporizadores 9 Encienda el monitor 10. Inicie las pruebas del sistema y siga las instrucciones que este le va indicando para las pruebas en caso de ser necesario.	La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  Clasificación IIB de alto riesgo. ADVERTENCIAS DEL EQUIPO  • Mantener el equipo conectado a la red eléctrica, la cual tenga conexión a tierra. • Revise que el equipo este correctamente conectado al suministro de gas. • Asegúrese que los vaporizadores se encuentren bien ajustados cuando se realicen las pruebas y antes de cada intervención. • No adopte controles de flujo a la fuerza. • No realice calibraciones de flujo cuando el equipo se encuentre operando NOTA: Es importante, aclarar que la formulación de esta guía rápida se hace para respaldo de uso de las maquinas de anestesia GETINGE FLOW C / FLOW I, no se hace distinción de los dos modelos en la guía, ya que solo cambian las características técnicas y físicas de espacios del equipo. Mas no cambia el funcionamiento.	PVR Demasiado alta/baja Disminuya o aumenta el ajuste de volumen o en caso de ser necesario ajuste los parámetros de las alarmas.	FiO2 Demasiado alto/baja Disminuya o aumente el flujo de gas de O2, compruebe si hay que cambiar el absorbente del paciente.
		Alarma de APNEA Aumente el volumen corriente o la frecuencia de respiración. En caso de ser necesario, aplique ventilación manual.	
		Volumen de APENA Compruebe el estado del paciente y compruebe si hay fugas en el circuito respiratorio.	
		Reemplazar trampa de agua El analizador de gas ha detectado que es necesario sustituir la trampa de agua.	
		Fugas excesivas La diferencia entre las presiones máxima y mínima durante la inspiración es demasiado escasa	

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. No limpie el monitor con material abrasivo.
2. En caso de utilizar desinfectantes líquidos, retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco.
3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo.
4. Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.

  	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MAQUINA DE ANESTESIA	CÓDIGO: NA
	MARCA: GETINGE	VERSIÓN: 1
	MODELO: FLOW C / FLOW I	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2023

MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

MODULO CONTROL POR VOLUMEN:

1. Seleccione el botón de la pantalla [Modo Vent]
2. Seleccione en el menú [VCV], y selecciones [Ajuste modo Ventilatorio]
3. Pulse el mando de control y ajuste los valores deseados.
4. Pulse el mando giratorio para confirmar Parámetros

Parámetro	Rango	Valor predeterminado
VT	20-1500 ml	500 ml
Frec	4-100 bpm	12 bpm
I:E	4:1-1:8	1:2
Pausa Insp.	5 ~ 60%	DES
Plimit	10-100 cmH2O	30 cmH2O
PEEP	DES, 4-30 cmH2O	DES

MODULO CONTROL POR PRESIÓN:

1. Seleccione el botón de la pantalla [Modo Vent]
2. Seleccione en el menú [MODO P], y selecciones [Ajuste modo Ventilatorio]
3. Pulse el mando de control y ajuste los valores deseados.
4. Pulse el mando giratorio para confirmar parámetros

MODULO VENTILACIÓN SINCRONIZADA:

1. Seleccione el botón de la pantalla [Modo Vent]
2. Seleccione en el menú [SIMV-VC], y selecciones [Ajuste modo Ventilatorio]
3. Seleccione [OK] y ajuste los valores de [RAMPT] [TRIGGER].
4. En caso de ser necesario, ajuste los demás valores deseados.
5. Pulse el mando giratorio para confirmar parámetros.

Parámetro	Rango	Valor predeterminado	Modo SIMV
VT	De 40 a 1.500 ml	500 ml	SIMV-VC
Pinp	De 5 a 60 cmH2O	15 cmH2O	SIMV-VC
% exp	5-60 %	25%	SIMV-VC
Frec. SIMV	De 4 a 60 bpm	10 bpm	SIMV-VC
Ming	De 0,4 a 5 s	1,5 s	SIMV-VC
RangiaT	0-2 s	0,5 s	SIMV-VC
Plimit	De 10 a 100 cmH2O	30 cmH2O	SIMV-VC
APap	De 5 a 60 cmH2O	15 cmH2O	SIMV-VC
PEEP	Desactivado, 4 a 30 cmH2O	DES	SIMV-VC
Intervalo de activación	De 5 a 90%	25%	SIMV-VC
Trigger	De -20 a -1 cmH2O	1 l/min	SIMV-VC
Nivel final. insp VPS	De 5 a 60%	25%	SIMV-VC

MODULO PRESIÓN DE SOPORTE:

1. Seleccione el botón de la pantalla [Modo Vent]
2. Seleccione en el menú [PSV], y selecciones [Ajuste modo Ventilatorio]
3. Pulse el mando de control y ajuste los valores deseados.
4. Pulse el mando giratorio para confirmar parámetros

CONEXIÓN PARA MEDICIÓN DE CO2

1. Una el colector de agua al fijador del colector
2. Conecte e instale el módulo de CO2
3. Verifique su correcto funcionamiento.

EN CASO DE ACTIVACIÓN DE ALARMAS

1. Compruebe el estado del paciente
2. Determine el parámetro de alarma
3. Identifique el origen de la alarma
4. Realice las acciones pertinentes para eliminar la alarma

CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE FLUJO

1. Asegúrese de que la presión del suministro de gas es normal
2. Desactive todas las entradas de gas fresco
3. Coloque el ventilador en posición de ventilación mecánica o manual
4. Retire el fuelle, verifique que todo esté funcionando de buena manera e insértese nuevamente
5. Conecte la pieza en Y
6. Extraiga el vaso de colector de agua
7. Seleccione la tecla de [MANTENIMIENTO], y elija la opción [CALIBRAR SENSOR FLUJO], seleccione iniciar
8. Verifique que el equipo pase las pruebas de verificación