

LAMPARA DE FOTOTERAPIA

XHZ 90L



1

Lámpara de fototerapia, destinada a pacientes con bilirrubina neonatal. Este dispositivo es compatible con todas las incubadoras.

2

CARACTERISTICAS



1. Posee luz fluorescente azul y LED

2. Temporizador para contabilizar y controlar el tiempo de fototerapia



Si el modelo es móvil:

- El ángulo del módulo de la lámpara se puede ajustar

Si el modelo es inmóvil:

- La altura del módulo de la lámpara se puede ajustar
- Las ruedas se pueden bloquear

3

ACCESORIOS LAMPARA MÓVIL



1. Módulo principal
2. Temporizador
3. Interruptor de encendido
4. Panel protector
5. Columna de lámpara
6. Barra de ajuste de altura
7. Botón de bloqueo de posición
8. Base con ruedas

3

ACCESORIOS LAMPARA INMÓVIL



1. Módulo principal
2. Temporizador
3. Interruptor de encendido
4. Panel protector
5. Columna de lámpara

ADVERTENCIA



- NO usar el equipo dentro de un campo electromagnético alto ni en presencia de gases que puedan dar lugar a combustión.
- NO aplicar soluciones inflamables al equipo

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1

PREPARAR LIMPIADOR

Klorkleen + Vital Care

1. Realizar solución limpiadora dependiendo de la cantidad deseada:



Para 1 pastilla agregar 1 Litro de agua

Para 1/2 pastilla agregar 500 ml de agua

2. En el recipiente de Vital Care con las toallitas, aplicar la solución desde el centro hacia la periferia.

3. Tapar el balde y rotularlo

4. Esperar 20 minutos



2


PARA LIMPIAR EQUIPOS BIOMÉDICOS



Verifique que el equipo esté desconectado, que no tenga cables pelados o puntos de riesgo eléctrico.



Tomar un pañito de Vital Care preparado con Klorkleen y limpiar la superficie del equipo, incida de zonas de difícil acceso.

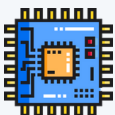

A la hora de realizar la limpieza tener cuidado con tarjetas o componentes electrónicos.

ADVERTENCIA



Inhalación

Ingestión

Contacto con la piel

Contacto con los ojos