




Av. Troncal de Occidente # 1 - 50 Bodega 31
Centro Empresarial El Portal Mosquera - Cundinamarca
Av. Calle 19 # 4 - 88 Oficina 302 Bogotá D.C - Colombia
Tel: (57 - 1) 8944335 - 3208598060
www.mequm.com

GUIA RAPIDA FLUJOMETRO

Identificación de partes:

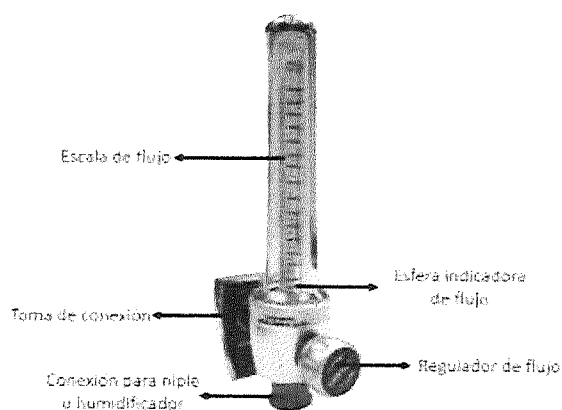

Modo de empleo:

1. Verifique que el gas a suministrar sea el indicado en las marquillas que trae el flujómetro así:
 - Flujómetro de color amarillo se debe utilizar con aire comprimido
 - Flujómetro de color verde se debe utilizar con oxígeno.
2. Garantice la correcta instalación y aseguramiento del equipo a la conexión de pared
3. Antes de usar el equipo con el paciente, verifique que los accesorios estén totalmente limpios y desinfectados
4. Cerciórese de ajustar el flujo adecuado mediante la esfera indicadora
5. verifique el flujo continuo, de no ser así, revise las conexiones.