

Control del sistema de anestesia

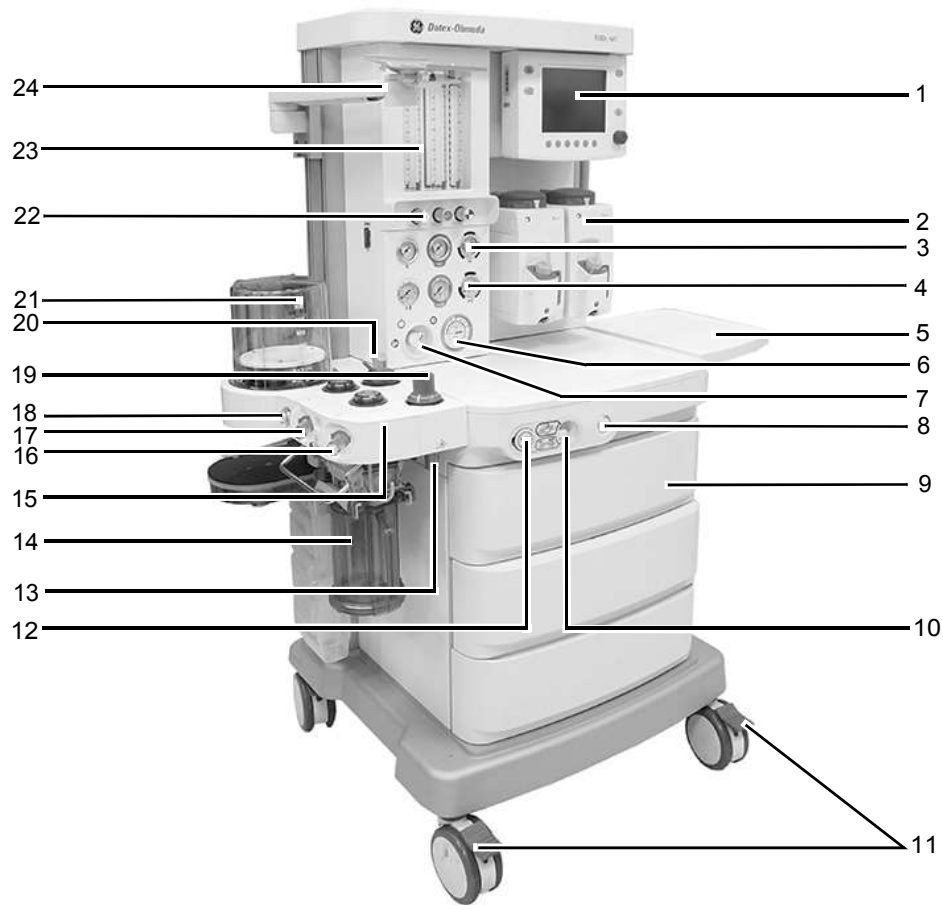


Figura 2-1: Vista frontal

Elemento de la Figura 2-1			
1	Pantalla del ventilador	13	Puerto para la bolsa
2	Vaporizador	14	Recipiente absorbente
3	Manómetro de la tubería (fila superior)	15	Circuito de respiración
4	Indicadores de presión del cilindro (fila inferior)	16	Puerto de inspiración
5	Estante volteable (opcional)	17	Puerto de espiración
6	Manómetro de Pva	18	Puerto de oclusión
7	Conmutador Encendido/En espera	19	APL
8	Botón de purga de O2	20	Conmutador Bolsa/Vent
9	Cajón	21	Carcasa del fuelle
10	Conmutador ACGO (opcional)	22	Controles de flujo
11	Rueda con freno (freno independiente en todas las ruedas)	23	Medidor de flujo
12	Puerto de ACGO (opcional)	24	Brazo de montaje (opcional)

9100c NXT

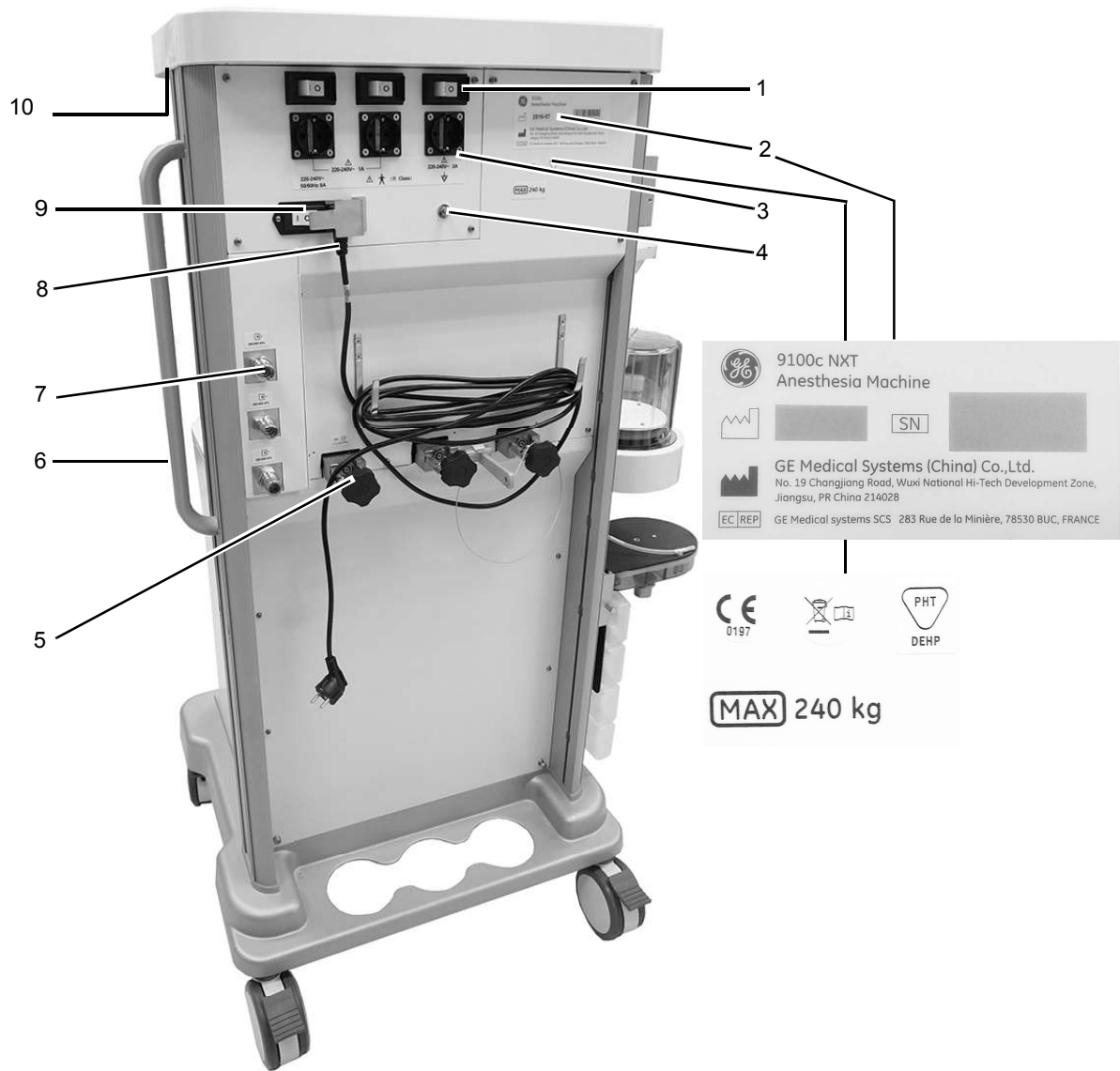


Figura 2-2: Vista posterior

Elemento de la Figura 2-2			
1	Disyuntor de salida (opcional)	6	Asa
2	Placa de datos	7	Entrada de la manguera
3	Salida eléctrica (opcional)	8	Entrada de red eléctrica
4	Pasador equipotencial	9	Disyuntor del sistema
5	Mango de la horquilla (opcional)	10	Conmutador de la luz de tareas

Controles del vaporizador

El sistema puede usar vaporizadores Tec™ 7. Consulte el manual de operación y mantenimiento del vaporizador para obtener información más detallada sobre el vaporizador.

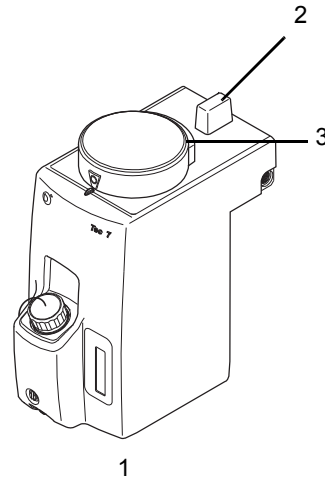
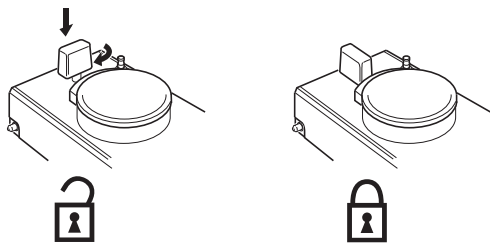
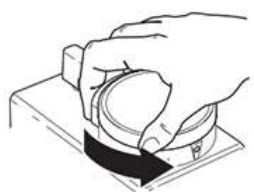


Figura 2-3: Controles del vaporizador

Elemento de la Figura 2-3		Descripción
1	Tec 7	
2	Palanca de bloqueo	Gire la palanca completamente en sentido de las agujas del reloj para bloquear el vaporizador en su posición. 
3	Control de concentración y liberación	Empuje el mecanismo de liberación y gire el control de concentración para ajustar la concentración del agente. 

Instalación del vaporizador

ADVERTENCIA

- Use solamente el vaporizador Tec 7. Consulte el Manual de referencia del usuario del vaporizador Tec 7 para obtener más información.
- No utilice ningún vaporizador que deje suelto el colector cuando la palanca de bloqueo esté en la posición de bloqueo.
- No utilice este sistema de anestesia si se puede encender más de un vaporizador a la vez.
- Los vaporizadores electrónicos no se ajustarán correctamente a menos que el cable de alimentación pase por el canal de la parte inferior del vaporizador.

ADVERTENCIA

Antes de instalar un vaporizador en el colector, compruebe que la junta tórica de la válvula del puerto del colector esté intacta y que no haya partículas extrañas en las superficies de contacto. Las juntas tóricas dañadas o las partículas extrañas en las superficies de contacto pueden provocar fugas.

Procedimiento de instalación del vaporizador

1. Asegúrese de que la parte superior del vaporizador está en posición horizontal. En caso contrario, extraiga el vaporizador y vuelva a instalarlo.
2. Ajuste las palancas de bloqueo del vaporizador en la posición de bloqueo.
3. Intente levantar todos los vaporizadores tirando hacia arriba del colector en lugar de presionando hacia delante. No gire el vaporizador sobre el colector.
4. Si el vaporizador se levanta del colector, vuelva a instalarlo y repita los pasos 1, 2 y 3. Si el vaporizador se levanta una segunda vez, no use el sistema.
5. Intente encender más de un vaporizador al mismo tiempo:
 - Pruebe todas las combinaciones posibles.
 - Si se enciende más de un vaporizador al mismo tiempo, vuelva a instalarlos y repita la prueba.
6. Realice una **Comprobación completa** tras la instalación para comprobar si hay fugas en el vaporizador.

ACGO (opcional)

El flujo de gas fresco se dirige a través de la salida auxiliar de gas común (ACGO) de la parte frontal del sistema cuando el conmutador correspondiente está en la posición ACGO. La ventilación mecánica no está disponible cuando se utiliza un circuito auxiliar de respiración manual con gas fresco desde la ACGO. El conmutador BTV, la válvula APL y la bolsa no forman parte del circuito auxiliar. La monitorización de volumen, presión y O₂ no está disponible.

Importante

Utilice un monitor de O₂ externo si va a emplear un circuito de respiración en la ACGO.

No use un ventilador externo en la ACGO. No use la ACGO para accionar ventiladores externos ni para la ventilación a chorro.

Consulte “Evacuación” en la sección “Configuración y conexiones” para recibir más información sobre las conexiones.

ADVERTENCIA

La presión máxima en la ACGO puede ser de hasta 125 cmH₂O.

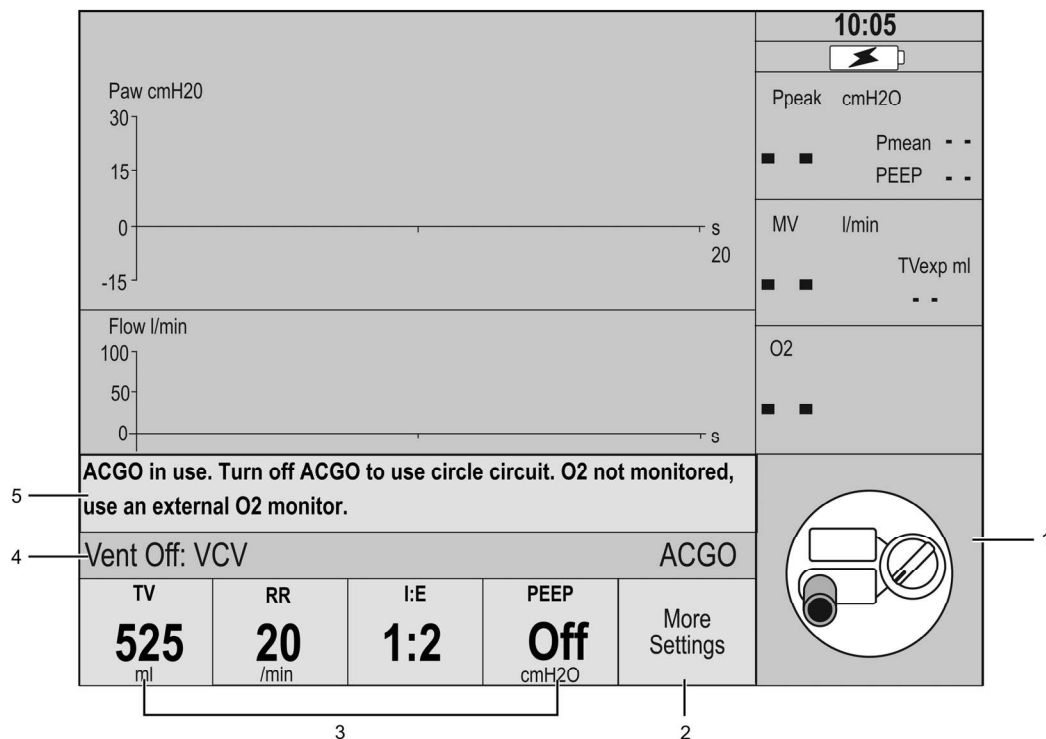


Figura 2-4: Pantalla de ACGO (Salida auxiliar de gas común, por sus siglas en inglés)

Elemento de la Figura 2-4			
1	Estado de ACGO	4	Estado de ventilación
2	Más ajustes	5	Mensaje de instrucciones
3	Ajustes del ventilador		

Evacuación desde un circuito auxiliar de respiración manual

Evacue los gases del tubo si utiliza un circuito de respiración manual con N₂O o anestésicos volátiles.

Hay una entrada auxiliar disponible en el AGSS. Dispone de una conexión hembra para su uso con un conector macho de 30 mm - 30 mm (o un conector macho de 30 mm - 19 mm) bajo el sistema de respiración. No utilice estos conectores como salida para el flujo de escape.

La entrada auxiliar resulta conveniente para el freno de aire de las unidades de AGSS. Se dispone de un depósito que recoge los flujos de escape superiores al flujo de extracción.

En todas las unidades de sistemas de evacuación de gases anestésicos se debe utilizar un tubo de evacuación separado desde el circuito auxiliar de respiración manual hasta el punto de eliminación.

Controles del ventilador

Los controles del ventilador incluyen teclas táctiles, pantallas de menú y una perilla de control. El conmutador del sistema ofrece funciones de alimentación para la pantalla del ventilador. El conmutador BTV inicia y detiene la ventilación mecánica.

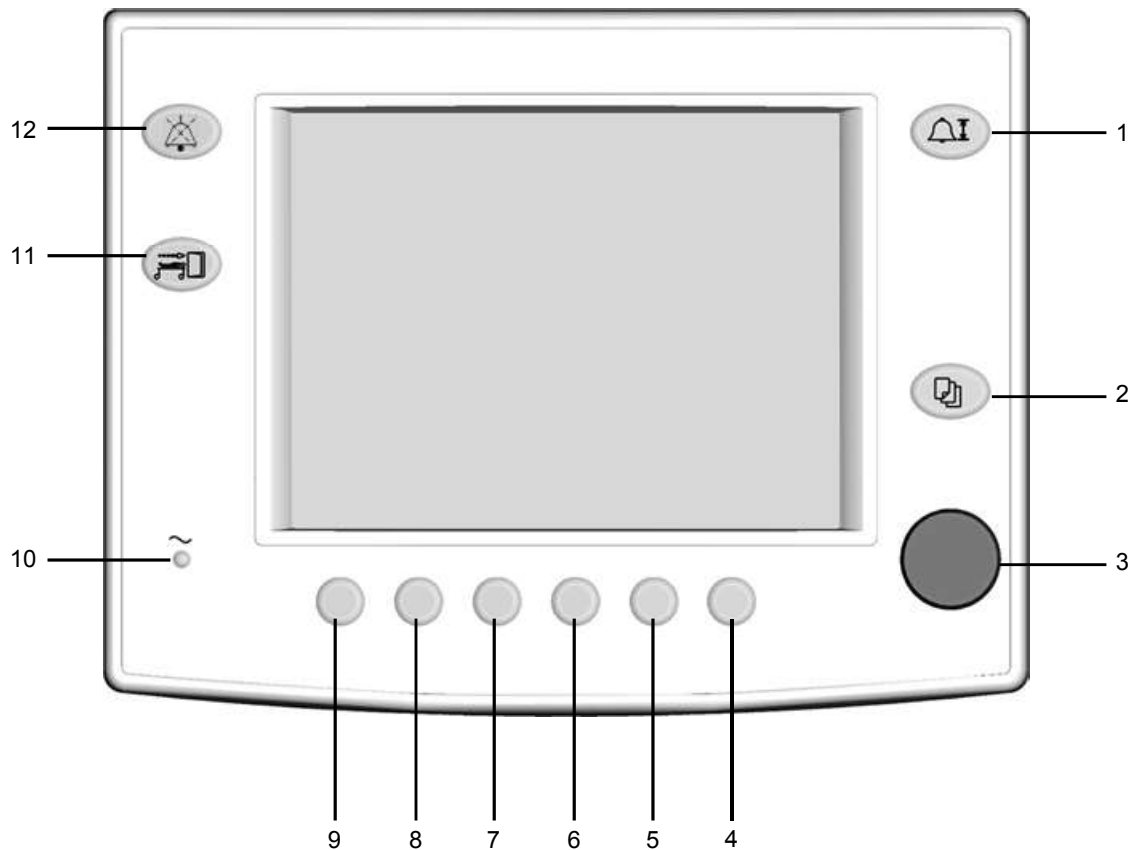


Figura 2-5: Controles del ventilador

Elemento de la Figura 2-5			
1	Tecla de configuración del límite de alarma	7	Tecla de selección de relación I:E o Tinsp
2	Tecla Menú	8	Tecla de selección de frecuencia respiratoria
3	Perilla de control	9	Tecla de selección de volumen tidal (VT), presión de vías respiratorias (Pinsp) o Psoporte
4	Tecla de espirometría	10	Indicador de red eléctrica
5	Tecla de acceso a Más ajustes	11	Tecla Finalizar caso
6	Tecla de selección de PEEP	12	Tecla Pausa de audio

Pantalla del ventilador

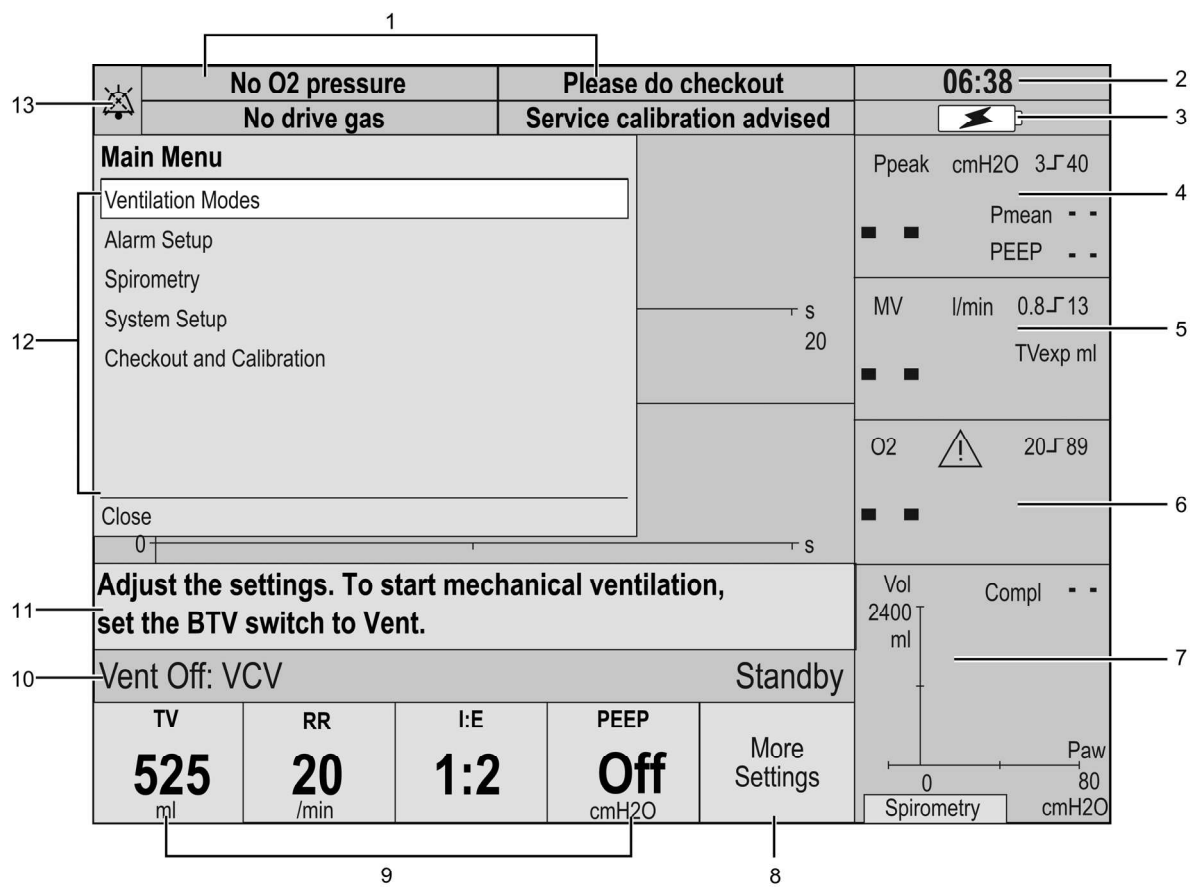


Figura 2-6: Vista normal

Elemento de la Figura 2-6			
1	Campo de mensajes de alarma	8	Más ajustes
2	Campo de hora	9	Ajustes de ventilación
3	Tipo de fuente de alimentación	10	Estado de ventilación mecánica
4	Información de Pva	11	Mensaje de instrucciones
5	Información de VM	12	Campo de onda
6	Información del porcentaje de oxígeno	13	Indicador de pausar alarma
7	Campo de espirometría		


Uso de los menús

Pulse la tecla de menú para mostrar el **Menú principal**. Utilice la perilla de control para navegar por el menú. La pantalla vuelve a la vista normal 25 segundos después de la última acción.

En los ejemplos siguientes se describe cómo utilizar los menús:


Paso 1

Pulse la tecla de menú para ver el **Menú principal**.

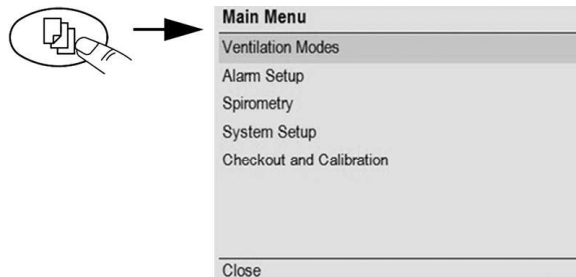


Paso 2

Gire la perilla de control para seleccionar el elemento del menú principal.

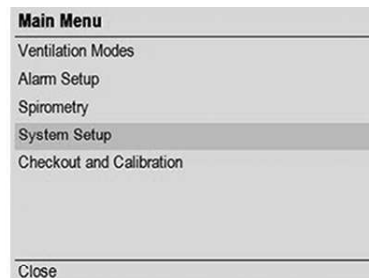

Paso 3

Pulse la perilla de control para ver la pantalla secundaria. Gire la perilla para resaltar el elemento de menú deseado y púlsela para confirmar.

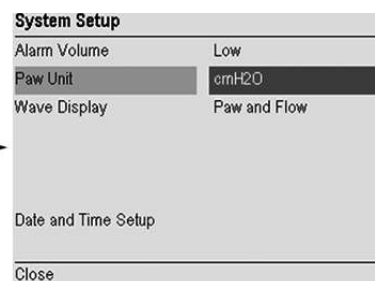

Paso 4

Gire la perilla de control para cambiar el ajuste.



Paso 5

Pulse la perilla de control para guardar el cambio.



Paso 6

Seleccione **Cerrar** y pulse para confirmar. También puede pulsar la tecla de menú para regresar a la pantalla normal.



Estructura de los menús

En el diagrama siguiente se describe la estructura de los menús, incluidas las funciones opcionales.

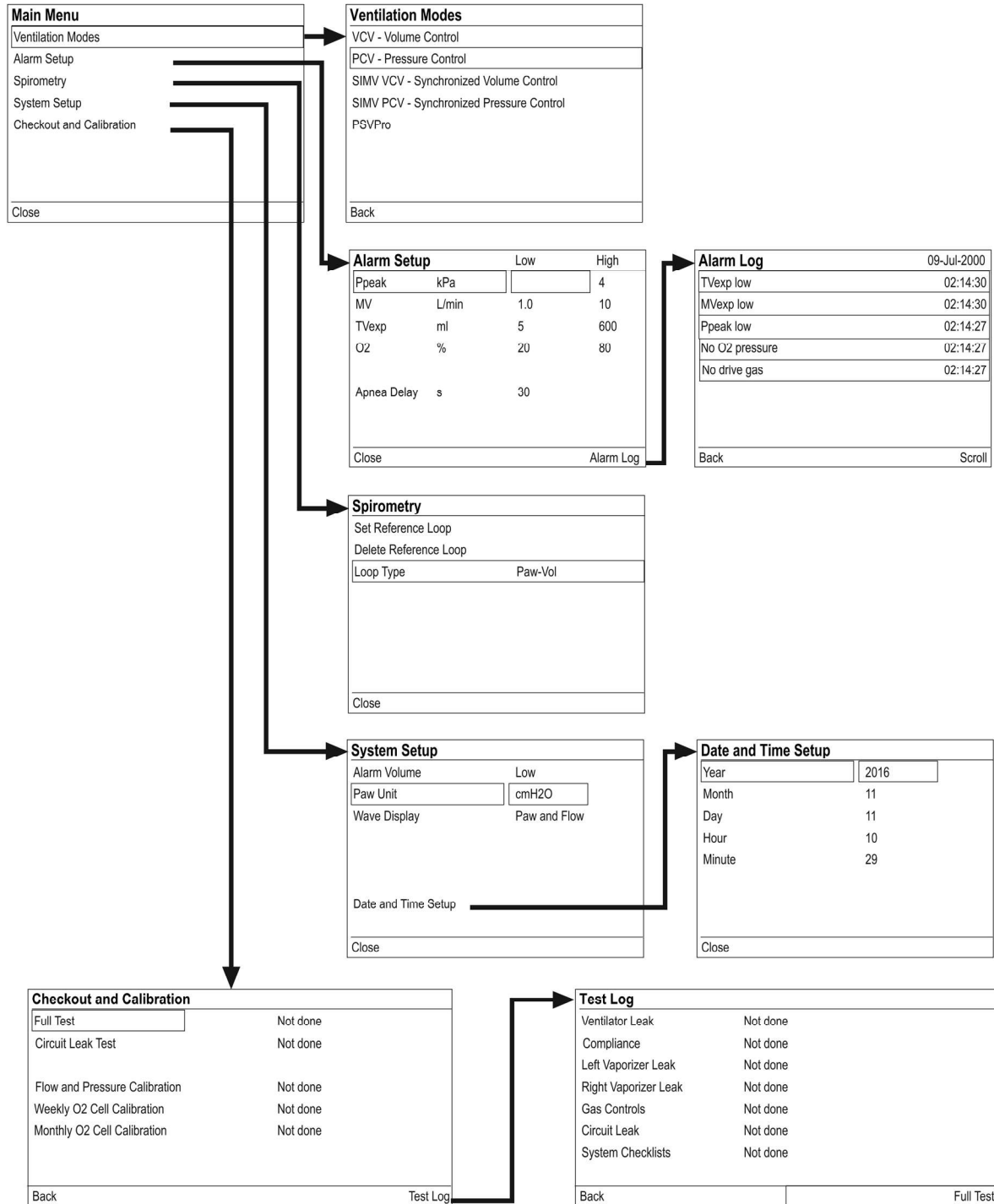


Figura 2-7: Estructura de los menús.

Antes de cada paciente

- ☐ Compruebe que el equipo de emergencia necesario esté disponible y en buenas condiciones.
- ☐ Compruebe que el equipo no esté deteriorado y que los componentes estén bien instalados.
- ☐ Compruebe que los suministros de gas estén conectados y los cilindros instalados (si corresponde).
- ☐ Compruebe la instalación del vaporizador.
 - Asegúrese de que la parte superior de cada vaporizador esté en posición horizontal (que no esté inclinada). Ajuste el mando de nivelación del vaporizador en caso necesario.
 - Asegúrese de que cada vaporizador esté bloqueado y no pueda extraerse.
 - Compruebe que las alarmas y los indicadores funcionan correctamente.
 - Asegúrese de que no puede encenderse más de un vaporizador al mismo tiempo.
 - Asegúrese de que los vaporizadores se han llenado correctamente.

Para obtener instrucciones más detalladas sobre la instalación del vaporizador, consulte *“Instalación del vaporizador”* en la sección *“Controles y menús del sistema”*.

- ☐ Compruebe que el circuito de respiración está conectado correctamente, no está dañado y el sistema de respiración contiene absorbente suficiente.
- ☐ Realice una **Comprobación completa** desde el menú **Comprobación** al menos una vez al día.
- ☐ Seleccione **Comprobación** y realice una **Comprobación de fuga en circuito** entre caso y caso.
- ☐ Ajuste los límites adecuados de alarma y control, según el caso.
- ☐ Compruebe que las alarmas y los indicadores funcionan correctamente.