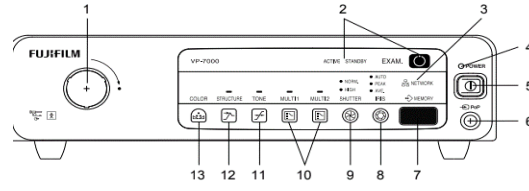
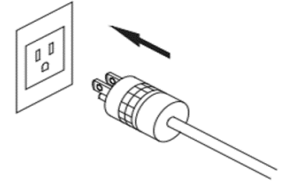
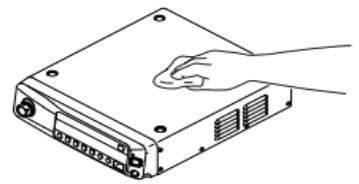


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001												
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: <table border="1"> <tr> <td>PAGINA</td> <td>01</td> <td>DE</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>2</td> <td>MES</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AÑO</td> <td colspan="2">2024</td> </tr> </table>		PAGINA	01	DE	01	DÍA	2	MES	01	AÑO		2024
PAGINA	01	DE	01												
DÍA	2	MES	01												
AÑO		2024													
Nombre del equipo:	VIDEOPROCESADOR	Modelo:	VP-7000												
Marca:	FUJIFILM		Riesgo del equipo: IIA												
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO											
Es un dispositivo medico utilizado en cirugia para procedimientos con endoscopio, ofrece imágenes nitidas y claras, mejora la deteccion de lesiones y caracterizacion.				1. Revise el equipo antes de usar 2. Conecte el equipo y accesorios 											
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Panel frontal													
Salidas Digitales		1. Conector electrico		3. Encienda videoprocesador y fuente de luz											
HD:SDI:HDTV 1080i		2. Tecla de encendido y de apagado del endoscopio		4. Recuperando la configuración del usuario.											
DVI 1080 x 1024p		3. Lampara indicadora de acceso a la red		5. Registre o edite los datos del paciente											
Ethernet: 100 / 10 Base para DICOM		4. Lampara indicadora de encendido		5. Verifique la informacion en la pantalla del monitor											
Salidas Analogas		5. Tecla para encender/apagar la fuente de alimentación		7. Verificar la imagen endoscópica. Cambiar escenarios de observación.											
S-Vídeo, RGB TV, Video Compuesto		6. Conector pop		LIMPIEZA Y DESINFECCION											
Endoscopios Compatibles		7. Ranura de memoria/acceso a la memoria		La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%. 											
Endoscopio Series 700/600/500		8. Tecla de modos iris: AUTO, PEAK y AVE													
Potencia de Alimentación		9. Tecla de velocidad de obturacion													
Voltaje: 100 - 240 VAC		10. Multi 1/Multi 2: A cada tecla se le asigna una funcion													
Frecuencia: 50 - 60HZ		11. Tecla para activar/desactivar la funcion de tono													
Consumo de Corriente: 1.2 - 0.7 A		12. Tecla para activar/desactivar el enfasis de estructura													
		13. Tecla de ajuste de color													
		PRECAUCIONES													
		Antes de usar este producto lea el manual de operaciones, de lo contrario no hacerlo podria terminar en lesiones o daños.													
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:															
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.															
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica															
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo															
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.															
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describira la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.															
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas															
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.															