

CUNA DE CALOR RADIANTE

CBW - 1100



1

Cuna de calor radiante con soporte móvil ajustable diseñado para una estabilidad y transporte equilibrado. Entre sus funciones está el calentamiento y el control computarizado. Permite trabajar con el paciente en situaciones de cuidados crónicos o intensivos en la sala de operaciones, la sala de partos o la sala de recién nacidos.

2



La indicación de alarma es una luz parpadeante y un sonido

Alarma de seguridad

Se pueden activar por:


- falta de energía
- falta del sensor
- temperatura alta/baja en piel o aire

3

Panel de control computarizado



4

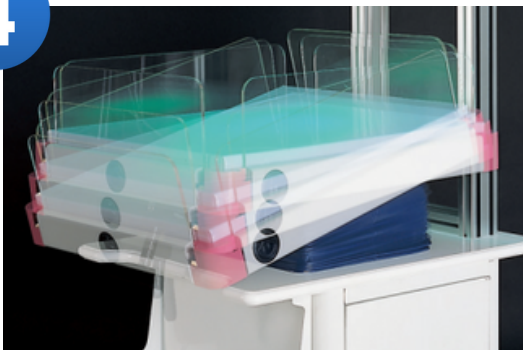

La plataforma del colchón se puede inclinar 0° - 10° en sentido horizontal

5



Si se desea realizar un procedimiento con rayos x, se debe girar la capota en un ángulo de 90° a ambos lados.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1

PREPARAR LIMPIADOR

Klorkleen + Vital Care

1. Realizar solución limpiadora dependiendo de la cantidad deseada:



Para 1 pastilla agregar 1 Litro de agua

Para 1/2 pastilla agregar 500 ml de agua

2. En el recipiente de Vital Care con las toallitas, aplicar la solución desde el centro hacia la periferia.

3. Tapar el balde y rotularlo

4. Esperar 20 minutos



2


PARA LIMPIAR EQUIPOS BIOMÉDICOS



Verifique que el equipo esté desconectado, que no tenga cables pelados o puntos de riesgo eléctrico.



Tomar un pañito de Vital Care preparado con Klorkleen y limpiar la superficie del equipo, incida de zonas de difícil acceso.

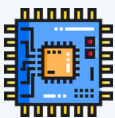

A la hora de realizar la limpieza tener cuidado con tarjetas o componentes electrónicos.

ADVERTENCIA



Inhalación

Ingestión

Contacto con la piel

Contacto con los ojos