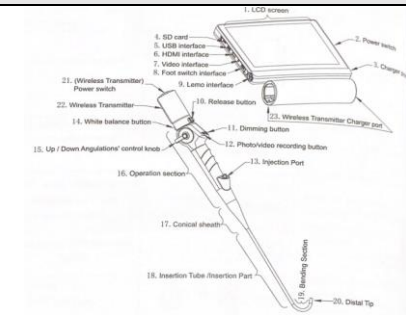
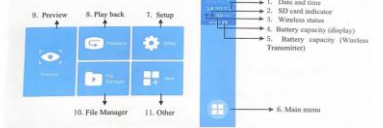


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA 01	DE 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA 15	MES 03	AÑO 2023
Nombre del equipo: Ureterorenoscopia digital flexible	Modelo: UF28	Riesgo del equipo: IIA				
Marca: Visual Medical	Clasificación del equipo: Diagnostico					
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO	PARTES DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO			
						
Dispositivo medico de diagnóstico ,observación , fotografía y tratamiento de uretra , la pelvis renal y la vejiga en adultos	1. Pantalla LCD 2. Interruptor de encendido 3. Tarjeta CD 4. Tarjeta CD 5. Interfaz USB 6. Interfaz HDMI 7. Interfaz de video 8. Interfaz de interruptor de pie 9. Interfaz lemo 10. Boton de liberación 11. Boton de atenuación 12. Boton de grabación de foto/video 13. Puerto de inyección 14. Boton de balance de blancos 15. Perilla control de angulaciones 16. Sección de operacion 17. Vaina loca 18. Tubo de insecion 19 Seccion de fleccion		20. Punto distal 21. Transmisor inalambrico 22. Transmisor inalambrico 23. Puerto del cargador inalambrico			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO			
Campo de vision: 120°+ 120% Profundidad 3mm-150mm Direccion interior del canal de succion: 01,2mm Diametro exterior del tubo de insecion: 02,8mm Angulaciones : Arriba 275°, Abajo 275°	1. Limpieza previa con gasa sin pelusa con solucion limpiadora 2. Pruebas de fuga 3. Limpieza manual del equipo con lavado ezimatico 4. Enjueague y secado de la limpieza manual con agua desionizada 5. Desinfeccion del equipo con solucion desinfectante a 20° C 6. Enjueague y secado despues de la esterilizacion con agua desionizada junto con una toalla esterelizada		1. Fecha y Hora 2. Indicador de tarjeta SD 3.Estado inalambrico 4. Capacidad de la bateria (Pantalla) 5. Capacidad de la bateria(Inalambrica transmisor) 6. Menu principal 7. Configuracion 8. Reprodcir 9. Vista previa 10. Administrador de archivos 11. Otros			
PRECAUCIONES GENERALES	1. No dejar golpear la punta distal del endoscopio		1. Preparacion del equipo tomando en cuenta la proteccion personal gafas, mascarilla, ropa resistente 2.Realizar las conexiones entre el endoscopio y el monitor del equipo ya sea por cable o inalambrico 3. Revisar en el monitor configuracuion del monitor 3. Lubrique e Inserte el endoscopio en el cuerpo del paciente realizar 4. Retire el endoscopio con cuidado y proceda a realizar los procedimientos de limpieza y desinfeccion			
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describira la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						