

|                                                                                   |                                                                            |                         |                |               |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|------------|--|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |                |               |            |  |
|                                                                                   |                                                                            |                         | <b>VERSIÓN</b> | <b>PÁGINA</b> | <b>DE</b>  |  |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b>     | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |  |
|                                                                                   |                                                                            |                         |                |               |            |  |



## ELECTROCARDÍOGRAFO


**MARCA:** GENERAL ELECTRIC  
**MODELO:** MAC 600

### Recomendaciones antes de usar

- Asegúrese de que el equipo haya cargado totalmente la batería, este proceso lleva de 3 a 4 horas.
- Realice una inspección visual para asegurarse que el equipo no presenta daños visibles y los cables están libres de dobleces.
- Conecte el cable del paciente al equipo.
- Asegúrese de que el equipo este correctamente conectado al fluido eléctrico.
- Asegúrese que se haya cargado el equipo con el papel de impresión térmico.



| No. | Nombre                    | No. | Nombre                                  |
|-----|---------------------------|-----|-----------------------------------------|
| A   | Impresora                 | C   | Teclado                                 |
| B   | Pantalla de visualización | D   | Conector de entrada de la señal del ECG |

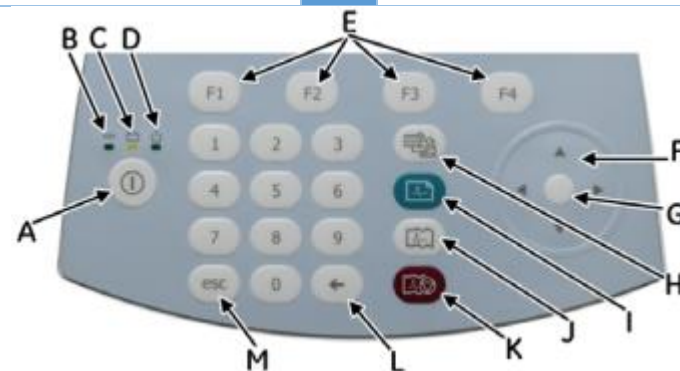


| No. | Nombre                                    | No. | Nombre                  |
|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------|
| A   | Encendido/apagado                         | H   | Derivaciones            |
| B   | Indicador conexión a red eléctrica        | I   | ECG                     |
| C   | Estado de la batería                      | J   | Ritmo                   |
| D   | Indicador de que el equipo está conectado | K   | Detener                 |
| E   | Selección de opciones en pantalla         | L   | Retroceso               |
| F   | Teclado de flechas                        | M   | Volver al menú anterior |
| G   | Intro                                     |     |                         |

|                                                                                   |                                                                            |                         |            |               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |            |               |            |           |
|                                                                                   |                                                                            | <b>VERSIÓN</b>          |            | <b>PÁGINA</b> |            | <b>DE</b> |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b> | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |           |

## Colocación de electrodos:


Coloque los electrodos siguiendo las figuras a continuación:

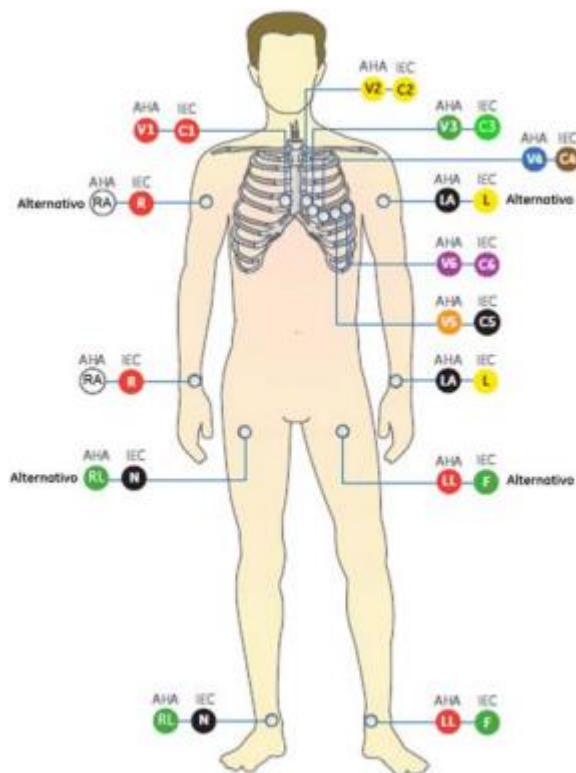

Correcto



Incorrecto


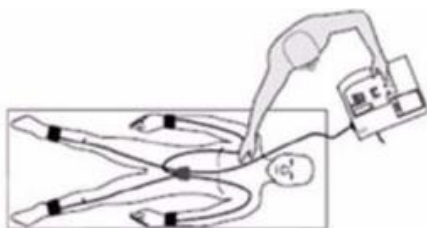


Correcto

## TOMAR ECG:

Para llevar a cabo una grabación de ECG siga los siguientes pasos:

1. Encienda el dispositivo.
2. Presione la tecla “F1” para acceder a la pantalla de detalles del paciente.
3. Ingrese los detalles del paciente usando el teclado y las flechas. Para confirmar los datos, pulse el botón con el círculo blanco en el centro del teclado de flechas.

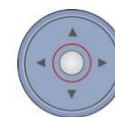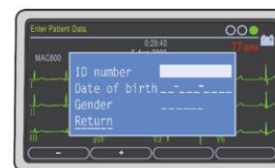

4. Para ver la calidad del ECG, revise el indicador de trazo que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Verde simboliza buena conectividad con la piel del paciente, naranja o rojo indican interferencia y/o posible desconexión de algún cable.



5. Para capturar el ECG, presione la tecla de “Adquisición de ECG” .
6. Si desea guardar el ECG medido en la tarjeta SD, presione el botón “F3”.
7. Si desea imprimir el ECG medido, presione la tecla “F1” después de completar el proceso de guardado.
8. Si desea repetir el ECG, presione la tecla “F4”.
9. Apague el equipo y remueva los cables del paciente.

|                                                                                   |                                                                            |                         |            |               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |            |               |            |           |
|                                                                                   |                                                                            | <b>VERSIÓN</b>          |            | <b>PÁGINA</b> |            | <b>DE</b> |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b> | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |           |

## LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

| Parte/Accesorio                              | Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficies externas</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice un paño limpio y suave y un agente desinfectante de uso habitual en hospitales que contenga alcohol.</li> <li>• Escurra el exceso de agua/solución del paño.</li> <li>• Seque las superficies con un paño limpio o toallita de papel.</li> </ul>                                                |
| <b>Cables del paciente y los latiguillos</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpie suavemente los cables y los latiguillos con un paño humedecido con agua y un jabón suave.</li> <li>• Seque el exceso de humedad con un paño seco sin pelusa y déjelos secar al aire.</li> </ul>                                                                                                  |
| <b>Electrodos reutilizables</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para eliminar una crema o gel, utilice agua templada y un cepillo de cerdas blandas.</li> <li>• Desinfecte los electrodos con un desinfectante sin alcohol. Asegúrese de que no se humedezcan los conectores y las tomas.</li> </ul>                                                                    |
| <b>Cabezal de impresión</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumerja bastoncillos de algodón en alcohol etílico y escurra el exceso de solución.</li> <li>• Abra la puerta de la impresora.</li> <li>• Limpie suavemente el elemento térmico con los bastoncillos de algodón.</li> <li>• Cierre la puerta de la impresora cuando esté completamente seco.</li> </ul> |

### RECOMENDACIONES:

- Limpie y desinfecte las superficies externas al menos una vez al mes.
- Retire los cables y latiguillos del equipo antes de

### ADVERTENCIAS:

- Nunca sumerja los cables ni los latiguillos en ningún líquido.
- No vierta o rocíe ningún líquido directamente sobre los cables o latiguillos.
- No permita que se filtren líquidos en las conexiones o aberturas.
- No esterilice en autoclave ni limpie al vapor los cables y latiguillos.
- Retire siempre los cables y los latiguillos del dispositivo antes de limpiarlos.
- No utilice soluciones desinfectantes alrededor de las piezas metálicas.

|                                                                                   |                                                                            |                         |            |               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |            |               |            |           |
|                                                                                   |                                                                            | <b>VERSIÓN</b>          |            | <b>PÁGINA</b> |            | <b>DE</b> |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b> | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |           |

## FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el equipo, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

| Problema                                                                                                     | Posible causa                                                                      | Solución                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aparece en pantalla</b>  | No hay ninguna batería instalada en el equipo                                      | Instale una batería y conecte el equipo a un enchufe de pared de CA para cargar la batería.                                                   |
| <b>El indicador luminoso ámbar del teclado se ilumina intermitentemente</b>                                  | La carga de la batería esta baja.                                                  | Conecte el equipo a un enchufe de pared para cargar la batería.                                                                               |
| <b>Aparece en pantalla</b>  | La puerta de la impresora está abierta.                                            | Cierre la puerta de la impresora.                                                                                                             |
| <b>Aparece en la pantalla el mensaje “Cabezal de impresora demasiado caliente”.</b>                          | El mecanismo de la impresora se ha calentado debido a un uso excesivo.             | Apague el equipo y enciéndalo de nuevo después de 3 a 4 minutos. Si el problema vuelve a producirse con un uso normal, reporte el fallo.      |
| <b>EL equipo no se enciende cuando esta alimentado por la batería.</b>                                       | La batería está completamente descargada.                                          | Conecte el equipo a un enchufe de pared de CA para cargar la batería.                                                                         |
| <b>El equipo se apaga cuando esta alimentado por la batería.</b>                                             | La carga de la batería esta baja o está habilitada la función “Apagado automático” | Conecte el equipo a un enchufe de pared de CA para cargar la batería. Compruebe el ajuste de configuración de la función “Apagado automático” |
| <b>Aparece un mensaje que indica que la derivación “X” esta desconectada.</b>                                | Electrodo desconectado.                                                            | Vuelva a conectar el electrodo.                                                                                                               |